



RoMedicClips erleichtern das Positionieren des Anwenders. Sie lassen sich mit allen Ziehlaken und den meisten Hebebügeln verwenden. RoMedicClips werden paarweise verwendet und an beiden Seiten des Hehebügels angesetzt.

Das SystemRoMedic umfasst eine breite Auswahl an funktionellen und bequemen Hebegurten hoher Qualität, speziell entwickelt für verschiedene Arten von Hebeaktionen und für Patienten mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Hebegurte sind in mehreren Materialausführungen und Größen von XXS bis XXL erhältlich. Sämtliche Modelle sind sowohl sicher als auch einfach in der Anwendung und halten einer Belastung bis zu 300 kg stand. Die Wahl von Modell und Material ist abhängig von der jeweiligen Hebesituation und dem Bedarf des Patienten.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung und mechanische Kontrolle

Unterziehen Sie den Hebegurt regelmäßigen Funktionskontrollen. Nach jeder Wäsche prüfen. Prüfen Sie Nähte und Material auf einwandfreien Zustand. Prüfen Sie, ob das Material abgenutzt oder verblichen ist. Belasten Sie Schnallen und Griffe und prüfen Sie, ob sie starker Belastung standhalten. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung



Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

Verweilen Sie während des Umsetzungsmoments beim Patienten.

Vermeiden Sie die Gefahr des Abgleitens oder Unbehagens durch sorgfältige Prüfung des Hebegurtes. Zunächst die Rückenschlaufen des Hebegurtes einhängen, danach die Schlaufen der Beinstütze. Nur geprüfte Hehebügel verwenden.

Anwendung der RoMedicClips

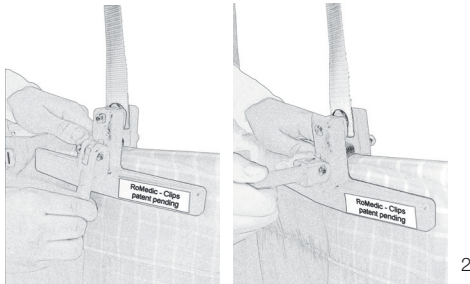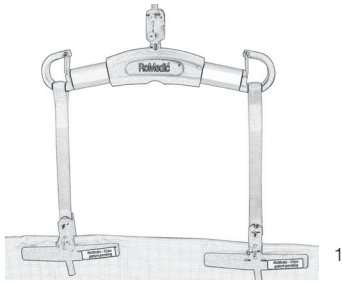

1. Zunächst RoMedicClips am Hebebügel anbringen, indem Sie die Aufhängeschlingen an den Haken des Hebebügels einhaken.

Falten Sie das Ziehaken dort, wo der Clip angebracht werden soll.

2. Vor der Positionierung ein Stück der Seite des Ziehakens in die Öffnung der Clips einführen.

Clip so nahe wie möglich dem Anwender ansetzen, vor allem bei geringer Hubhöhe.

Das Ziehaken in den Clips festklemmen, indem der Sperrhebel von offener Stellung in die gesperrte Lage gezogen wird.

Die Klemmbreite zwischen den Clips wird durch Drehen des Sperrhebels geregelt.

3. Fahren Sie den Heber hoch, wenn der Anwender bereit ist für die Positionierung. Seien Sie aufmerksam während der Prozedur und brechen Sie den Vorgang ab, wenn etwas nicht in Ordnung zu sein scheint. Positionierung beenden, wenn der Anwender in der gewünschten Lage ist.

Pflegeanleitung:

Bei Bedarf RoMedicClips mit warmem Wasser oder Spiritus reinigen.

Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Für ein komplettes Händlerverzeichnis verweisen wir auf www.handicare.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die richtige Version des Handbuchs verfügen. Die neueste Version steht auf unserer Homepage www.handicare.com zum Download bereit.

Handicare AB
Veddestav. 15. Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

