


# SlingBarSpreader M

SystemRoMedic™



Gebrauchsanweisung - Deutsch

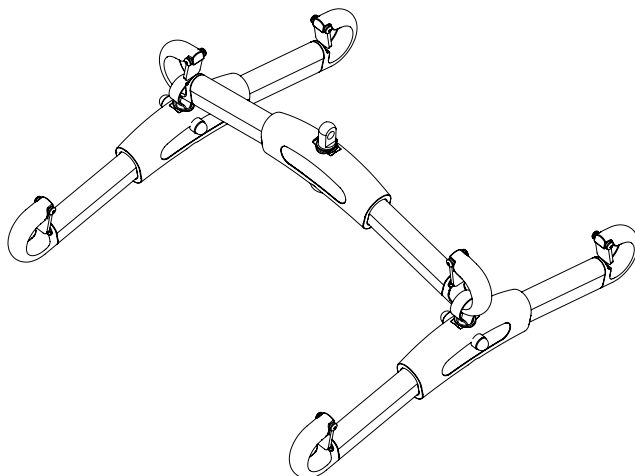

**Höchstlast: 300 kg/paar**

SlingBarSpreader M Seitenbügel werden in Verbindung mit einem Hehebügel bei stationären oder mobilen Liftern verwendet. Bei der Verwendung von Seitenbügeln steht mehr Platz im Hebegurt zur Verfügung, was besonders Übergewichtigen und schmerzempfindlichen Patienten zugute kommt.

Handicare Produktserie SystemRoMedic umfasst u. a. Lifter und Hebegurte. SystemRoMedic, ein Universalsystem zum Versetzen von Personen, lässt sich in vier Bereiche aufgliedern: Umsetzen, Positionieren, Stützen und Heben.



## Kontrolle der Funktion

### Sichtprüfung Kontrolle

Prüfen Sie regelmäßig die Funktion. Vergewissern Sie sich, dass das Material unbeschädigt ist. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



## Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung

Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

Verweilen Sie während des Umsetzmoments beim Patienten.

Vermeiden Sie die Gefahr des Abgleitens oder Unbehagens durch sorgfältige Prüfung des Hebegurtes. Zunächst die Rückenschlaufen des Hebegurtes einhängen, danach die Schlaufen der Beinstütze. Nur geprüfte Hehebügel verwenden. Das zusammengebaute Produkt darf jedoch auf keinen Fall höher belastet werden als das Einzelteil mit der geringsten Höchstbelastung. Prüfen Sie in jedem Fall vor der Anwendung die zulässige Höchstbelastung von Lifter und Zubehör. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



## Produktbeschreibung SlingBarSpreader M


SlingBarSpreader besteht aus Aluminium.

SlingBarSpreader M wird in Verbindung mit von Handicare zugelassenen stationären bzw. mobilen Liftern verwendet. Die Haken sind mit Aushakenschutz versehen.

SlingBarSpreader M wird nur paarweise und in Verbindung mit von Handicare zugelassenen Hebebügeln verwendet.





### Wichtige Hinweise!

- SlingBarSpreader darf nur paarweise eingesetzt werden.
- Die Aufhängeösen dürfen nicht verdreht werden.
- SlingBarSpreader darf nicht als Hebebügel verwendet und nicht an das Gelenk des Lifters angeschlossen werden.
- SlingBarSpreader so anbringen, dass die Kopfsymbole auf der gleichen Seite wie der Hebebügel zu liegen kommen.
- Die Rückenschlingen des Hebegurtes sind an dem mit Kopfsymbol gekennzeichneten Hebehaken anzubringen. 


## Montage

Aufhängeöse am Haken des Hebebügels einhängen. Den Vorgang auf der anderen Seite wiederholen.

**Achtung!** Achten Sie darauf, dass die Kopfsymbole am SlingBarSpreader auf der gleichen Seite des Hebebügels zu liegen kommen.

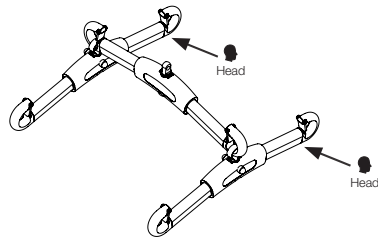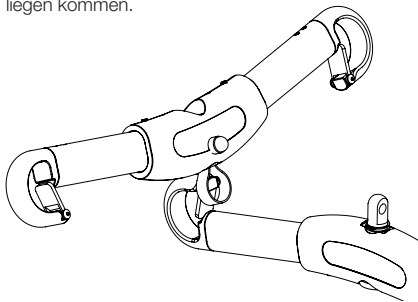

## Anwendung

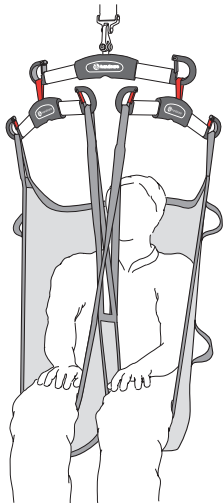

Hebegurt am Patienten anlegen, siehe Anleitung für den jeweiligen Hebegurt.

Rückenschlingen an der mit Kopfsymbol gekennzeichneten Seite des SlingBarSpreader M anbringen. Beinteile am anderen Ende anbringen.

**ACHTUNG!** Bei Verwendung von Hebegurten mit 3-Punktaufhängung ist die mittlere Öse am gleichen Ende wie die Rückenschlingen anzubringen. Sie dürfen nicht an dem Hebebügel angebracht werden, an dem der SlingBarSpreader M montiert ist.

## Höchstbelastung

Die einzelnen Produkte innerhalb der zusammengebauten Hebeeinheit (Lifter, Hehebügel, Hebegurt, Waage und evtl. anderes Zubehör) haben unterschiedliche zulässige Höchstbelastungen. Das zusammengebaute Produkt darf jedoch auf keinen Fall höher belastet werden als das Einzelteil mit der geringsten Höchstbelastung. Prüfen Sie in jedem Fall vor der Anwendung die zulässige Höchstbelastung von Lifter und Zubehör. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## Reinigung

Bei Bedarf den Hehebügel mit warmem Wasser oder Spiritus reinigen. Keine Reinigungsmittel verwenden, die Phenol oder Chlor enthalten, da diese Substanzen das Material beschädigen können.

Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Für ein komplettes Händlerverzeichnis verweisen wir auf [www.handicare.com](http://www.handicare.com). Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die richtige Version des Handbuchs verfügen. Die neueste Version steht auf unserer Homepage [www.handicare.com](http://www.handicare.com) zum Download bereit.

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

