


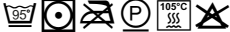
bruksanvisning



MAXX 250 clinic

Trycksårsterapi tunga madrasser

Läs bruksanvisningen noga innan du använder systemet och följ **varningsanvisningarna!**

Produktnamn	MAXX 250 clinic
leveransomfång	<ul style="list-style-type: none"> Trycksårsterapi kraftig madrass med skumkärna PU-lock (avtagbart med dragkedja)  Bruksanvisning (V03), andra språk för bruksanvisningen finns här: manuals.funke-medical.eu
Indikationer / tillämpningsområden	<ul style="list-style-type: none"> Profylax av trycksår Trycksårsterapi upp till klass 4 (Seiler / EPUAP) Smärta terapi För patienter med mycket hög risk för trycksår
Kontra	Okänt
Tillåten patientvikt min. - Max.	40 - 250 kg
material	<ul style="list-style-type: none"> Kärna: PU-skum Omslag: PU-belagt PES-bärarmaterial
Mått	Bredd: 80-100 cm Längd: 190-220 cm
Produkt vikt	18 kg (90/200 cm)
Hjälpnummer (enligt definitionen i §139 SGB V)	
Medicinsk utrustning	Klass 1, MDR 2017/745 
Teknisk säkerhet / flamskydd	Flamskyddstest enligt DIN EN 597 I + II, BS 7175 sek 3 spjålsång 5, BS 7177
Testning för toxikologisk oskadlighet / biokompatibilitet	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
varningar	<ul style="list-style-type: none"> Innan du använder systemet för första gången måste du förbereda systemet för första gången (se "Förbereda systemet för användning"). Lämplig för justerbara liggande ytor Sidoskenans övre kant minst 22 cm över madrassens överbelastade övre kant
garanti	5 år på skumkärnans funktionella egenskaper (pro-rata-garanti)
underhåll	Nej
Rengöringsinstruktioner (madrassskydd)	<p>Valfritt kan locket:</p> <ul style="list-style-type: none"> genom att torka desinfektion med kommersiellt tillgängliga desinfektionsmedel gjorda av isopropanol (t.ex. Bacillol) eller med andra lämpliga DGHM-listade produkter (t.ex. ECOLAB rengöringsduk Incidin OxyWipe S XL) eller kemotermsk rengöring eller genom autoklavering <p>Omslaget är klart för återanvändning i varje enskilt fall. OBSERVERA: om synlig smuts inte kan avlägsnas och / eller om det finns synliga skador måste locket kasseras i enlighet med nationella föreskrifter.</p> 
Rengöringsinstruktioner (kärna)	<p>Skumkärnan utan lock kan valfritt rengöras:</p> <ul style="list-style-type: none"> med kommersiellt tillgängliga medel. Detta kan uppnås genom att blötlägga det förorenade området eller spraya hela skumkärnan med ett desinfektionsmedel (t.ex. Bacillol eller ECOLAB-skumspray Incidin OxyFoam S bestående av väteperoxid). Då måste skumkärnan lufttorkas. eller genom autoklavering i enlighet med RKI: s riktlinjer. <p>I varje enskilt fall är skumkärnan redo för återanvändning. OBSERVERA: om synlig förorening inte kan avlägsnas och / eller om det finns synliga skador måste skumkärnan kasseras i enlighet med nationella föreskrifter.</p>
Förbered systemet för användning	<ol style="list-style-type: none"> Produkten är avsedd och lämplig för användning i hemmet och institutionella områden. Ta bort madrassen ur lådan omedelbart efter mottagandet. Lägg madrassen på sängen. Notera avtrycket "DENNA SIDA UPP" på madrassens överdel.

RKI = Robert Koch Institute; DHGM = tyska föreningen för hygien och mikrobiologi; MPG = Medical Devices Act; Autoklavering = fraktionerad vakuumprocess vid 105 grader C och 55 minuter

 Tillverkare när det gäller MPG och MDR 2017/745

Funke Medical AG • Ährenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel. + 49-2865-266 93 50 • Fax: + 49-2865-8133 • info@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 18.06.2021 12:56