




FlexibleSling met ongedeelde beensteunen.

Max: 300kg

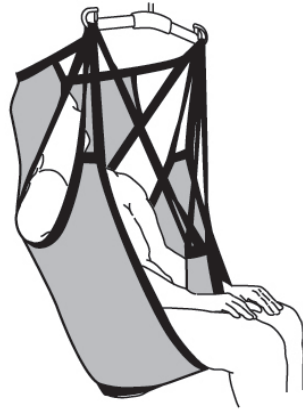

De FlexibleSling met gescheiden beensteunen.

De FlexibleSling valt soepel en flexibel rond het lichaam en geeft een gevoel van veiligheid. De band is leverbaar in twee modellen; één met gedeelde beensteunen en één met ongedeelde beensteunen. De FlexibleSling geeft veel steun en past zich aan aan de vorm van het lichaam van de patiënt. Na gebruik kan hij in de rolstoel etc. blijven.

SystemRoMedic omvat vier categorieën: verplaatsen, repositioneren, ondersteunen en tillen.



Functionele inspectie

Controleer de toestand en werking van de tilband regelmatig, en altijd na wassen.

Controleer of dat het materiaal niet is versleten, beschadigd of gebleekt. Als er tekenen van slijtage zijn moet het product worden getest op sterkte en worden weggegooid als er twijfel is aan de veiligheid.



Lees altijd de instructies

Lees de instructies voor alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmaterialen.

Kies de maat tilband zorgvuldig zodat ongemak wordt voorkomen en de patiënt niet uit de band kan glijden. Als de band te groot is bestaat het risico dat de patiënt er uit kan glijden.



Let op, bij gebruik van een tilband met standaard (niet-gescheiden) beensteunen kan de patiënt voorover kantelen.

Laat een patiënt die opgetild is nooit zonder toezicht.

Breng eerst de ruglussen van de tilband aan en daarna de beensteunlussen. Gebruik altijd een goedgekeurd tiljuk.

De FlexibleSling met gescheiden beensteunen.

Aanbrengen van de tilband terwijl de patiënt in een rolstoel/stoel of in bed zit

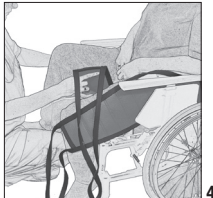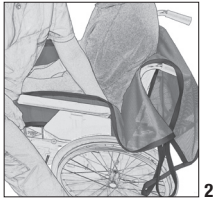

1. Hou de tilband in één hand en pak met uw andere hand de onderrand van de tilband. Dit gaat gemakkelijker als de patiënt voorover leunt of geholpen kan worden om iets voorover te leunen. Geleid de tilband omlaag achter de rug van de patiënt door hem langs de achterkant van de stoel/rolstoel of het bed te schuiven, idealiter tot aan het staartbeen. Het middendeel van de tilband moet de rug van de patiënt volgen.


2. Geleid de tilband omlaag tot aan de heupen van de patiënt. Doe dit door de band in de ruimte in de achterste hoeken van de rolstoel te duwen.

3. Werk vervolgens de beendelen langs de buitenkant van de dijen van de patiënt. Trek, terwijl u tegenover de patiënt staat, aan de onderrand van de beensteun zodat de tilband op zijn plaats rond de heupen glijdt. Lichte druk tegen de knieën van de patiënt voorkomt dat deze uit de stoel glijdt.

4. Na een controle of de beensteunen aan beide zijden even lang zijn plaatst u ze onder de dijen van de patiënt. Kruis de beensteunen en haak ze aan het tiljuk.

Start het heffen van de lift; stop als de banden strak staan en controleer of alles OK is voordat u doorgaat met tillen.




Verwijderen van de tilband als de patiënt zit

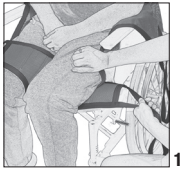

1. Vouw de beensteun en laat hem onder zichzelf door glijden terwijl u hem wegtrekt aan de buitenkant van de dij.

2. Trek dan de tilband omhoog achter de rug van de patiënt.

Aanbrengen van de tilband terwijl de patiënt in bed, op een brancard of op de vloer ligt

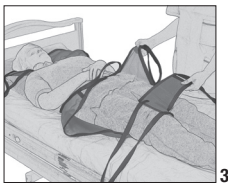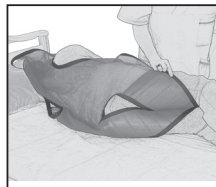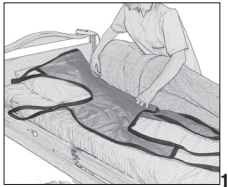

1. Draai de patiënt naar u toe. Plaats de tilband zo dat het productlabel naar het onderliggende oppervlak gekeerd is en het middendeel van de tilband de ruggengraat volgt. De bovenrand van de tilband moet zo hoog zijn dat het hoofd wordt ondersteund en de onderrand moet gelijk zijn met het staartbeen. Plaats de tilband zo diep mogelijk onder de patiënt. Duw de lus van het achterdeel onder de band zodat deze bereikbaar is als u de patiënt weer op de tilband hebt gedraaid.

2. Om de band in minder stappen aan te brengen kunt u het achterdeel tegen de rug van de patiënt vouwen en de beensteunen tussen de knieën van de patiënt leggen terwijl deze naar u toe gekeerd is, en ze dan vooruit te trekken als de patiënt op de tilband ligt. Stop en controleer of alles is OK voordat u doorgaat met tillen.

3. Draai de patiënt weer op de tilband en trek de hoofdondersteuning en de beensteunen uit.

4. Kruis de beensteunen en haak ze aan het tiljuk. Start het tillen van de lift.

FlexibleSling met ongedeelde beensteunen.


Aanbrengen van de tilband terwijl de patiënt in bed, op een brancard of op de vloer ligt



1. Draai de patiënt naar u toe. Plaats de tilband zo dat het productlabel naar het onderliggende oppervlak gekeerd is en het middendeel van de tilband de ruggengraat volgt. De bovenrand van de tilband moet zo hoog zijn dat het hoofd wordt ondersteund en de onderrand moet gelijk zijn met het staartbeen. Plaats de tilband zo diep mogelijk onder de patiënt. Duw de lus van het achterdeel onder de band zodat deze bereikbaar is als u de patiënt weer op de tilband hebt gedraaid.
2. Om ervoor te zorgen dat de tilband correct wordt aangebracht en het middendeel van de ruggengraat van de patiënt volgt kun u het achterdeel tegen de rug van de patiënt vouwen.
3. Draai de patiënt weer op de tilband en trek de hoofdondersteuning en de beensteunen uit.

Bevestig de bandlussen aan het tiljuk, begin met de bovenste bandlussen en dan de beensteunen. Start het heffen van het tiljuk en stop dan om te controleren of alles naar behoren is voordat de patiënt van het onderliggende oppervlak wordt getild.

De FlexibleSling met gedeelde en ongedeelde beensteunen, verwijderen van de tilband terwijl de patiënt ligt

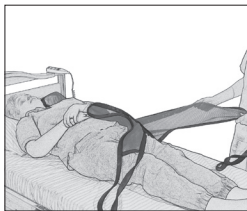

Draai de patiënt naar u toe en vouw de tilband onder de patiënt zodat het materiaal naar u toe glijdt als u er aan trekt nadat de patiënt weer op zijn rug ligt.

Alternatieve manier van aanbrengen



De hoge rug van de tilband biedt een goede steun voor het hoofd en de patiënt kan zijn armen binnen of buiten de tilband houden.

Voor het model met gedeelde beensteunen worden de beensteunen gewoonlijk gekruisd voordat ze aan het tiljuk worden gehaakt.

Materiaal:

Netpolyester: Luchtig, goed ventilerend materiaal dat ideaal is om onder de patiënt te laten.

Onderhoud van het product:

Lees het productlabel.



Gebruik geen wasmiddel.
Hang de band, voor een maximale levensduur, op om te drogen of droog hem bij lage temperatuur in de droger.

Maten

Tilbanden kunnen vaak worden gebruikt voor zowel 2- als 4-punts tiljucken. Het is van essentieel belang dat de breedte van het tiljuk geschikt is voor het model tilband en de status en capaciteiten van de patiënt. Als het voorkomen van infecties belangrijk is kunnen wegwerptilbanden gebruikt worden die bij slechts één patiënt worden aangebracht.

De FlexibleSling met gescheiden beensteunen.

Maat		XXS/grijs	XS/oranje	S/rood	M/geel	L/groen	XL/paars
Rec.	lbs	22-66	44-77	55-121	110-165	154-243	220-287
gewicht patiënt	kg	10-30	20-35	25-55	50-75	70-110	100-130
Tilband- hoogte	inch	29,5	32	35,5	40	40	41
	cm	75	81	90	102	102	104

FlexibleSling met ongedeelde beensteunen.

Maat		XS/oranje	S/rood	M/geel	L/groen	XL/paars
Rec.	lbs	44-88	66-154	132-198,5	176-286,5	242,5-397
gewicht patiënt	kg	20-40	30-70	60-90	80-130	110-180
Tilband- hoogte	inch	31,5	33,5	36,5	38	38,5
	cm	80	85	93	96	98

Neem bij vragen over product-trials, advies of informatie contact op met uw Handicarevertegenwoordiger.

Neem, als u meer informatie nodig hebt, contact op met uw verplaatsingsspecialist of ga naar www.handicare.com. Zorg dat u altijd beschikt over de meest recente versie van de handleiding. Handleidingen kunnen worden gedownload van onze website: www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

