



RoMedicClips forenkler posisjonering av brukeren. De er laget slik at de kan benyttes sammen med samtlige trekkklaken og de fleste løftebøyer. RoMedicClips brukes alltid som par og plasseres på hver side av løftebøylen.

I SystemRoMedic finnes et bredt utvalg av funksjonelle, komfortable og høykvalitative løfteseler, spesielt tilpasset ulike typer av løft og for brukere med ulike behov. Løfteselene finnes i flere ulike materialer og størrelser - fra XXS till XXL. Alle modeller er både sikre og meget lette i bruk, og de kan brukes på brukere opp til 300 kg. Valget av modell og materiale avgjøres ut fra løftesituasjonen og brukerens behov.



Kontroll av funksjon

Visuell og mekanisk inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Kontroller alltid etter vask. Kontroller at sømmer og materiale er helt og skadefritt. Kontroller om materialet er utsatt for slitasje eller er blitt bleket. Belast og kontroller at spenner og håndtak holder når du drar kraftig i selen. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



Les alltid manualen



Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.

Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

Unngå utglidningsrisiko eller ubehag ved å være grundig når man prøver løfteselen. Huk først på løfteselens rygggløkker på løftebøylen, huk deretter på beinløkkene. Benytt en utprøvd løftebøyle.

Brukerveiledning for RoMedicClips

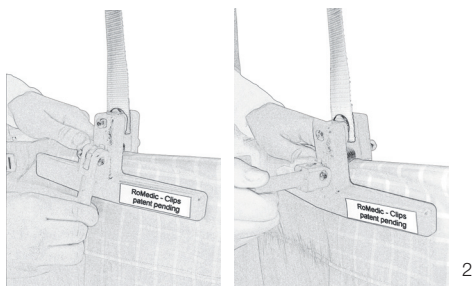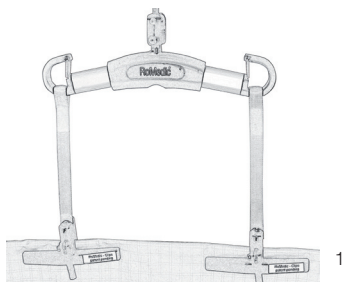

1. Plasser RoMedicClips på løftebøylen ved å feste løftebåndene på løftebøylens kroker.

2. Fold trekkklakenet der man ønsker å feste klipsene, tre det inn i åpningen på klipset.
Plasser klipsene så nær brukeren som mulig, spesielt ved lav løftehøyde. Klyp fast trekkklakenet ved å sette låsehendelen til låst stilling. Åpningen i klipset justeres ved å snurre låsehendelen.

3. Hev løfteren når brukeren er klar for posisjonering. Vær oppmerksom under hele posisjoneringsmomentet og avbryt prosessen hvis noe virker unormalt. Avslutt posisjoneringen når brukeren er i ønsket leie.

Vedlikeholdsråd:

Ved behov rengjøres RoMedicClips med varmt vann og desinfisering/vaskesprit.

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se www.handicare.com for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: www.handicare.com

Handicare AB
Veddestav. 15. Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

