
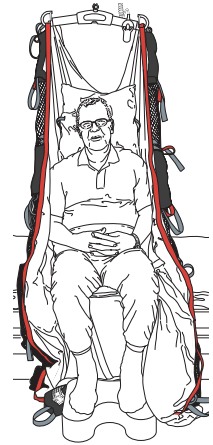
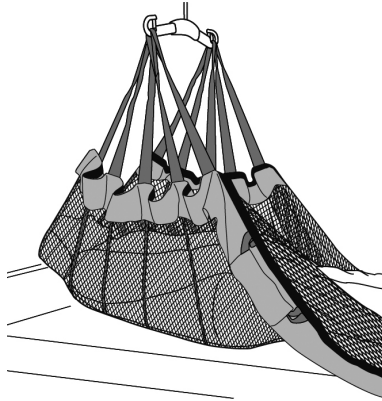


SafeHandlingSheet

SystemRoMedic™

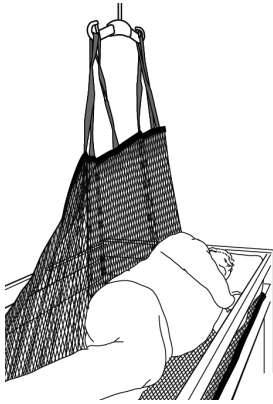

Max vekt: 300 kg, 400kg, 570 kg

SafeHandlingSheet er et laken som kan benyttes til en mobil eller stasjonær løfter ved posisjonering i sengen. MålSafeHandlingSheet er utviklet for å bistå der man har behov for å posisjonere brukeren i sengen.

I SystemRoMedic finnes et bredt utvalg av funksjonelle, komfortable og høykvalitative løfteseler, spesielt tilpasset ulike typer av løft og for brukere med ulike behov. Løfteselene finnes i flere ulike materialer og størrelser - fra XXS till XXL. Alle modeller er både sikre og meget lette i bruk, og de kan brukes på brukere opp til 300 kg. Valget av modell og materiale avgjøres ut fra løftesituasjonen og brukerens behov.



Kontroll av funksjon

Visuell og mekanisk inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Kontroller alltid etter vask. Kontroller at sømmer og materiale er helt og skadefritt. Kontroller om materialet er utsatt for slitasje eller er blitt bleket. Belast og kontroller at spenner og håndtak holder når du drar kraftig i selen. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



Les alltid manualen

Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.


Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

Unngå utglidningsrisiko eller ubehag ved å være grundig når man prøver løfteselen. Huk først på løfteselens rygglokker på løftebøylen, huk deretter på beinlukkene. Benytt en utprøvd løftebøyle.

Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har spørsmål.

Produktbeskrivelse av SafeHandlingSheet

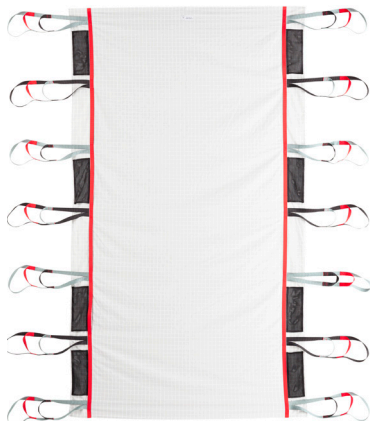

SHSheet L Polyesternet/WendyLett4Way

SafeHandlingSheet er utformet med løftebånd på begge lang-sidene.

For å forenkle forflytningen for medhjelperen, er annenhvert løftebåndene farget i grått og svart.

På løftebåndene finnes tre løkkealternativer som også har varierende farger; grått, rødt og svart.


SafeHandlingSheet er merket med anvisninger på produktet som viser hvilken side som skal plasseres opp på sengen. "This side up".

Produktmerkingen er også plassert slik at den viser midten på lakenet.




SHSheet L Polyesternet

Når posisjoneringen er utført, brettes båndene bare inn under madrassen eller plasseres i lommer på sidene.

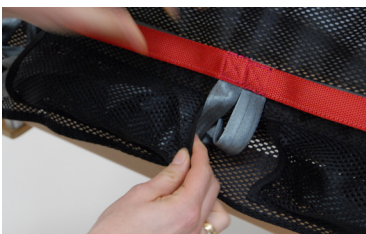

Tips!


- Re gjerne sengen med et vanlig laken ovenpå SafeHandlingSheet.
- Plasser brukeren midt på SafeHandlingSheet.
- Overskuddet av tøyet res inn ved fotenden. Dette for å være tilgjengelig hvis brukeren glir ned i sengen og flere forflytninger høyere opp i sengen er nødvendig.
- Takløfter med travers anbefales.
- Hvis mulig, prøv i første omgang å flytte sengen i stedet for å skyve/dra brukeren når han/hun har lettet fra underlaget.

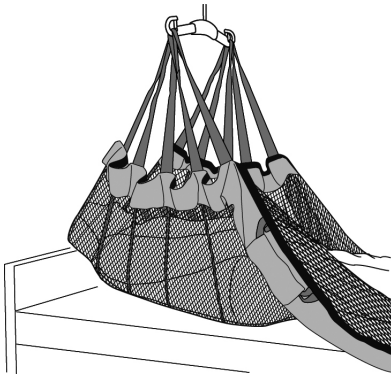

Høyere opp i sengen:

De fem øverste båndene på hver side (eller så mange som behøves for å dekke friksjonspunktene) hektes på løftebøylen.

Start hevingen av løfteren og før brukeren høyere opp i sengen når friksjonspunktene letter fra underlaget.

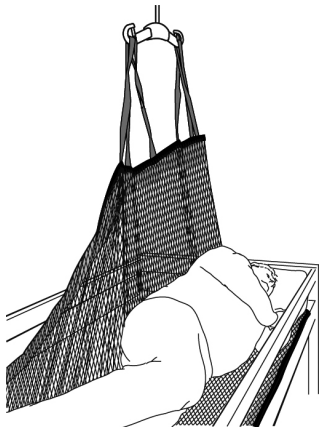

Vending i sengen:

For at brukeren skal havne midt i sengen etter vending, anbefales at man først gjør et løft (se: Høyere opp i sengen) i sideleie mot den ene kanten av sengen, for så å gjennomføre vendingen.

Koble så de fire til fem mest sentrale båndene på den ene siden av SafeHandlingSheet på løftebøylen. Bruk medhjelper eller sengegrind på begge sider for økt sikkerhet. Start vendingen.

Bytte av SafeHandlingSheet:

Ved bytte av SafeHandlingSheet utføres et løft i samsvar med tidligere beskrivelse. Når brukeren har lettet fra underlaget, fører man inn et nytt SafeHandlingSheet under brukeren.


Utfør så en vending (se: Vending i sengen) med det nye lakenet og rull/trykk ned det gamle lakenet bak ryggen på brukeren. Senk så ned på ryggen igjen. Utfør nå enda en vending med det nye lakenet, men til motsatt side og trekk til side det gamle lakenet.

Oppreisning - sittende på sengekanten

Obs! Brukeren må selv kunne sitte på sengekanten for at denne oppreisning skal være passende.


Senk sengen slik at brukeren får støtte under føttene når han/hun sitter på sengekanten.

Er ikke sengen tilstrekkelig lav nok, benytt en fotskammel.

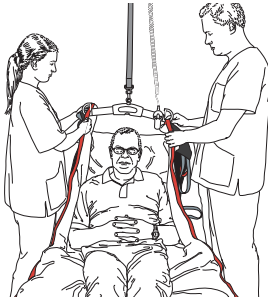

Forbered brukeren på oppreisningen.

Hev ryggstøtten på sengen og plasser de øverste håndtaksbåndene på løftebøylen.

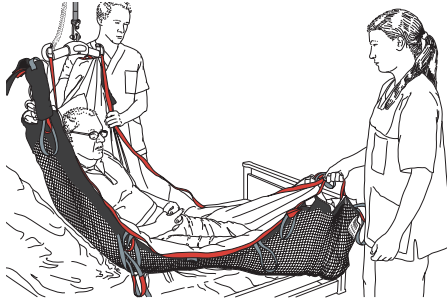


En medhjelper griper håndtakene ved fotenden.

Start oppreisningen ved å heve løfteren.

Medhjelperen forflytter brukerens bein over sengekanten og ned på gulvet.

Forsikre deg om at brukeren sitter stødig på sengekanten. Kne og hoft skal være i samme høyde.

Plasser passende stå- eller gåstøtte foran brukeren for oppreisning til stående.

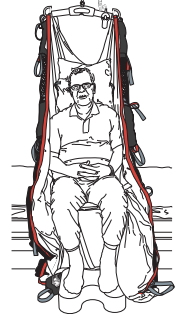

Produkt

SHSheet L poly nett

Art nr

47522007

Mål

240 x 115

Materiale

Polyesternet: Luftig og ventilerende materiale 300 kg / 661 lbs.

SHSheet XL poly

47502008

240 x 115

Polyester: Slitesterkt materiale med lav friksjon 400 kg / 900 lbs.

SHSheet XXL poly/
forsterket

47502009

240 x 130

Polyester: Slitesterkt materiale med lav friksjon 570 kg / 1250 lbs.

SHSheet L Poly nett/
WendyLett4Way

47542007

240 x 115

Polyesternet: Luftig og ventilerende materiale 300 kg / 661 lbs.

WendyLett4Way: Liggeoverflate med lakenstoff

Maksimumsvekt

Vedlikeholdsråd:

Les på løfteselens merkeetikett.



Bruk ikke skyllemiddel.

Ungå tørketrommel for lengre levetid.

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se www.handicare.com for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

