


FlexibleSling

SystemRoMedic™

Utprovningsprotokoll

Vårdtagarens namn:	_____
Personnummer:	_____
Brukarvikt:	_____ Kg
Utprovad av:	_____
Datum:	_____
Telefon:	_____

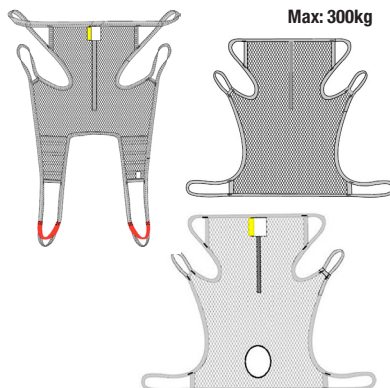

FlexibleSling är en lyftsele som är flexibel mot kroppen och ger trygghetskänsla. Den finns i tre modeller; med delade benstöd, odelade benstöd och en modell med odelade benstöd samt hygienöppning. FlexibleSling är utformad för att både tillgodose behov av mycket stöd och att lyftselen formar sig efter kroppen. Den kan lämnas kvar i rullstol, formgjuten sits eller dylikt.



Kontroll av funktion

Visuell och mekanisk inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.

Innan förflyttningen

Koppla först de översta lyftbanden och sist benstödens lyftband. Förbered brukaren inför lyftet och ha ögonkontakt. Stanna till då lyftbanden sträcks för att se att allt är rätt.

Ryggdelens nederkant skall vara placerad enligt bild:



Vilken storlek används?

XX-Small X-Small Small Medium Large X-Large XX-Large

Vilket material används?

Polyesternät

Tillbehör:

SoftLegSupport Anpassningsband StrapsPadding

Vilken lyftbygel används?

Val av benstöds placering (FlexibleSling med benstöd):



Korsade



Omlott



Delade

Instruktioner för användning

Får lyftselen lämnas kvar i rullstolen under brukaren?

Ja

Nej

Kan lyftselen användas vid toalettbesök?

Ja

Nej

Kan lyftselen användas vid duschsituation?

Ja

Nej

Ögleanternativ/anpassningsband: _____

Har den personal som använder hjälpmedlet:

Läst bruksanvisningen:

Ja

Nej

Fått praktisk instruktion i förflyttning av vårdtagaren:

Ja

Nej

Information lämnad till: _____

Instruktioner till personalen:

Tex. Hög grinden på den sida ni vänder mot. Placering av huvud/ armar/ händer? Placering av ben/ fötter? Använd sängens funktioner.

Antal medhjälpare: _____

Instruktioner till vårdtagaren:

Tex. På vilket sätt kan vårdtagaren vara aktiv? Vilka instruktioner används?

Övrigt:

Vid förändringar eller frågor kontakta utprovaren!

Manualer och instruktioner om funktionstest finns på Direct Healthcare Groups hemsida www.directhealthcaregroup.com

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden

Tel: +46 (0)8-557 62 200
info.se@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com