

# Dusjstallebord HUDSON



## **Når vanlig dusj og badekar er umulig**

Dusjen er der dagen starter for mange av oss.

Funksjonshemninger kan gjøre det umulig å benytte vanlig dusj eller badekar.

Med dusjstallebord Hudson kan de fleste starte dagen med en dusj allikevel.



handicare

# Dusjstabellebord Hudson

Dusjstabellebord Hudson har en stelleflate av vendbare lameller som har en myk side for stell og en fastere side for dusj. Vannet renner mellom lamellene og ned i en kum med avløp som går under hele stelleflaten.

Det er derfor egnet til både stell og dusj av dem som ikke kan benytte badekar eller vanlig dusj.




En trinnløs og elektrisk høydejustering på hele 70 cm, fra 30 til 100 cm, øker muligheten for selvhjulpenhet og mestringsfølelse. En aktiv bruker kan gå opp på stellebordet selv, foreldre i rullestol kan selv stille et aktivt barn, og egenforflytning fra rullestol til stellebord er mulig.

Dusjstabellebord Hudson er veggmontert og oppfellbart, slik at også små bad og stellerom kan tilpasses for de som må stelles og dusjes liggende.

Stellebordet betjenes enkelt ved hjelp av en håndkontroll, og er lett å rengjøre. Det er god plass for mobil personløfter under stellebordet, idet det ikke er noen ben å ta hensyn til.

Maks. brukervekt er 150 kg.

Stellebordet monteres ved at en kompakt løfte enhet skrues fast på veggen. Løfte enheten skjuler løftemekanisme, elektronikk og stålramme.

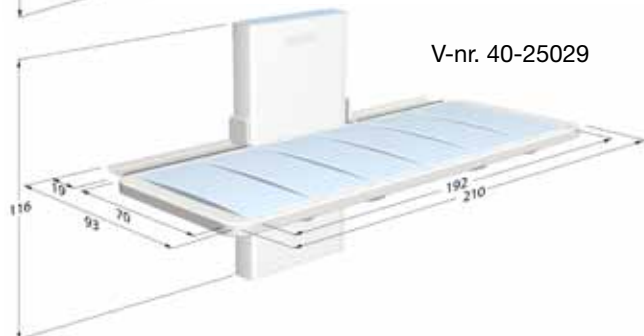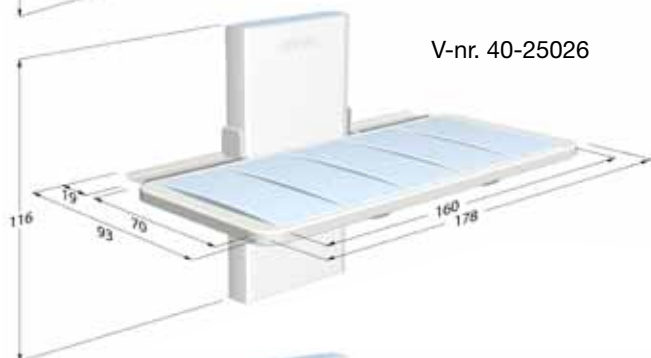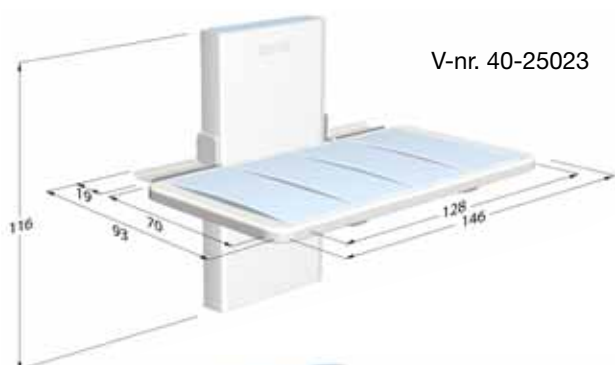


## Tilbehør

Sengehest, nedfellbar  
V-nr. 40-25036



Endegavl, fast  
V-nr. 40-25038

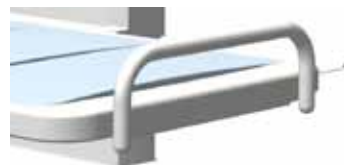

Når sengehesten ikke er i bruk, skjules den under stellebordet.



handicare

Telefon 03250  
www.handicare.no