


Qvintett ComSafe SENGEALARM

Innebygd
sengealarm
for urolige
brukere



En pålitelig og unik løsning der Qvintett ComSafe sengealarm er fast plassert og innebygd i sengen. Ingen løse kabler, alarmmatt, ingen sensorer som er i veien eller ikke ligger på rett plass. Det eneste som behøves er en tilslutning til byggets alarmsystem.

QVINTETT COMSAFE SENGEALARM

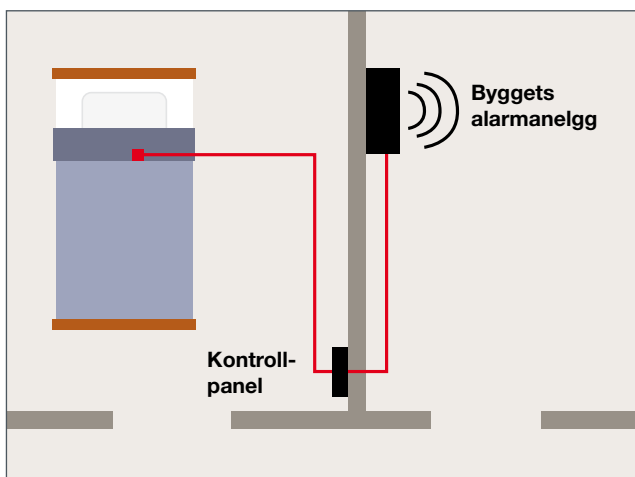

Qvintett sengealarm monteres i sengen og kobles til byggets alarmanlegg.

Qvintett ComSafe sengealarm

Sengealarmens sender er montert under en av sengebunnens trespiler i setedelen og er tilsluttet til sengens elektronikkenhet. Alarmens følere er fastmontert i sengens setedel og festede kabler i sengen reduserer risikoen for feil.

Når sengen er belastet aktiveres senderen, når belastningen opphører sender den et signal til alarmsystemet (senderen deaktiveres).

En håndkontroll er koblet til sengens elektronikkenhet, her kan man aktivere/deaktivere alarmen og velge ønsket alarmtid (3 eller 30 sekunder eller 10 minutter).

Alarmen er innebygd i og strømforsynes av sengens elektronikkenhet og ingen ekstra kabel for strømforsyning behøves.

Fordelen med Qvintett ComSafe sengealarm

- Alarmen ligger alltid på rett plass i sengen.
- Alarmkablene kan skjules/beskyttes i sengebunnen.
- Alarmen utsettes ikke for fuktighet og mekanisk påvirkning.
- Alarmen er pålitelig og er vanskelig å manipulere.

SPESIFIKASJONER

Sengealarm type	cmla-1
Primærspenning	230v50hz
Sekundærspenning	2x12v
Maksstrøm/ sikring	0,5a
IP- klasse	ip23



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no