


# Mercury Advance SMARTcare®

Et Skridt op i Plejelevering

Intelligent®  
Pressure Care  
Management



- Mercury Advance SMARTcare® er en innovativ løsning til forebyggelse og behandling af tryksår.
- Den tilbyder effektiv dobbeltbehandling på en enkelt overflade ved at kombinere avancerede, klinisk beviste teknologier, der tidligere kun var tilgængelige i separate hybridoverflader.

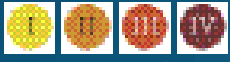

Klinisk anvendelse / Tryksårskategori

Meget  
Høj  
Risiko

Med en unik lavtryks hælzone kun af luft "flyder" hælene ned og reducerer trykket på dette særligt sårbare område

Det ydre Dartex™ dampgennemtrængelige, multi-vejs strækstofovertræk indeholder højfrekvensvejsede sømme og dyb lynlåsklap-beskyttelse i overensstemmelse med de strengeste infektionsbekæmpelsespolitikker

3 små kanaludskårede skum - og luftceller til at understøtte den øvre ryg og skuldre

Fast Hovedzone kun med skum

7 store kanaludskårede skum - og luftceller til krops -, sakral -, lår - og benstøtte

Zone 2

Zone 1

Zone 3

Zone 4

Med højkvalitets CME-skum indkapslet inde i luftcellerne er madrassen i stand til at give variabel trykaflastning, når den er tilsluttet

En specielt designet U-kerne hjælper med at minimere trykket på hælområdet

CPR-tag til let luftudlukning

Afhængig af klinisk vurdering kan den variable funktion betjenes enten med et lavt eller højt tryk


Når den anvendes i ikke-tilsluttet tilstand, optimerer klinisk bevist avanceret teknologi til luftforskydning kontinuerligt trykfordelingen som respons på patientens kropsvægt og bevægelse.

Når den bruges i tilsluttet tilstand, leverer Mercury Advance SMARTcare® trykaflastning vha. en serie af varierende skum- og luftceller. Ubesværet af det øverste lag skum på madrassen sikrer den unikke "skum i luftcelle"-konstruktion, at der leveres effektiv trykaflastende terapi.

## Et Skridt op i Plejevering

Det er klinisk bevist, at Mercury Advance SMARTcare® understøtter forebyggelse og behandling af tryksår. Mercury Advance SMARTcare® er en mere omkostningseffektiv løsning, der fremmer den bedste brug af ressourcerne, hvilket repræsenterer en trinændring i plejevering, opnået ved at reducere antallet af trin og tid, der er involveret i at få patienter over på den rigtige støtteoverflade. Mercury Advance SMARTcare® kan let trappes op fra statisk til dynamisk tilstand og ned igen, når det anses for klinisk hensigtsmæssigt, uden forsinkelser tilknyttet administration eller krav til bevægelse og håndtering af patientoverførsel.

- Mercury Advance SMARTcare® kombinerer de mest innovative og klinisk dokumenterede trykplejeteknologier i en enkelt støtteoverflade.

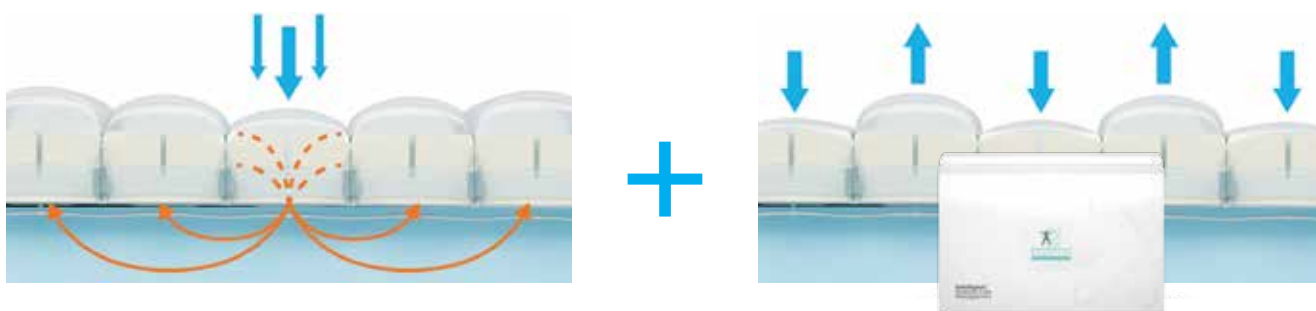

### MERE EFFEKTIV, KONTINUERLIGT OPTIMERET TRYKFORDELING

- Højspecificeret CME-skum og luftcellekonstruktion
- Avanceret luftforskydningsteknologi, der konstant optimerer trykfordelingen som respons på patientens vægt og bevægelse
- Hælzonen "kun med luft" aflaster effektivt trykket på dette sårbare område

### EFFEKTIV TRYKAFLASTNINGSTERAPI

- Tilføj blot strømenheden for variabel funktion
- Unik konstruktion af "skum i luftcellerne" for mere effektiv behandlingsterapi
- 10 minutter, 2 i 1 variabel cyklus
- Valg af lav eller høj indstilling

Alle komponentdele er udskiftelige og kan erstattes, hvilket maksimerer produktets levetid og tilbyder en omkostningseffektiv løsning til håndtering af trykpleje.

#### Infektionskontrol/kompatibilitet med hypochloritopløsning

Madrasovertrækket/kontrolpanelet skal aftørres med en passende fortyndet natriumhypochloritopløsning og varmt vand.

Brug en natriumhypochloritopløsning fortyndet til 1000 dele pr. million tilgængeligt klor. Til tung kontaminering bruges en natriumhypochloritopløsning fortyndet til 10.000 dele pr. million tilgængeligt klor. Sørg for grundig skylning efter rengøring.

**Intelligent®  
Pressure Care  
Management**



#### Tekniske specifikationer

<b>Produktkode</b>	<b>MAT1610001</b>
<b>Risikokategori</b>	Meget Høj Risiko
<b>Vægtbegrænsning</b>	Ingen mindste vægtgrænse. Produkt er vurderet til en kapacitet på 254 kg
<b>Garanti</b>	2 år
<b>Dimensioner</b>	Standardstørrelse (længde) 198 cm x (bredde) 88 cm x (højde) 15 cm
<b>Produktvægt</b>	13,3 kg madras / 1,7 kg strømforsyning
<b>Cyklustid</b>	10 minutter
<b>Driftsform</b>	Elektronisk
<b>Spænding</b>	220V – 240V / 50HZ
<b>Strømforsyning</b>	10W
<b>Klassifikation</b>	Ila
<b>Farve</b>	Blå