

Carina350EM/EE

SystemRoMedic

SWL 165 kg



Potilasnostin

Carina350-potilasnostin on kokoonlaitettava siirrettävä potilasnostin enintään 165 kg painavien henkilöiden turvalliseen ja helppoon nostamiseen. Carina350 on saatavana neljänä mallina, joissa on joko manuaalinen tai sähköinen alustan levitys ja normaalikorkuiset tai matalat jalat.

DHG
Moving Health Forward

Carina – neljä kokoontaitettavaa mallia



Monipuolinen ja muuntautumiskykyinen

Carina350-potilasnostin on kokoontaitettava siirrettävä potilasnostin enintään 165 kg painavien henkilöiden turvalliseen ja helppoon nostamiseen. Carina350:n kompakti rakenne mahdollistaa käytön myös ahtaissa tiloissa. Carina350 tarjoaa kokoontaitettavaksi nostimeksi epätavallisen suuren nostokorkeuden: 168 cm. Laajan kokonaisnostoalueen ansiosta Carina350 sopii useimpiin nostotilanteisiin ja -tarpeisiin.

Helppo pystyttää ja taittaa kokoon


Carina350 on kokoontaitettava ja vaatii vain vähän tilaa kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Carina350 voidaan pystyttää ja taittaa kokoon tarpeen mukaan muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä ja ilman työkaluja. Nostin toimitetaan kokoontaitettuna.




Toimilaitte irrotetaan nostovarresta pikalukitustapin avulla.



Nostovarsi taitetaan alas ja kiinnitetään tukevasti mastoon kiristysriihillä.

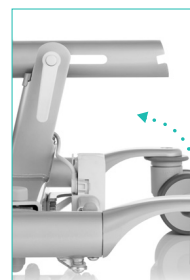

Lopuksi masto taitetaan alas alustaa kohti.

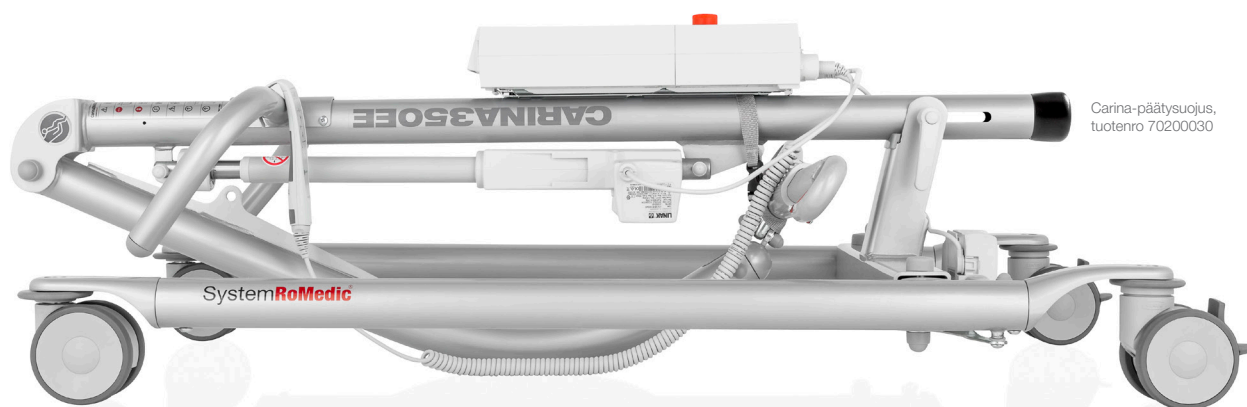

Carina-päätysuojus, tuotenro 70200030

Carina350 vaatii vain vähän tilaa kokoontaitettuna. Mitat ovat 1 216 x 683 x 428 mm.



Carina350EE,
sähköinen alustan levitys



Carina350EM,
manuaalinen alustan levitys ja matalat jalat

Manuaalinen tai sähköinen alustan levitys

Carina350 on saatavana kahtena mallina. Carina350EM-mallissa on manuaalinen alustan levitys, joten nostimen jalkojen välistä etäisyyttä voidaan suurentaa tai pienentää alhaalla nostimen takaosassa olevalla polkimella. Carina350EE-mallissa on sähköinen alustan levitys ja alustan levitysmoottori, jota hallitaan käsiohjaimella.

Normaali korkeus tai matalat jalat

Molempia malleja on saatavana normaalikorkuisilla tai matalien sänkyjen yhteydessä käytettävillä matalilla jaloilla.

Ergonominen ja helppokäyttöinen hoitajalle

Carina350-nostimessa on vapaasti liikkuvat, huoltovapaat pyörät. Takapyörissä on lukot. Kahteen korkeuteen säädettävät työntötangot tarjoavat hyvän otteen ja mahdollistavat useita käsien sijoitusvaihtoehtoja. Näiden ominaisuuksien ansiosta hoitaja voi työskennellä ergonomisesti oikein, mikä ehkäisee työperäisiä vammoja.

Käsiohjaimessa on selkeästi merkityt, helposti painettavat painikkeet nostamiseen ja laskemiseen sekä Carina350EE:n osalta sähköiseen alustan levitykseen. Kaikki liike pysähtyy heti, kun painikkeet vapautetaan. Käsiohjaimessa on säilytystä helpottava ja johdon sotkeutumista estävä koukku, jolla ohjain voidaan ripustaa nostimeen.

Hätätilanteessa

Carina350-nostimen ohjausyksikössä on käyttövalmis hätäpysäytyspainike. Nostimessa on myös sekä manuaalinen että sähköinen hätälasku.

Luotettava virtälähde

Carina350 on varustettu suurikapasiteetisella 2,9 ampeeritunnin akulla. Laite antaa äänimerkin, kun akun varaustaso on alhainen. Ohjausyksikössä oleva ilmaisain näyttää, kun lataus on käynnissä ja kun akku on ladattu täyteen.

Carina350EM/EE-nostimen ominaisuudet ja edut

- Enintään 165 kg painaville käyttäjille
- Kokoonlaitettava: kätevä kuljetus ja säilytys
- Helppo pystyttää ja taittaa kokoon ilman työkaluja tai irrallisia osia
- Laaja nostoalue, soveltuen sekä matalaan että korkeaan nostoon
- Huoltovapaat koteloituid kaksoispyörät
- Manuaalinen tai sähköinen alustan levitys
- Saatavana myös matalien sänkyjen yhteydessä käytettävillä matalilla jaloilla
- Ergonominen ja helppo ohjaus: ehkäisee työperäisiä vammoja
- Pikaopas nostimessa
- Käyttövalmis hätäpysäytyspainike ohjausyksikössä
- Manuaalinen ja sähköinen hätälasku
- Suurikapasiteetinen 2,9 Ah -akku
- Sisäänrakennettu lataustoiminto
- Paljon lisävarusteita yksilölliseen henkilöiden nostamiseen



Ergonominen ja helppokäyttöinen käsiohjaus kahdella (EM) tai neljällä (EE) painikkeella.



Ohjausyksikkö diagnostiikalla, esim. nostolaskuri ja ylikuormituksen ilmaisun.

Lisävarusteita vakiovarusteina

Carina350 toimitetaan täydellisenä ja käyttövalmiina, käsiohjaimella varustettuna sekä seuraavat lisävarusteet ja lisävarvikkeet vakiovarusteina:

- SlingBar M, alumiininen kaksipistenostokaari, vakioleveys 450 mm
- SwiftHook, SlingBarin lisävaruste
- Sisäänrakennettu lataustoiminto
- Koteloituid kaksoispyörät, Ø100 mm, puskurit

Carina350EM/EE

TUOTEKUVAUS

Tuotenumero	Tuotenimi	Kuvaus
60600011	Carina350EM	siirrettävä nostin, jossa on manuaalinen alustan levitys
60600012	Carina350EM	siirrettävä nostin, jossa on manuaalinen alustan levitys ja matalat jalat
60600009	Carina350EE	siirrettävä nostin, jossa on sähköinen alustan levitys
60600014	Carina350EE	siirrettävä nostin, jossa on sähköinen alustan levitys ja matalat jalat

KÄYTTÖTARKOITUS

Carina350EM/EE on siirrettävä ja kannettava lääkinällinen laite, joka yhdessä hyväksytyjen lisävarusteiden kanssa auttaa potilaiden nostamisessa ja/tai siirtämisessä istuvassa asennossa tai makuuasennossa sängystä tuoliin (sekä vastaavat) tai toisin päin. Se auttaa myös siirtämään potilaita sisätiloissa tarvittaessa lyhyitä matkoja. Carina350EM/EE vähentää hoitajien vammojen riskiä nostotilanteissa. Tarkoitettu hoitajille, jotka voivat lukea ja ymmärtävät nostimen käyttöohjeet. Tuote on tarkoitettu sekä kotihoitoon että laitoshiitoon.

TEKNISET TIEDOT

Suurin sallittu potilaan paino (SWL)	165 kg
Materiaali	Jauhemaalattu teräs
Korkeus	1 290–1 840 mm
Korkeus taitettuna	428 mm
Jalasten pituus	1 153 mm
Jalasten korkeus, 60600011 ja 60600009	125 mm
Jalasten korkeus, 60600012 ja 60600014	58 mm
Pituus taitettuna	1 216 mm
Pohjan leveys, ulkomitat	710–1 080 mm
Pohjan leveys, sisämitat	560–940 mm
Pohjan leveys, ulkomitat, taitettuna	683 mm
Paino, Carina350EM	34,5 kg
Paino, Carina350EE	36 kg
Alustan levitys, Carina350EM	Manuaalinen
Alustan levitys, Carina350EE	Sähköinen
Pyörien halkaisija, 60600011 ja 60600009	100 mm
Takapyörien halkaisija, 60600012 ja 60600014	100 mm
Etupyörien halkaisija, 60600012 ja 60600014	2 x 35 mm
Nostoalue	580–1 680 mm
Nostonopeus ilman kuormaa	23 mm/s
Hätälasku	Manuaalinen ja sähköinen
Akun kapasiteetti	2,9 Ah
Nostokaaren materiaali	Alumiini
Nostokaaren leveys	450–1 680 mm
Suojausluokka	IPX4

LISÄVARUSTEET

Optimaalisten ratkaisujen luomiseksi käyttäjille, joilla on erilaisia tarpeita, Carina350-nostinta voidaan käyttää yhdessä nostoliinon ja monien muiden Direct Healthcare Groupin SystemRoMedic™-nostovälinevalikoimassa olevien kätevien ja käytännöllisten nostolisävarusteiden kanssa.

Tuotenumero	Tuotenimi	Kuvaus
70200030	Carina-pääty suojuus 16010	Suojaaja maston päätä nostimen ollessa taitettuna
70200071	ReadyStrap	Lukitusriihna
70200001	SlingBar XS	Alumiininen kaksipistenostokaari, 25 cm
70200001	SlingBar S	Alumiininen kaksipistenostokaari, 35 cm
70200003	SlingBar L	Alumiininen kaksipistenostokaari, 60 cm
70200042	SlingBarSpreader M	Sivukaaret SlingBariin
70200006	StretcherBar	Vaakasuojaan nostamiseen
70200017	SlingBar RFL X4	Teräksinen nelipistenostokaari
70100002	Charder MHS2500	Vaaka, SWL 300 kg
70100003	Charder MHS2500	Vaaka, SWL 400 kg
70200089	Käsiohjain HB33-6	Kuusi painiketta sekä huollon, akun varaustilan ja ylikuormituksen ilmaisimet, 60600009- ja 60600014-malleihin
70200029	Ulkoinen laturi Linak	Carina350-potilasnostimeen



CE **MD** Carina350 täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen 2017/745 luokan 1 tuotteille asetetut vaatimukset.

Lisätietoja: www.directhealthcaregroup.com

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ on kokonaisvaltainen ratkaisu potilaiden helppoon siirtoon. Konseptin sisältämät neljä tuotealuetta täyttävät useimmat tarpeet erilaisissa siirtotilanteissa. Siirtäminen paikasta toiseen. Asennon kohentaminen samassa paikassa. Tukeminen liikkumisen helpottamiseksi. Nostaminen sekä käsin että mekaanisesti.

DHG

Moving Health Forward

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden
Tel: +46 (0)8-557 62 200
info@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com

MediMattress

Parempaan hoitoon
OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4 | 00550 HELSINKI
p. 0306 40 40 40
www.medimattress.fi
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi