

RAIZER® II

Nostotuoli

Raizer II on akkukäyttöinen, liikuteltava nostotuoli, jonka avulla kaatuneen henkilön saa nostettua pystyasentoon muutamassa minuutissa.

Raizer II on yhden avustajan koottavissa ja käytettävissä ilman suurempaa fyysistä ponnistusta. Nostotuoli on helppo koota, käyttää ja puhdistaa.

80 nostoa
yhdellä
latauksella

Tärkeimmät ominaisuudet



4 samanlaista jalkaa ja 2 samanlaista selkänöjää tekevät kokoamisesta yksinkertaista

Ääni- ja LED-ilmaisimet ohjaavat käyttökuntoon kokoamisessa

Kauko-ohjainta säilytetään istuinosan sivulla

Kaikki pintamateriaalit on suunniteltu helpoksi puhdistaa ja desinfioida

Lisäturvavyöt voidaan asentaa tarpeen tullen tukemaan kaatunutta henkilöä paremmin




Saatavilla myös **kertakäyttöisiä hygieniapäällisiä** (lisätarvike)

Vaivaton kuljettaa

- Jalat, selkänöjat ja muut osat on sijoitettu kantokassiin intuitiivisesti niin, että niiden sijainti kassissa vastaa kokoamisjärjestystä
- Istuinosaa kuljetetaan erikseen toisessa pehmeäkahvaisessa kassissa, joka mahdollistaa ergonomisen kantamisen lähellä kehoa
- Kasseja voidaan kuljettaa myös kuljetuskärryssä (lisävaruste), jossa on riittävästi tilaa kassien asettelulle vierekkäin

RAIZER® II

Nostotuoli

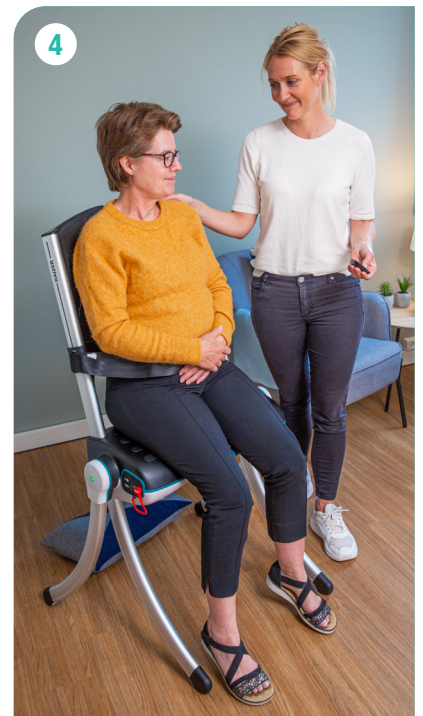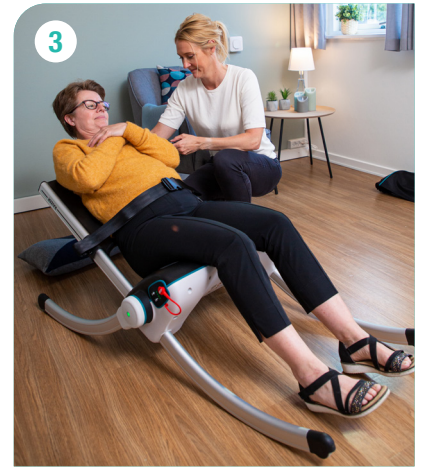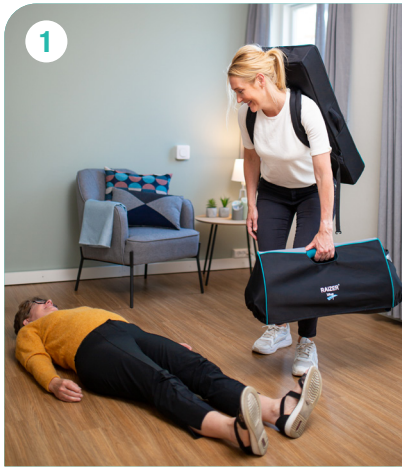

Tekniset tiedot

Malli	Raizer II
Nostokapasiteetti	Max. 150 kg
Nostoaika	20-30 sekuntia
Paino	Istuinosa: 9,2 kg Jalat ja selkänojat: 4,9 kg Koko paino: 14,1 kg
Nostojen määrä täyteen ladatulla akulla	Enimmäiskuormituksella n. 40 nostoa. Keskimääräisellä kuormituksella n. 80 nostoa.
Latausaika	Enintään 6 tuntia
Tyhjän akun latausaika	10-15 min. = 1 nosto
Latauslaitteet	15 W latauslaite tavalliselle pistorasialle



Raizer II täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen 2017/745 luokan 1 tuotteille asetetut vaatimukset.

