



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

Hygienstolar

Produktkatalog



We do better

På GATE har vi en lång tradition och erfarenhet av produkt- och konceptutveckling. Med ny teknik och passion för design och omvårdnad skapar vi nya lösningar, nya förutsättningar och nya möjligheter för både brukare och vårdare. Helt enkelt en tryggare och bättre vardag.

På GATE strävar vi alltid efter att ligga i framkant vad gäller design och innovation inom hjälpmedel för sjukvården. Gemensamt för våra egenutvecklade produkter är att de alla har det där lilla extra. En detalj, en lösning eller ett material som ingen annan har.

”...våra produkter ska vara din bästa investering”

När vi utvecklar nya produkter vill vi skapa produkter med ett egenvärde, i samtida material och design och med nyskapande och ibland oväntade lösningar. Vår vision är att våra produkter ska vara din bästa investering.


På GATE arbetar personer med lång erfarenhet från hjälpmedelsbranschen och med en gemensam passion: att göra skillnad och skapa livskvalitet och nya möjligheter – för såväl chefer, specialister, vårdare och brukare.

Låt oss berätta för dig varför en GATE-produkt är en bra investering.

GATE

GATE grundade 2004 och jobbade till en början mestadels med utveckling och försäljning av rollatorer och enklare produkter inom ”home care”. Över tid har GATE utvecklats till att jobba med innovation och utveckling av egna gåbord och hygienstolar.

GATE har sitt kontor och lager i småländska Reftele och verkar i en region präglad av en tydlig entreprenörsanda och stark innovationskraft. Idag omsätter GATE cirka 40 miljoner kronor och har tolv anställda som samtliga strävar att skapa nya möjligheter för en tryggare och bättre vardag för såväl brukare och vårdare.

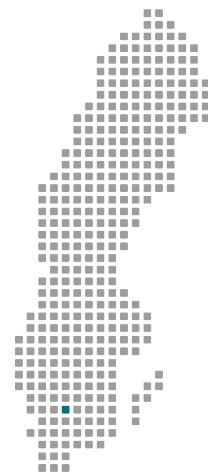

Innehållsförteckning

Introduktion	03
Hygienstolar	04
EASY™ SoftBack	05
EASY™ HighBack	06
Amfibi XL	07
Tillbehör	08



EASY™

Hygienstol

Fördelen med GATEs hygienstolar är att de mycket snabbt kan anpassas efter varje individs behov och varje situations krav. Justera sitthöjden med eldriven höjning och sänkning, tippa stolen med tilt-funktionen och skräddarsy den med tillbehören.

Design efter behov

GATEs nya hygienstol har en unik pelarprofil för smidig och enkel höjjustering av sitthöjden. EASY™ passar därmed de flesta människor oavsett längd och personalen behöver inte lägga tid och kraft på att leta efter en passande hygienstol för varje situation. EASY™ är en av de första hygienstolarna som godkänts enligt den nya ISO 17966:2016.

En bättre vardag

EASY™ kompromissar aldrig mellan användarens komfort och personalens arbetsergonomi. Båda är lika självklara. Med individuellt anpassad komfort och funktion blir hygienskötseln en betydligt behagligare upplevelse för både patienten och vårdaren. EASY™ är tillverkad i ett korrosionsfritt material och elektroniken tål spolande vatten med tryck (kapslingsklass X5).

Optimal komfort

I samband med dusch och tvätt blir användaren ofta sittande i stolen länge, vilket kan vara mycket påfrestande. EASY™ har därför tagits fram för att erbjuda en mycket hög komfort. Sittandes i EASY™ kan användaren inta en så normal kroppställning som möjligt. Hygienstolen får snabbt en personlig passform med hjälp av lättmanövrerade inställningar och alla modeller är höj- och sänkbara. Tiltbarheten bidrar dessutom till en bättre tryckavlastning för brukaren.

Sits och rygg är anpassade för ett upprätt sittande som inte stänger bäckenet. Den ergonomiska sitsen minimerar trycket mot sittbensknölar, senor och blodkärl och den rundade framkanten bidrar till en komfortabel benställning.

Unikt för EASY™ är de nya teleskoperande pelarna för höj/sänk. Dess form och funktion bidrar

Vilken modell matchar dina behov?

Det breda modellurvalet gör det möjligt att bygga upp en effektiv "flotta" av hygienstolar. Eftersom alla modeller passar de flesta användare oavsett längd/vikt kan antalet stolar och stolstyper reduceras för att sedan kompletteras upp med enstaka avancerade modeller för krävande vårdssituationer.

EASY™ finns i 3 varianter - SoftBack med traditionellt ryggband/nackstöd (SoftBack Komfort), SoftBack med PUR band /nackstöd (SoftBack Flexi) eller med en högre, stoppad, vattenavvisande rygg med inbyggt nackstöd (HighBack).

De olika varianterna finns i 2 olika höjdkonfigurationer/sitthöjd - STD (53-91cm), LOW (50cm-81cm) samt 2 olika hjul typer - enkelhjul (125mm)/Std eller dubbelhjul (100mm)/Tillbehör. LOW kan enbart fås med dubbelhjul (100mm).

AmfiBi XL är framtagen för större och tyngre patienter.

EASY SoftBack

EASYTM är en ny väldesignad hygienstol med en hel del avancerade funktioner. Hygienstolen är designad med teleskoperande pelare - för att skapa så mycket plats och flexibilitet som möjligt för personalen. Stolen är anpassad för användning i dusch- och toalettmiljö både på institution och i hemmet.

Ställbart ryggband

Det mjuka och bekväma ryggbandet motverkar tryck på hudnära bendelar. Bandet justeras enkelt för optimalt stöd och sittedjup. Går att tvätta i maskin.

Personlig passform

EASY har nackstöd som kan ställas in i höjd-, djupoch sidled för skönt stöd och personlig passform.



EASY SoftBack Flexi

Ryggband/Flexi

Vår nya rygg /Flexi består av 3 separata band i PUR som tack vare sin design anpassar sig individuellt efter brukarens rygg. Banden är fast monterade och enkla att rengöra/torka av.

Låsbara armstöd

Armstöden är upp- och nedfällbara samt låsbara i nedersta läge. Detta som en säkerhet då stolen tiltas.

Integrerad sits med öppning bakåt

(Tillbehör)

Sitsen har en ergonomisk design och elastisk konstruktion för bästa möjliga komfort för brukaren medan öppningen bakåt ger ett naturligare och mer hygieniskt arbetssätt för vårdaren. Leveransutförande standard är plastsits/grön.

Plast eller metall

Till EASY finns gejder och plastbäcken som tillbehör. Observera att gejder finns i olika utföranden för att passa plast- eller metallbäcken. Se tillbehör.

Svängbara och avtagbara

Fotstöden är svängbara och avtagbara och som standard finns det även hälbånd som förhindrar att patientens fot halkar av fotstöden vid tiltning.

Tilt-funktion

EASY kan tiltas från ca 5 grader framåt till 30 grader bakåt. Det innebär att den är smidig både vid i- och urstigning såväl som vid hygien tvätt. Tiltningen skapar också en bättre arbetsmiljö med lägre belastning för personalen.

Justerbar sitthöjd

Med en sitthöjd från 53 cm ända upp till 93 cm som justeras steglöst och passar de allra flesta patienter och ger personalen minimal arbetsbelastning.

Hjul med riktningsspärr

Höger framhjul har en riktningsspärr för enklare manövrering av stol. Bild visar dubbelhjul (tillbehör).

Låsbara hjul

Alla hjul förutom det riktningsspärrade är låsbara. Bild visar dubbelhjul (tillbehör).

Pelare

De teleskoperande pelarna i aluminium har en öppen design som gör att vatten/smuts enkelt rinner igenom.



Smidig reglering

Eljusteringen upp och ner samt tiltning sköts med en trådbunden kontroll och har hög IPklassning (IP65).

Tekniska Specifikationer

Art. Nr.	Produkt	Bredd, ytermått	Maxbrukarvikt	Sitthöjd	Bredd, mellan armstöd	Sittedjup
56-270	EASY SoftBack Komfort	65cm	150kg	53-93cm	49cm	45cm
56-270/LOW	EASY SoftBack Komfort Low	65cm	150kg	50-81cm	49cm	45cm
56-272	EASY SoftBack Flexi	65cm	150kg	53-93cm	49cm	45cm

EASY HighBack

EASY med hög rygg (HB) är en vidareutveckling av det traditionella konceptet med ryggband/nackstöd som funnits sedan tidigare. Denna hygienstol är utrustad med en hög, stoppad/vattenavvisande rygg med tillhörande nackstöd (finns i två varianter). Den höga ryggen ger ett mjukt men fast stöd och den nedre delen är utrustad med ett fjädrande svankstöd för ytterligare komfort. EASY HB är designad med teleskoperande pelare för att skapa så mycket utrymme och /flexibilitet som möjligt för personalen när de utför sitt arbete. EASY kan fås med vår nya, mjuka Komfortsits - med öppning bakåt för ett mer naturligt/hygieniskt arbetssätt.

Integrerat nackstöd

Det integrerade nackstödet går att justera i höjd och finns i två olika storlekar, M och L.

Hög stoppad rygg

Den höga ryggen ger ett mjukt men fast stöd. Den är lätt att rengöra och går att bytas ut när så önskas.

Tilt-funktion

EASY kan tiltas från ca 5 grader framåt till 30 grader bakåt. Det innebär att den är smidig både vid i- och urstigning såväl som vid hygienvätt. Tiltningen skapar också en bättre arbetsmiljö med lägre belastning för personalen.

Pelare

De teleskoperande pelarna i aluminium har en öppen design som gör att vatten/smuts enkelt rinner igenom.

Svängbara och avtagbara

Fotstöden är svängbara och avtagbara och som standard finns det även hälband som förhindrar att patientens fot halkar av fotstöden vid tiltning.

Hjul med riktningsspär

Höger framhjul har en riktningsspär för enklare manövrering av stol.



Smidig reglering

Eljusteringen upp och ner samt tiltning sköts med en trådbunden kontroll och har hög IPklassning (IP65).

Låsbara armstöd


Armstöden är upp- och nedfällbara samt låsbara i nedersta läge. Detta som en säkerhet då stolen tiltas.

Fjädrande svankstöd

Den nedre delen av ryggen har ett fjädrande svankstöd för ytterligare komfort och individuell anpassning.

Integrerad sits med öppning bakåt (Tillbehör)

Sitsen har en ergonomisk design och elastisk konstruktion för bästa möjliga komfort för brukaren medan öppningen bakåt ger ett naturligare och mer hygieniskt arbetssätt för vårdaren. Leveransutförande standard är plastsits/grön.

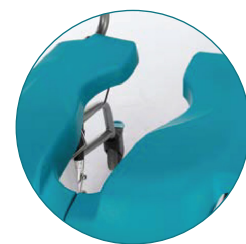

Låsbara hjul

Alla hjul förutom det riktningsspärade är låsbara.

Tekniska Specifikationer

Art. Nr.	Produkt	Bredd, yttermått	Maxbrukarvikt	Sitthöjd	Bredd, mellan armstöd	Sittdjup
56-271	EASY HB	65cm	150kg	53-93cm	49cm	45cm
56-271/LOW	EASY HB Low	68cm	150kg	50-81cm	49cm	45cm

Nedan visas exempel på möjliga artikelkombinationer.

Amfibi XL

Amfibi XL är framtagen för större och tyngre patienter och har därför extra plats och styrka samt elmanövrerad höjning och sänkning. Den maximala brukarvikten ligger på hela 250 kg.

Lamplig för bariatriska användare

Den maximala brukarvikten för Amfibi XL ligger på 250kg och sittdjupet är större än standard. Hygienstolen är också breddad till 64cm mellan armstöden för att ge extra mycket utrymme och god stabilitet.

Tåligt material

Tillverkad i korrosionsfritt material.

Låsbara armstöd

Amfibi XL har armstöd som är upp och nedfällbara samt låsbara vilket gör det enklare för patienten att själv assistera vid överflyttning.

Integrerad mjuk sits

Amfibi XLs sits och rygg är anpassade för ett upprätt sittande som inte stänger bäckenet. Den ergonomiskt mjuka sitsen (PU) är standard och integrerad i stolen. Den minimerar trycket mot sittbensknölar, senor och blodkärl och är utformad för att passa både kvinnor och män.

Lätt att rengöra

Sitsen är lätt att ta av och rengöra och den rundade framkanten bidrar till en komfortabel benställning.

Svängbara och avtagbara

Fotstöden är avtagbara, svängbara och uppfällbara.

Smidig reglering

Eljusteringen upp och ner sköts med en trådbunden kontroll och har hög säkerhetsklassning IP-klassning (IP66).

Ställbart ryggband

Det mjuka och bekväma ryggbandet motverkar tryck på hundära bendelar. Bandet justeras enkelt för optimalt stöd och sittdjup. Går att tvätta i maskin.

Riktningsspärrat hjul/ Låsbara hjul

För en mer säker körning av stolen så är ett av hjulen (höger bak) utruskad med riktningsspärr. Övriga hjul är låsbara.


Eldriven höjjustering

Amfibi XL har en unik pelarprofil för smidig och enkel höjjustering av sitthöjden. Stolen kan höjas upp till 81cm från det lägsta läget och på så sätt skapa en minimal arbetsbelastning för personalen.

Tekniska Specifikationer

Art. Nr.	Produkt	Bredd, Yttermått	Maxbrukarvikt	Sitthöjd	Bredd, Mellan Armstöd	Sittdjup
56-204	Amfibi XL	79cm	250kg	55-81cm	67cm	49cm

Tillbehör

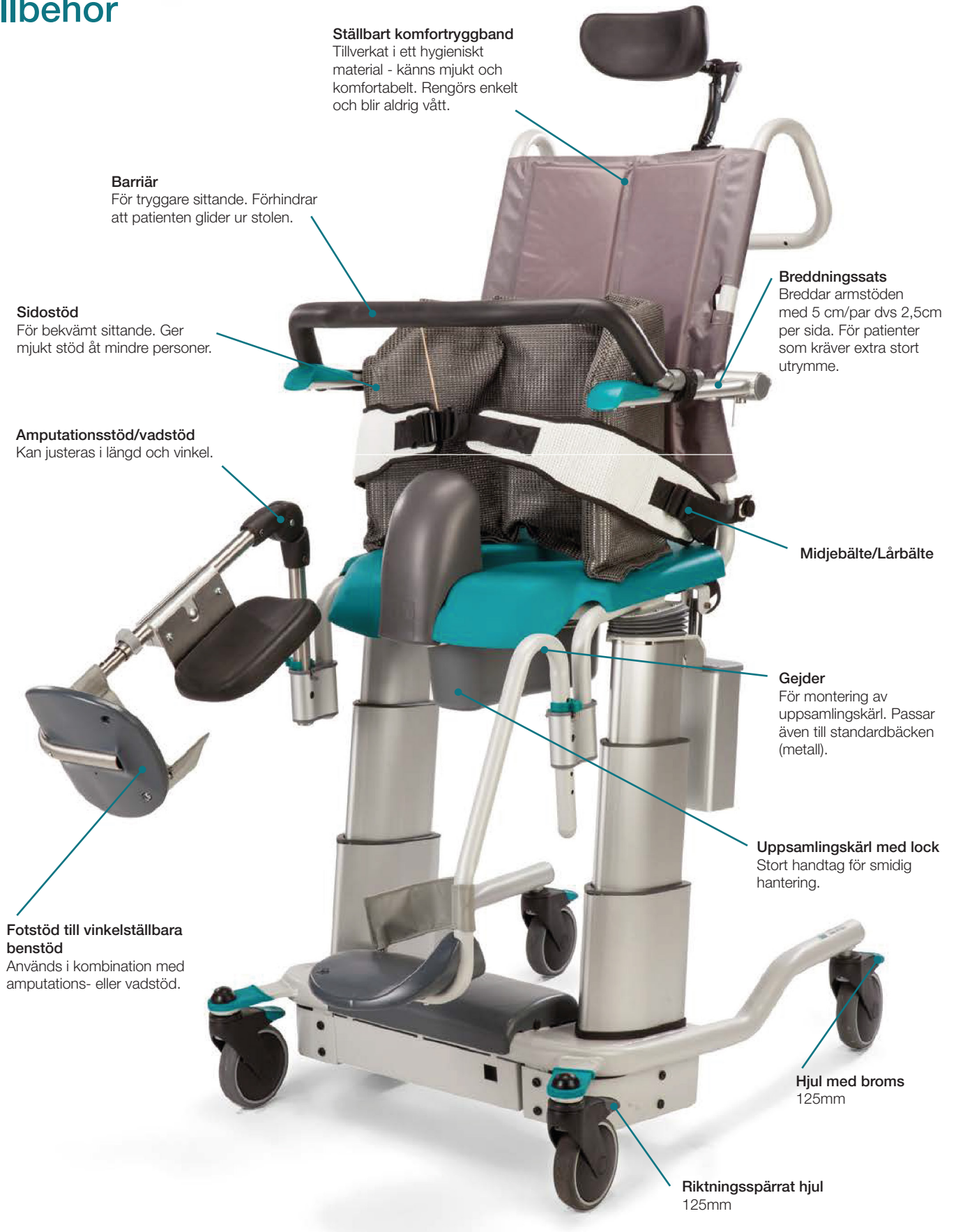

PRODUKTKATALOG



Amputationsstöd/Easy + Fotstöd till Amputationsstöd/Easy



Armstödslåsning



Barriär



Breddningssats (+5cm)



Ryggband Flexi



Hälband



Gejder - för plast eller metallbäcken



Hjul med broms/riktningsspärr 100mm eller 125mm



Vadband extra stöd åt underben



Komfortryggband



Midjebälte/Lårbälte



Plugg för mjuksits - ger tillsammans med 56-206 en duschsits



Sidostöd



Stänkskydd



Uppsamlingskärl med lock/nyckelhål



Sits, plast/grön med hygienurtag, 56-233



Sits, mjuk PU, Svart, hygienurtag



Sits, mjuk svart hel



Sits, komfort med öppning bakåt



Sits, dusch

Benämning	Art#	EASY SB	EASY HB	Amfibi XL
Amputationstöd Höger, XL	56-228-R			x
Amputationstöd Vänster, XL	56-228-L			x
Amputationsstöd/Vadstöd Höger, EASY	56-259-R	x	x	
Amputationsstöd/Vadstöd Vänster EASY	56-259-L	x	x	
Armstödslåsning	57-288-2	x	x	
Barriär EASY	56-212-EASY	x	x	
Barriär XL	56-212-XL			x
Breddningssats (+5cm) EASY SB	56-221-EASYSB	x		
Breddningssats (+5cm) EASY HB	56-221-EASYHB		x	
Fotstöd till Amp/Vadstöd EASY (vänster/höger)	56-260-L/56-260-R	x	x	
Fotstöd EASY, vänster/höger	56-261-L/-R	x	x	
Fotstöd till vinkelställbara benstöd	56-257-L/-R			x
Gejder - för plast eller metallbäcken	56-218	x	x	x
Hjul med totalbroms 125mm	56-361	x	x	
Hjul med riktningsspärr 125mm	56-359	x	x	
Hjul/dubbel med totalbroms 100mm	56-238	x	x	
Hjul/dubbel med riktningsspärr 100mm	56-239	x	x	
Hälband Amfibi	56-220			x
Hälband EASY™	56-220-EASY	x	x	
Midjebälte/Lårbälte	56-217	x	x	x
Plugg för mjuksits - ger tillsammans med 56-206 en duschsits	56-232	x	x	
Ryggband, komfort EASY™ SB	56-258-EASY	x		
Ryggband, komfort Amfibi XL	56-258-XL			x
Ryggband, Flexi	56-262	x		
Sidostöd	56-216	x	x	x
Sits, dusch, plast/grön	56-205	x	x	
Sits, komfort med öppning bakåt, PU, grön	56-234	x	x	
Sits, mjuk till plasticsits med hygienurtag, PU, Svart	56-206	x	x	
Sits, mjuk, hel till plasticsits/komfortsits	56-236	x	x	
Sits, plast/grön med hygienurtag	56-233	x	x	
Stänkskydd	56-213	x	x	x
Uppsamlingskärl med lock/nyckelhål	56-209	x	x	x
Vadband extra stöd åt underben	56-225	x	x	x
Vadstöd Höger, XL	56-227-L			x
Vadstöd Vänster, XL	56-227-R			x



A DIRECT HEALTHCARE GROUP COMPANY

Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2
Reftele, Sverige
S-330 21

T: 0371-318 00
F: 0371-318 01
E: info@gaterd.se

LIT-00122 Issue 1
Date: January 2020

GATERD.SE