




Mover Plus

Mover Plus är en överflyttningsplattform som är utvecklad för bekväm och smidig överflyttning. Den är enkel att använda och underlättar för brukare att förflyttas på ett säkert och bekvämt sätt. Mover Plus är utrustad med en smal bottenram och dubbelhjul för enkel manövrering även på små utrymmen. Med en stabil ståplatta, bekväma sittdynor och ständig ögonkontakt med vårdgivaren kan brukaren alltid känna sig bekväm och trygg med Mover Plus.

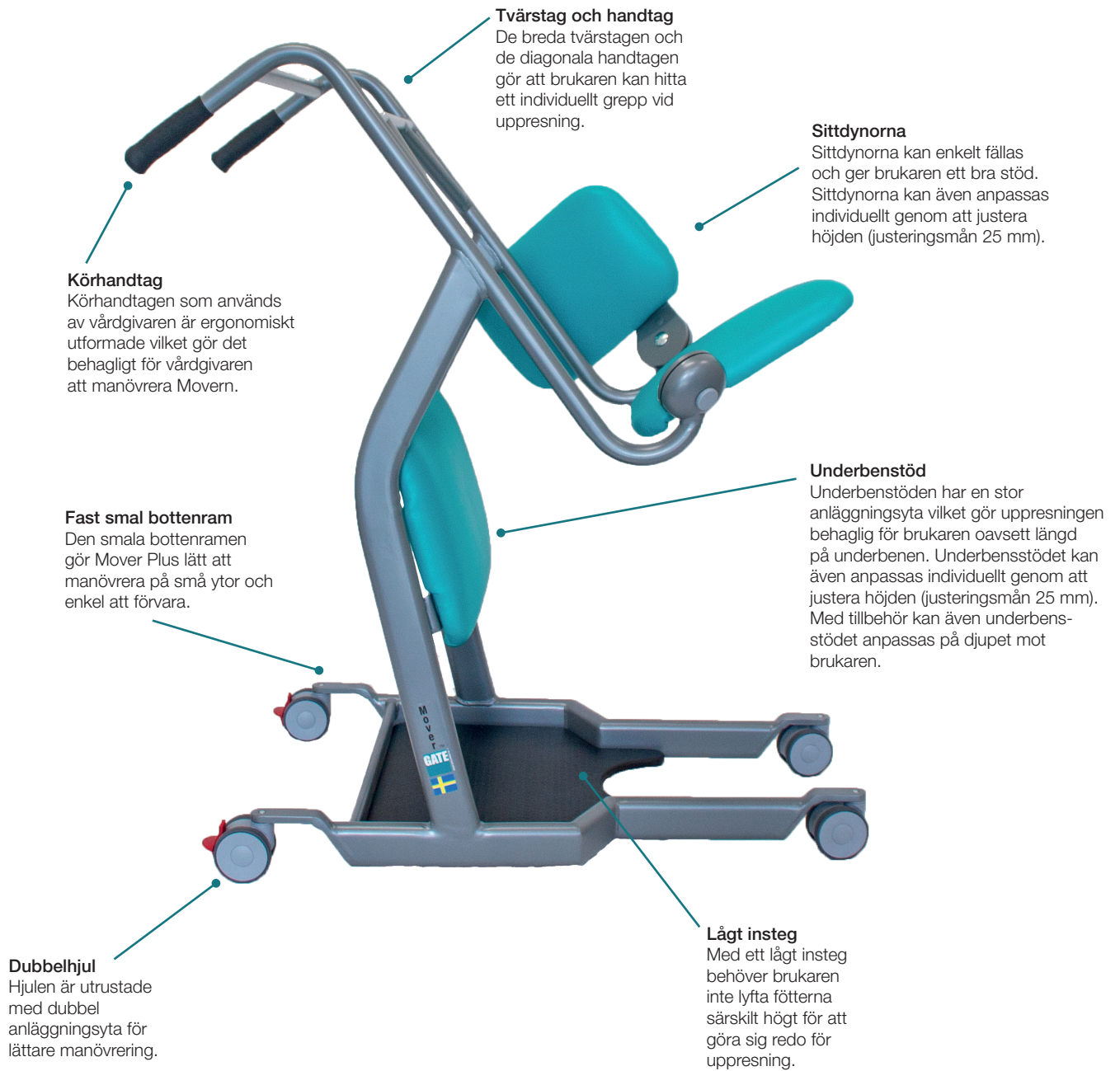

Körhandtag
Körhandtagen som används av vårdgivaren är ergonomiskt utformade vilket gör det behagligt för vårdgivaren att manövrera Movern.

Fast smal bottenram
Den smala bottenramen gör Mover Plus lätt att manövrera på små ytor och enkel att förvara.

Dubbelhjul
Hjulen är utrustade med dubbel anläggningsyta för lättare manövrering.

Tvärstag och handtag
De breda tvärstagen och de diagonala handtagen gör att brukaren kan hitta ett individuellt grepp vid uppresning.

Sittdynorna
Sittdynorna kan enkelt fällas och ger brukaren ett bra stöd. Sittdynorna kan även anpassas individuellt genom att justera höjden (justeringsmån 25 mm).

Underbenstöd
Underbenstöden har en stor anläggningsyta vilket gör uppresningen behaglig för brukaren oavsett längd på underbenen. Underbensstödet kan även anpassas individuellt genom att justera höjden (justeringsmån 25 mm). Med tillbehör kan även underbensstödet anpassas på djupet mot brukaren.

Lågt insteg
Med ett lågt insteg behöver brukaren inte lyfta fötterna särskilt högt för att göra sig redo för uppresning.

Tekniska Specifikationer

Art. Nr.	Produkt	Max. brukarvikt	Bredd, yttermått	Bredd - insteg	Höjd	Längd	Sitthöjd
53-302	Mover Plus Överflyttningsplattform	150kg	64cm	38cm	104cm	94cm	83cm