

# BD Plastipak™ 1 ml, 3-komponent spruta



Erbjuder produkten förenklad injektion genom minskat antal handhavandemoment


## Sprutor med fast kanyl

Sprutor med fast kanyl har minimal restvolym mellan kanyl och spruta, vilket ger följande fördelar:

- mindre risk för att luftbubblor bildas
- ingen risk att kanylen lossnar från sprutan
- högre säkerhet vid administration

## Sprutor med löstagbar kanyl

Sprutor med löstagbar kanyl ger alla fördelar som BD Plastipak™ sprutan och BD Microlance™ 3 kanylen har. Dessutom erbjuder produkten förenklad injektion genom minskat antal handhavandemoment

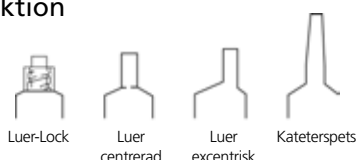

## Sprutor utan kanyl

Storlek ml	Gradering ml	Fattning/ Placering	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
1	0,01	Luer/Centrerad	100/800	300013
1	0,01	Luer-Lok™/Centrerad	100/800	309628

## Sprutor med löstagbar kanyl

Storlek ml	Gradering ml	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd G x tum	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd mm	Kanyl Färgkod	Slipvinkel	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
1	0,01	26 x 3/8	0,45 x 10	Brun	Kort	100/800	300015
1	0,01	25 x 5/8	0,50 x 16	Orange	Kort	100/800	300014

## Sprutor med fast kanyl

Storlek ml	Gradering ml	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd G x tum	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd mm	Slipvinkel	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
1	0,01	27 x 3/8	0,40 x 10	ntradermal	100 (10 påsar à 10 st*)	305502
1	0,01	26 x 1/2	0,45 x 13	Normal	100 (10 påsar à 10 st*)	305501

\* sterila i öppnad 10 styck-förpackning

### Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja  
1 ml Luer-Lok™ (309628) är tillverkad av polykarbonat och polypropylen  
Kanyl: Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex

### Förpackningsmaterial

Papper  
Transparent plastfilm (polyetylen/polyamid)  
Wellpapp



### Steriliseringsmetod

Etylenoxid  
(sprutor med luerfattning/sprutor med löstagbar kanyl)  
Strålsterilisering (sprutor med Luer-Lok™ fattning/sprutor med fast kanyl)



5 år

**CE-märkta enligt MDD 93/42/EEC  
(Spruta utan kanyl: Klass I)  
(Spruta med kanyl: Klass IIa)**



Helping all people  
live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com


# BD Plastipak™ 2, 3, 5, 10 ml, 3-komponent spruta



- Glasklar plast för kontroll av innehåll
- Graverat skaltryck för exakt och säker dosering
- Silikonbehandlad för jämn och mjuk gång
- Ergonomiskt formad kolvstång ger säkert grepp
- Kolvstopp hindrar att kolvstången dras ut
- Dubbla kolvringar förhindrar läckage bakåt
- Latexfri packning eliminerer risken för allergiska reaktioner

## Sprutor med löstagbar kanyl

Sprutor med löstagbar kanyl ger alla fördelar som BD Plastipak™ sprutan och BD Microlance™ 3 kanylen har. Dessutom underlättas injektionen genom att ett minskat antal handhavandemoment krävs

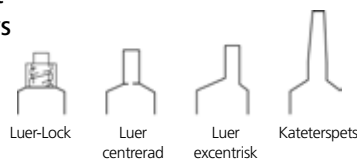

## Sprutor utan kanyl

Storlek ml	Fattning/Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
2/2,5	Luer/Centrerad	0,1	100/800	300185
5	Luer/Centrerad	0,2	100/400	302187
10	Luer/Excentrisk	0,5	100/400	302188
3	Luer-Lok™/Centrerad	0,1	200/800	309658
5	Luer-Lok™/Centrerad	0,2	125/500	309649
10	Luer-Lok™/Centrerad	0,2	100/400	300912

## Sprutor med löstagbar kanyl

Storlek ml	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd G x tum	Kanylstorlek Ytterdiameter x längd mm	Färgkod	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
2/2,5	25 x 5/8	0,5 x 16	Orange	100/800	300190
2/2,5	23 x 1	0,6 x 25	Blå	100/800	300189
2/2,5	22 x 1 1/4	0,7 x 30	Svart	100/800	300188
2/2,5	21 x 1 1/2	0,8 x 40	Grön	100/800	300187
3	25 x 1	0,5 x 25	Orange	100/800	309581
5	22 x 1 1/4	0,7 x 30	Svart	100/400	308062
5	21 x 1 1/2	0,8 x 40	Grön	100/400	308063
10	21 x 1 1/2	0,8 x 40	Grön	100/400	308027

### Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja  
Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

Innehåller ej PVC, ftalater eller latex

### Förpackningsmaterial

Papper  
Transparent plastfilm (polyeten/polyamid)  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid (sprutor med luerfattning/sprutor med kanyl)  
Strålsterilisering (sprutor med Luer-Lok™ fattning)



5 år

**CE-märkta enligt MDD 93/42/EEC (Spruta utan kanyl: Klass I) (Spruta med kanyl: Klass IIa)**



Helping all people live healthy lives

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com


# BD Plastipak™ 20, 30, 50, 100 ml, 3-komponent spruta



- Glasklar plast för kontroll av innehåll
- Graverat skaltryck för exakt och säker dosering
- Silikonbehandlad för jämn och mjuk gång
- Ergonomiskt formad kolvstång för ett säkert grepp
- Kolvstopp förhindrar att kolvstången dras ut
- Dubbla kolvringar förhindrar läckage bakåt
- Läcker ej – håller även vid högt tryck
- 100 ml sprutan med kateterspets kan ändras till luerfattning med hjälp av en adapter som medföljer
- 50 ml Amber sprutan skyddar ljuskänsliga läkemedel
- Latexfri packning eliminerar risken för allergiska reaktioner

## Användningsområde

- 50 ml luer-lock sprutorna är speciellt anpassade för automatiska sprutpumpar och passar till de ledande sprutpumparna på marknaden (se kompatibilitetslista i appendix)

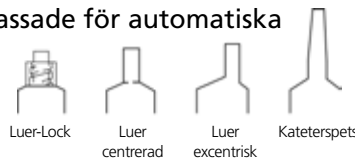

## Sprutor utan kanyl

Storlek ml	Fattning/ Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
20	Luer/Excentrisk	1	60/240	301183
20	Luer/Excentrisk	1	120/480	300613
30	Luer/Excentrisk	1	60/240	301231
50	Luer/Excentrisk	1	60/240	300866
20	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	301189
20	Luer-Lok™/Centrerad	1	120/480	300629
30	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	301229
50	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	300865
50 Perfusion	Luer-Lok™/Centrerad	1	50/100	300137
50 Amber	Luer-Lok™/Centrerad	1	60/240	300869
50 Perfusion Amber	Luer-Lok™/Centrerad	1	50/100	300139

## Sprutor med Kateterspets

Storlek ml	Fattning/ Placering	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
50	Kateterspets/Centrerad	1	60/240	300867
100	Kateterspets/Centrerad	2	25/50	300605

## Sprutor med löstagbar kanyl

Storlek ml	Kanylstorlek G x tum	Gradering ml	Avd/Trpt förp.	Art.nr.
50 Perfusion	14 x 1 1/4	1	50/100	300136
50 Perfusion Amber	14 x 1 1/4	1	50/100	300138

### Materialinnehåll

Cylinder och kolvstång: Polypropylen  
Packning: Syntetisk isopren (latexfri)  
Ytbehandling: Silikonolja  
Ansats och kanylskydd: Polypropylen  
Kanyl: Rostfritt stål (AISI 304)  
Lim: Epoxy resin  
Ytbehandling: Silikonolja

### Förpackningsmaterial

Papper  
Transparent plastfilm  
(polyeten/polyamid)  
Wellpapp



### Steriliseringmetod

Etylenoxid



5 år

CE-märkt enligt MDD 93/42/EEC  
(Spruta Luer: Klass I)  
(Spruta Luer-Lok: Klass IIa)



Helping all people  
live healthy lives

Innehåller ej PVC, eftalater eller latex

BD Medical Surgical Systems  
Box 47204  
100 74 STOCKHOLM  
Tel: 08 - 77 55 100  
www.bd.com