

Eva450EE

SystemRoMedic

Maks. last 205 kg



Sterk, sikker og lett å manøvrere
– med elektrisk utvidelse av understellet

Eva450EE er en allsidig mobil pasientløfter for alle løftesituasjoner og for brukere som veier opptil 205 kg. Når Eva450EE brukes med Direct Healthcare Groups funksjonelle og brukervennlige SystemRoMedic™ løftetilbehør, er den det rette valget for løfting i forbindelse med forflytninger til og fra gulvet, stolen eller sengen, samt for horisontal løfting og gåtøying.




**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

Eva450EE

- Sterk og stabil, maks. last 205 kg
- Aluminium for lav vekt – enkel å manøvrere
- Masten kan justeres til tre høydeposisjoner – stor løfterekkevidde
- Høydejusterbare håndtak – komfortable og ergonomiske arbeidsstillinger
- Stabil løftebøyle i aluminium med påfidelige sikkerhetslåser
- Løftebøyle med standardbredde – egnet for de fleste brukere og situasjoner
- Innkapslede tvillinghjul – ruller lett, lite vedlikehold
- Elektrisk utvidelse av understell
- Elektrisk nødstopp lett tilgjengelig på kontrollenheten
- Elektrisk og manuell nødsenkning
- Høykapasitetsbatteri med lang driftstid
- Innebygd lading
- Quick guide på heisen
- Mange tilbehør for sikker, enkel og individuelt tilpassbar løfting av brukere

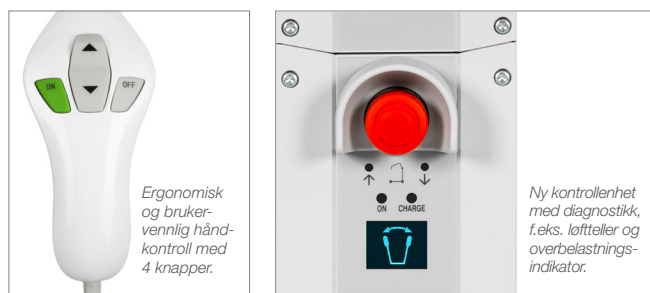

Ergonomisk og brukervennlig håndkontroll med 4 knapper.

Ny kontrollenhet med diagnostikk, f.eks. løftteller og overbelastningsindikator.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Eva450EE _____ Art. nr. 60100002

Mobil løfter med elektrisk utvidelse av understell, komplett med SlingBar M og en håndkontroll.

TEKNISK INFORMASJON

Maks. last _____ 205 kg /450 lbs
Materiale _____ Aluminium
Total høyde _____ 1330-2020 mm
Understells lengde _____ 1300 mm
Understells bredde, utvendige dimensjoner _____ 685-980 mm
Understells bredde, innvendige dimensjoner _____ 585-880 mm
Understellsutvidelse _____ Elektrisk
Total vekt _____ 34 kg
Hjul, diameter _____ 100 mm
Løfterekkevidde _____ 500-1790 mm
Løftehastighet uten last _____ 34 mm/s
Nødsenkning _____ Manuell og elektrisk
Batterikapasitet _____ 2,9 Ah
Materiale, løftebøyle _____ Aluminium
Løftebøylens bredde _____ 450 mm
Beskyttelsesklasse _____ IPX4

CE Eva450EE overholder kravene i direktivet om medisinsk utstyr for klasse 1-produkter (MDD 93/42/EEC).

TILBEHØR

For å skape optimale løsninger for brukere med ulike behov kan Eva450EE brukes i kombinasjon med løfteseler og mange andre smarte og funksjonelle løftetilbehør i Direct Healthcare Groups SystemRoMedic™-utvalg av løfteprodukter.

Art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse
80100010	AmbulationArm _____	Armlene, for alle modeller og varianter av Eva mobile løftere
70200001	SlingBar S _____	Toppunkts løftebøyle i aluminium, 35 cm
70200003	SlingBar L _____	Toppunkts løftebøyle i aluminium, 60 cm
70200042	SlingBarSpreader M _____	Sidestenger for SlingBar S/M/L
70200006	StretcherBar _____	For horisontal løfting
70200017	Sling bar RFL X4 _____	Firepunkts seleoverligger i stål
70100002	Charder MHS2500 _____	Vekt, maks. last 300 kg
70100003	Charder MHS2500 _____	Vekt, maks. last 400 kg
70200101	QuickLink _____	For enkel bytting av løftebøylar
70200089	Hand control HB33-6 _____	6 knapper, med indikatorer for service, batteristatus og overbelastning

Andre modeller og varianter av Eva mobile løftere

Eva mobile løftere er tilgjengelige i flere modeller og varianter med ulik løftekapasitet og med elektrisk eller manuell justering av understells bredde. De er også tilgjengelige i spesialversjoner med lave bein for bruk med lavere senger.

Art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse
60100001	Eva400EE	Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 180 kg
60100006	Eva450EE	Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, lave bein, maks. last 205 kg
60100003	Eva600EE	Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 270 kg
60100010	Eva600EE	Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, lave bein, maks. last 270 kg

Vennligst besøk www.directhealthcaregroup.com for mer informasjon.

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ er en helhetsløsning for enkle forflytninger. I konseptet inngår det fire produktområder som dekker de aller fleste behov i ulike forflytningssituasjoner.

Overflytting, mellom to enheter. **Posisjonering**, innenfor samme enhet.

Støtte, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Kjellstad Næringspark
St Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda
T +47 21 01 44 70

www.directhealthcaregroup.com • info.no@directhealthcaregroup.com