

# Eva450EE, med lave bein

SystemRoMedic

Maks. last 205 kg



Sterk, sikker og lett å manøvrere  
– med elektrisk utvidelse av understellet og lave bein

Eva450EE er en allsidig mobil pasientløfter for alle løftesituasjoner og for brukere som veier opptil 205 kg. Når Eva450EE brukes med Direct Healthcare Groups funksjonelle og brukervennlige SystemRoMedic™ løftetilbehør, er den det rette valget for løfting i forbindelse med forflytninger til og fra gulvet, stolen eller sengen, samt for horisontal løfting og gåtøring. Denne varianten av Eva450EE har lave bein og er spesielt godt egnet for bruk med lavere seng.




**Direct Healthcare  
Group**

Advancing Movement & Health®

# Eva450EE, med lave bein

- Sterk og stabil, maks. last 205 kg
- Aluminium for lav vekt – enkel å manøvrere
- Masten kan justeres til tre høydeposisjoner – stor løfterekkevidde
- Høydejusterbare håndtak – komfortable og ergonomiske arbeidsstillinger
- Stabil løftebøyle i aluminium med pålitelige sikkerhetslåser
- Løftebøyle med standardbredde – egnet for de fleste brukere og situasjoner
- Spesialversjon med lave bein for bruk med lavere senger
- Innkapslede tvillinghjul – ruller lett, lite vedlikehold
- Doble forhjul med en diameter på 35 mm
- Elektrisk utvidelse av understell
- Elektrisk nødstopp lett tilgjengelig på kontrollenheten
- Elektrisk og manuell nødsenkning
- Høykapasitetsbatteri med lang driftstid
- Innebygd lading
- Quick guide på heisen
- Mange tilbehør for sikker, enkel og individuelt tilpassbar løfting av brukere

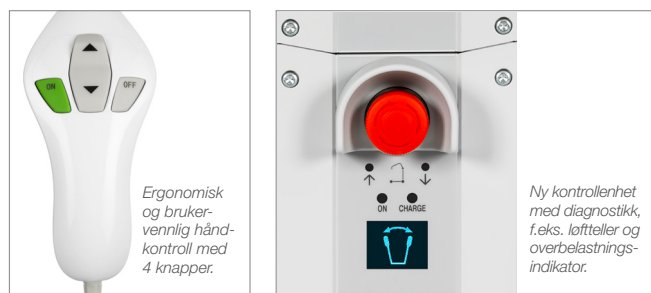

## PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Eva450EE \_\_\_\_\_ Art. nr. 60100006

Mobil løfter med elektrisk utvidelse av understell og lave bein, komplett med SlingBar M og en håndkontroll.

## TEKNISK INFORMASJON

Maks. last \_\_\_\_\_ 205 kg  
Materiale \_\_\_\_\_ Aluminium  
Total høyde \_\_\_\_\_ 1330-2020 mm  
Understells lengde \_\_\_\_\_ 1300 mm  
Understells bredde, utvendige dimensjoner \_\_\_\_\_ 685-980 mm  
Understells bredde, innvendige dimensjoner \_\_\_\_\_ 550-960 mm  
Understellsutvidelse \_\_\_\_\_ Elektrisk  
Total vekt \_\_\_\_\_ 34 kg  
Bakre hjul, diameter \_\_\_\_\_ 100 mm  
Fremre hjul, diameter \_\_\_\_\_ 2 x 35 mm  
Løfterekkevidde \_\_\_\_\_ 500-1790 mm  
Løftehastighet uten last \_\_\_\_\_ 34 mm/s  
Nødsenkning \_\_\_\_\_ Manuell og elektrisk  
Batterikapasitet \_\_\_\_\_ 2,9 Ah  
Materiale, løftebøyle \_\_\_\_\_ Aluminium  
Løftebøylens bredde \_\_\_\_\_ 450 mm  
Beskyttelsesklasse \_\_\_\_\_ IPX4

**CE** Eva450EE overholder kravene i direktivet om medisinsk utstyr for klasse 1-produkter (MDD 93/42/EØF).

### Andre modeller og varianter av Eva mobile løftere

Eva mobile løftere er tilgjengelige i flere modeller og varianter med ulik løftekapasitet og med elektrisk justering av understells bredde. De er også tilgjengelige i spesialversjoner med lave bein for bruk med lavere senger.

| Art.nr.  | Produktnavn | Beskrivelse   |
|----------|-------------|---|
| 60100001 | Eva400EE    | Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 180 kg            |
| 60100002 | Eva450EE    | Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 205 kg            |
| 60100003 | Eva600EE    | Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 270 kg            |
| 60100010 | Eva600EE    | Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, lave bein, maks. last 270 kg |

Vennligst besøk [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) for mer informasjon.

## TILBEHØR

For å skape optimale løsninger for brukere med ulike behov kan Eva450EE brukes i kombinasjon med løfteseler og mange andre smarte og funksjonelle løftetilbehør i Direct Healthcare Groups SystemRoMedic™-utvalg av løfteprodukter.

| Art.nr.  | Produktnavn               | Beskrivelse   |
|----------|---------------------------|---|
| 80100010 | AmbulationArm _____       | Armlene, for alle modeller og varianter av Eva mobile løftere           |
| 70200001 | SlingBar S _____          | Topunkts løftebøyle i aluminium, 35 cm                                  |
| 70200003 | SlingBar L _____          | Topunkts løftebøyle i aluminium, 60 cm                                  |
| 70200042 | SlingBarSpreader M _____  | Sidestenger for SlingBar S/M/L  |
| 70200006 | StretcherBar _____        | For horisontal løfting  |
| 70200017 | Sling bar RFL X4 _____    | Firepunkts seleoverligger i stål  |
| 70100002 | Charder MHS2500 _____     | Vekt, maks. last 300 kg   |
| 70100003 | Charder MHS2500 _____     | Vekt, maks. last 400 kg   |
| 70200101 | QuickLink _____           | For enkel bytting av løftebøylar  |
| 70200089 | Hand control HB33-6 _____ | 6 knapper, med indikatorer for service, batteristatus og overbelastning |

# Direct Healthcare Group

## Advancing Movement & Health®

Kjellstad Næringspark  
St Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda  
T +47 21 01 44 70

[www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) • [info.no@directhealthcaregroup.com](mailto:info.no@directhealthcaregroup.com)

## SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ er en helhetsløsning for enkle forflytninger. I konseptet inngår det fire produktområder som dekker de aller fleste behov i ulike forflytningssituasjoner.

**Overflytting**, mellom to enheter. **Posisjonering**, innenfor samme enhet.

**Støtte**, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.