

RollerSlide

SystemRoMedic™

För liggande överflyttning

Överbryggar avstånd

Följer med brukaren i förflyttningen



RollerSlide används för liggande överflyttning av passiva brukare mellan säng och röntgen- eller operationsbord, duschvagnar, ambulansbårar eller liknande. RollerSlide består av en vadderad glidskiva med ett fodral av vårt unika glidmaterial ULF (Ultra Low Friction), som glider runt skivan under förflyttningen. RollerSlide finns i flera versioner och storlekar.

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

RollerSlide

Hur kan en bro flytta sig och ändå vara säker?


Höjdskillnader kan vara ett stort problem. Och ibland är det svårt att komma tillräckligt nära för att utföra en förflyttning som är smidig för både brukare och medhjälpare. RollerSlide, som används för liggande överflyttningar, överbryggar avståndet och följer med brukaren i förflyttningen.

RollerSlide består av en vadderad glidskiva med ett fodral av vårt unika glidmaterial ULF (Ultra Low Friction), som glider runt skivan under förflyttningen. Glidmaterialet reducerar friktionen under brukaren vilket gör själva förflyttningen enkel och helt utan onödiga lyft för medhjälparen. RollerSlide ger också mycket skonsamma överflyttningar för smärtkänsliga eller skadade brukare.

RollerSlide är både enkel att använda och lätt att sköta. Det utbytbara glidfodralet är enkelt att rengöra och engångsskyddsfodral ger ytterligare förbättrad hygien och mindre tvätt.



RollerSlide finns i flera versioner och storlekar. RollerSlide, flexi är en lättare, böjbar version av RollerSlide. Och RollerSlide, light är en lättviktsversion av RollerSlide, flexi. Alla tre versioner av RollerSlide finns i två längder, en som täcker hela kroppen och en som täcker bålen. De längre versionerna är vikbara på mitten.

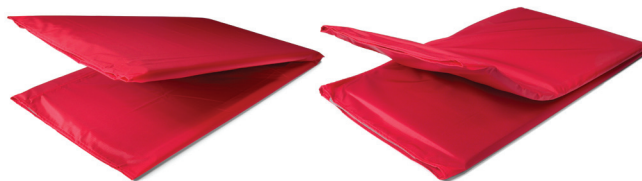

RollerSlide

RollerSlide, flexi

- En styv innerskiva garanterar stabil förflyttning även vid avstånd och höjdskillnad mellan två enheter.
- RollerSlide överbryggar avstånd på upp till 20 cm och jämnar ut eventuella höjdskillnader.
- Glidfodralet av vårt unika ULF material roterar runt skivan och ger en mycket enkel och skonsam förflyttning.
- RollerSlide är vikbar vilket gör den enkel att hantera och transportera.
- RollerSlide har bärhandtag i kortsidorna.
- RollerSlide, flexi är böjbar i kroppens/sängens längdriktning för att smidigt kunna anpassa sig efter underlaget.
- RollerSlide, flexi kräver inte ett plant underlag och är därför mycket effektiv vid överflyttningar från ambulansbåtar eller andra ojämna underlag.
- I alla andra avseenden är RollerSlide, flexi lika som grundmodellen, RollerSlide.
- RollerSlide, flexi är patentskyddad av patent med nr DE 103 34 270 och Europapatentsökt.

PRODUKTSPECIFIKATION

RollerSlide finns i flera versioner och storlekar. RollerSlide, flexi är en lättare, böjbar version av RollerSlide. RollerSlide, light är en lättviktsversion av RollerSlide, flexi. RollerSlide består av en innerskiva av plast eller plywood, skumplastvaddering, nylon och ett glidfodral av ULF (Ultra Low Friction), vårt unika glidmaterial som glider runt skivan under förflyttningen.

Art. nr.	Produkt	Material	Beskrivning	Vikt
9145	RollerSlide	Plywood	175 x 50 cm, vikbar	4,1 kg
9155	RollerSlide	Plywood	85 x 50 cm	2,2 kg
9148	RollerSlide, flexi	Plast	175 x 50 cm, vikbar	3,9 kg
9158	RollerSlide, flexi	Plast	85 x 50 cm	2 kg
9120	RollerSlide, light	Plast	175 x 50 cm, vikbar	2 kg
9110	RollerSlide, light	Plast	85 x 50 cm	1,1 kg

Tillbehör

9136	Sliding cover	Glidfodral för 9120, 9145 och 9148
9156	Sliding cover	Glidfodral för 9110, 9155 och 9158
9138	Disposable cover	Engångsskyddsfodral för 9120, 9145 och 9148, 2 x 50 st
9168	Disposable cover	Engångsskyddsfodral för 9110, 9155 och 9158, 2 x 115 st
1085	WallRack	Väggstativ för förvaring av glidmattor och engångsskyddsfodral för EasySlide och RollerSlide



SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
Tel: 08-557 62 200 • Fax: 08-557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com