



Flexibla
taklyftslösningar
för alla utrymmen.

MilkyWay

- obegränsade möjligheter

En stationär lyftlösning, bestående av en taklyftsmotor som monteras antingen i ett fast installerat skensystem i taket eller i en fristående lyftställning, är ett ergonomiskt utmärkt alternativ som eliminerar behovet av manuella lyft och som gör det möjligt att alltid välja den bästa arbetsställningen i samband med lyft. Dessutom finns lyftsystemet alltid på plats, det upptar minimalt med utrymme och det är mycket lättmanövrerat. Ytterligare en fördel är att man får ett stort lyftområde med möjlighet till både låga och mycket höga lyft.

Ett fast installerat taklyftssystem är rätt lösning när man:

- har permanenta eller ofta återkommande lyftbehov
- har begränsat med utrymme
- vill kunna anpassa möbleringen fritt efter situation och behov
- vill skapa optimala arbetsförhållanden samt förebygga belastningsskador och olyckor i samband med förflyttningar
- vill ha en lösning som är enkel för medhjälparen att använda
- vill tillhandahålla bästa möjliga vårdkvalitet och samtidigt ge brukaren en känsla av trygghet, kontroll och värdighet

MilkyWay är en prisvärd och samtidigt långsiktig lösning med maximal anpassning, flexibilitet, enkelhet och säkerhet.

Skensystem designas individuellt och i nära samarbete med kunden för att anpassas efter de givna förutsättningarna och för att uppfylla ställda krav. Skensystemet kan enkelt byggas ut från en enkel rakbana till travers eller med kurvor och olika växlar för att passa alla utrymmen.

Tillsammans med valfri taklyftsmotor och rätt lyfttillbehör erbjuder MilkyWay obegränsade möjligheter till utveckling och anpassning av den perfekta stationära lyftlösningen för alla miljöer, rum och lyftbehov.

Enkelt att installera

MilkyWay erbjuder flexibilitet i alla avseenden. Det ger många möjligheter vid design samtidigt som det gör skensystemet mycket enkelt att installera. MilkyWay skensystem måste alltid installeras av kvalificerad och auktoriserad personal och i enlighet med instruktioner utfärdade av Direct Healthcare Group. MilkyWay har utvecklats för att uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna enligt MDD och ISOEN 10535.



Mer information

Välkommen att kontakta oss för mer information om MilkyWay skensystem. Med utgångspunkt i just dina förutsättningar och behov hjälper vi dig att skapa den perfekta lyftlösningen.

08-557 62 200
info.se@directhealthcaregroup.com

Ett stilrent och ekonomiskt system

Takfästen och pendlar

MilkyWay erbjuder flera olika möjligheter för installation i taket. Bland annat beroende på faktorer som takets höjd och konstruktion kan man välja mellan att använda takfästen och/eller höjjusterbara pendlar av olika slag. Våra takfästen finns för alla typer av material och är det ett stort avstånd mellan betongfundamenten och undertak finns det sidoslag som stabiliserar hela anläggningen.




Väggfästen

På samma sätt erbjuder MilkyWay flera olika alternativ för installation av skensystem på väggarna. Även här beror valet av fästet på väggens konstruktion och material samt vilken last fästet ska bära.



Skenor

I MilkyWay sortimentet finns en uppsjö av raka skenor och skenkurvor för att bygga den helhetslösning som efterfrågas. Givetvis finns även infällda takskenor för ett stilrent utseende.

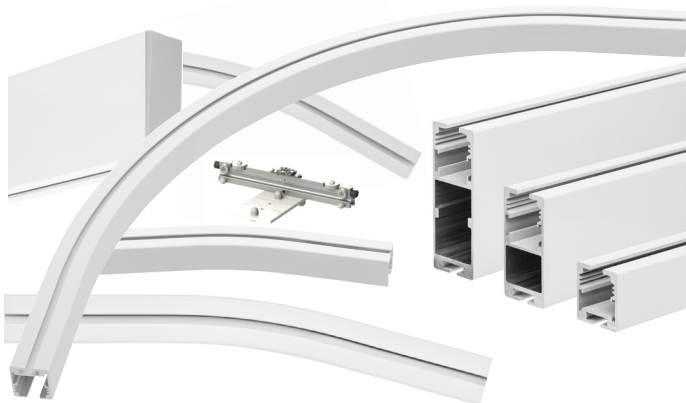

Strömtillförsel


Ett MilkyWay skensystem installeras med en eller flera laddningsstationer för taklyftsmotorn på utvalda platser i skensystemet.



Växlar

Växlar används för att skapa ökad rumstäckning, flexibilitet och användbarhet genom att koppla ihop en skena eller ett annat för att göra det möjligt för taklyftsmotorn att åka mellan de två skenorna/systemen.


I MilkyWay finns spårväxlar, karusellväxlar och skenväxlar för alla typer av skensystem.

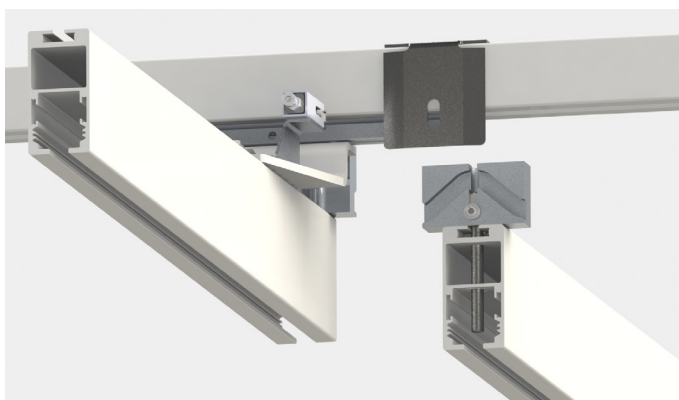

Välj taklyftsmotor efter de aktuella lyftbehoven

MilkyWay kan användas tillsammans med många olika taklyftsmotorer. Vilken som är den rätta beror på behovet av lyftkapacitet, den miljö och de situationer som lyftsystemet ska användas i samt, givetvis, på brukarens behov.

Besök gärna vår hemsida, www.directhealthcaregroup.com för mer information.

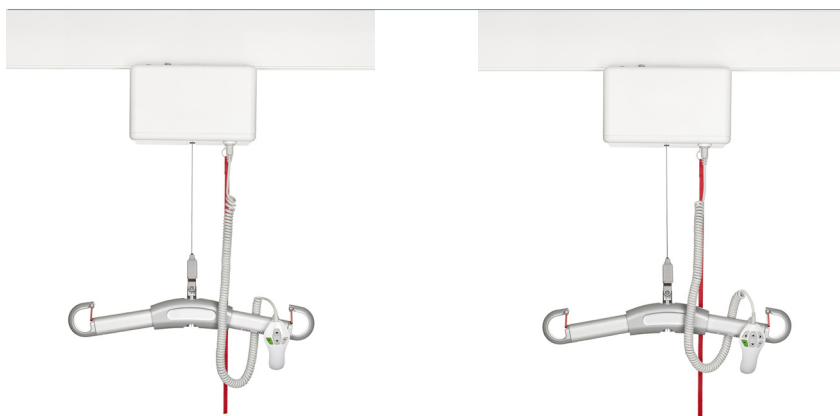

Art. nr.	Produkt
50100039	RiseBasic300M, SWL 138 kg
50100040	RiseBasic440M, SWL 200 kg

Art. nr.	Produkt
50100057	RiseAtlas450M, med QuickTrolley-System, SWL 205 kg
50100051	RiseAtlas450M, med QuickTrolley-System, high humidity, SWL 205 kg
50100059	RiseAtlas625M, med QuickTrolley-System, SWL 285 kg

Mer information

För mer information om MilkyWay; tillgängliga delar, instruktioner för design och installation och stegvisa exempel på olika typer av installationer, vänligen se MilkyWay Technical Information och / eller MilkyWay Handbook-dokument eller kontakta oss eller din lokala Direct Healthcare Group partner.

Alla kontaktuppgifter finns på vår webbplats, www.directhealthcaregroup.com.



DHGG

Moving Health Forward

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
Tel: 08-557 62 200 • Fax: 08-557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com