


QuickLink®

SystemRoMedic™

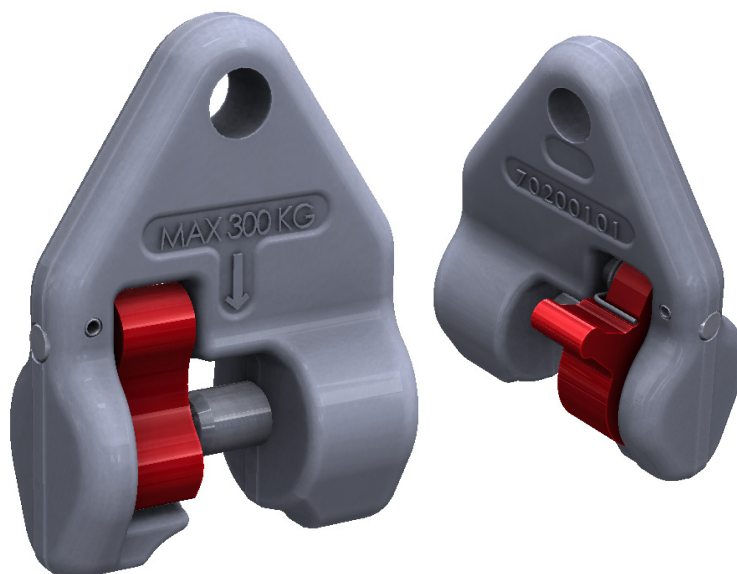

QuickLink® hurtigkobling - Lett å bruke og allsidig

QuickLink® er enkel og allsidig i bruk. Hurtigkoblingen er for raskt og enkelt å kunne bytte løftebøyle og tilbehør på mobileløftere og takheis. Den fjærbelastede sperren åpnes og lukkes på en sikker måte når løftebøylen, eller tilbehøret, er på plass for å sikre koblingen.

Hørbar og taktil tilbakemelding

Ett hørbart klikk og en taktil tilbakemelding når sperren stenges angir en tydelig indikasjon på at løftebøylen/tilbehøret er sikkert festet.

Robust og sikkert design

QuickLinks robuste design og materiale sikrer at brukeren kan løftes trygt og sikkert. Maks brukervekt på 300kg gir produktet en høy løftekapasitet som passer mange brukere. QuickLink® er testet og godkjent i henhold til ISO 10535: 2006 hvilket garanterer produktets design og sikkerhet

Teknisk informasjon

Produkt navn	QuickLink®
Art.nr.	70200101
SWL	300kg / 660lbs
Materiale	Forged, high quality steel
Vekt	Ca 420g
Testet ihht standard	ISO 10535:2006
Forventet levetid	Minimum 20,000 løft (Ca 5 løft/dag i 10 years)
Dimensjoner	60 x 82 x 30mm
Bygghøyde	50mm
Kompatibel med, løftere	Vega, Carina, Eva, EvaDrive, RiseBasic, RiseAtlas
Kompatibel med, løftebøyle	SlingBar S, M, L 4-point SlingBar StretcherBar
Kompatibel med, tilbehør	Charder Vekt