


QuickLink®

SystemRoMedic™

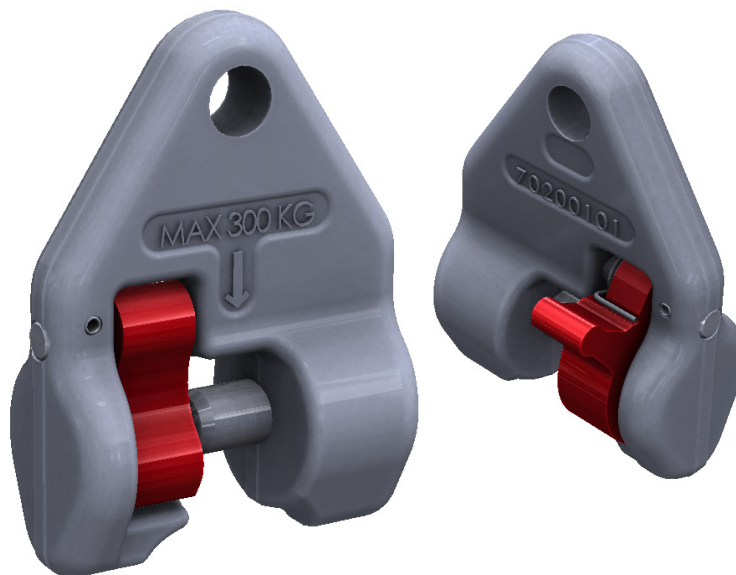

QuickLink snabbkoppling - Lättanvänd och mångsidig

QuickLink® är en lättanvänd och mångsidig snabbkoppling för att enkelt kunna byta lyftbyglar och tillbehör på mobila- och taklyftar. Den fjäderbelastade spärren öppnar och stänger systemet säkert när lyftbygeln eller tillbehöret är på plats för att säkerställa en säker anslutning.

Hörbar och taktill återkoppling

Ett hörbart klick och en taktill återkoppling då spärren stängs, ger användaren en tydlig indikation på att lyftbygeln/tillbehöret är säkert fastsatt.

Robust and säker design

QuickLinks robusta design och material säkerställer att brukaren kan lyftas tryggt och säkert. En max brukarvikt på 300 kg / 660 lbs ger produkten en stor lyftkapacitet och passar många brukare. QuickLink® är testad och godkänd enligt ISO 10535: 2006 vilket garanterar produktens design och säkerhet.

Teknisk information

Produktnamn	QuickLink®
Art. Nr.	70200101
SWL	300kg / 660lbs
Material	Smidd i högkvalitativ stål
Vikt	Approx. 420g
Testad i enlighet med standarder	ISO 10535:2006
Förväntad livslängd	Minimum 20,000 lyft (ungefär 5 lyft/dag under 10 års tid)
Mått	60 x 82 x 30mm
Bygghöjd, Avstånd mellan hål och stift	50mm
Kompatibilitet, lyftar	Vega, Carina, Eva, EvaDrive, RiseBasic, RiseAtlas
Kompatibilitet, lyftbyglar	SlingBar S, M, L 4-point SlingBar StretcherBar
Kompatibilitet, tillbehör	Charder våg