

Raizer® II

Løftestol

Raizer II er en batteridrevet mobil løftestol, der hjælper en liggende borger/patient, op fra gulvet, til en næsten stående stilling på kun 30 sekunder. Raizer anvendes i hjemmeplejen, på ældrecentre og institutioner på hospitaler og af redningstjenester.

Klarer 80 løft
pr. opladning

Raizer II er intuitiv og nem at samle og kan betjenes af kun en person. Raizer II giver personalet og borgeren/patienten en sikker forflytning op fra gulv, i et roligt og ensartet tempo.

4 IDENTISKE BEN og 2 IDENTISKE RYGLÆN sikrer korrekt samling.

Rengøringsvenlige OVERFLADER sikrer nem desinfektion.

Ønskes der yderligere tryghed, kan der monteres flere SIKKERHEDSSELER. De placeres og indstilles individuelt, alt efter borgerens/patientens funktionsniveau.

INTUITIVE LYDE og LED LYS for korrekt samling.

ENGANGSBETRÆK kan tilkøbes som ekstraudstyr, og anvendes ved. f.eks. løft i vådrum.

FJERNBETJENINGEN opbevares på siden af Raizer II og er derved altid ved hånden.




Praktisk og ergonomisk at transportere

- Raizer II leveres med løsdelene i en taske, der kan bæres på ryggen, samt et sæde med ergonomisk udformet håndtag.
- De løse dele til Raizer II er placeret intuitivt i en taske, og er organiseret i forhold til, hvordan Raizer II med fordel samles.
- Der medfølger et overtræk til motorenheden/sædet. Motorenheden/sædet løftes adskilt og er ergonomisk designet, hvilket sikrer, at det bliver løftet tæt indtil kroppen.
- Raizer II kan med fordel transporteres på vores trolley (ekstraudstyr), hvor begge enheder kan fastspændes.

Raizer® II

Løftestol

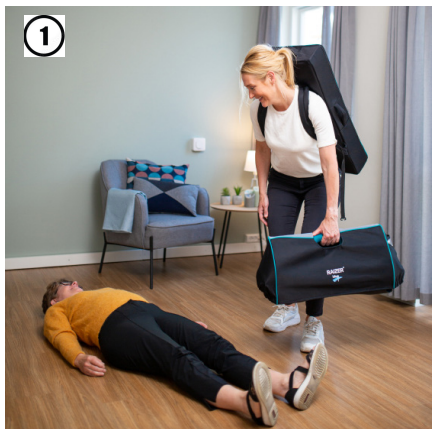

Tekniske specifikationer

Model	Raizer II
Løftekapacitet	Max 150 kg
Løftetid	20 – 30 sekunder
Egenvægt	Sædet: 9,2 kg Ben og ryglæn: 4,9 kg Total: 14,1 kg
Antal løft ved fuld opladning	40 løft ved maks. last Ca. 80 løft ved gennemsnitlig last
Ladetid	Op til 6 timer
Opladning af tomt batteri	10-15 min. = 1 løft
Ladere	USB oplader og 15W lader til standard strømstik

Tilbehør Raizer II

Nakkestøtte/hovedstøtte	107464
Fjernbetjening	105026
Trolley	107273
Triple wheel til trolleyen	103314
Cykelbeslagssæt	103313
Hygiejnebetræk	103741
Sikkerhedssele	107250
15W batterioplader, multistik	105192
USB opladerkabel	105082
Bæretaske	107463
Betræk til sæde	107240
Vægbeslagsæt	107693