



RAIZER[®] by liftup

Det revolutionerande lyfthjälpmedlet

Det patenterade och innovativa lyfthjälpmedlet Raizer är utformad för en effektiv uppresning från golv med hänsyn till både vårdpersonalens hälsa och brukarens trygghet. Raizer är den snabba och säkra mobila lösningen när en person har fallit och behöver komma upp igen.

Möjligheter

Tusentals människor faller varje dag. En del av dessa behöver hjälp för att komma upp, då är Liftups nya lyftstol Raizer en enkel och smidig lösning. Raizer är ett kostnadseffektivt hjälpmedel som är lätt att montera och använda och som den som har fallit kommer snabbt på benen igen.

Enkel hantering

Vårdpersonal kan utan assistans hantera både Raizer och personen på golvet. Det behövs heller ingen kraft för att kunna lyfta eller putta, ingen risk för överbelastning av armar och rygg. Vårdpersonal placerar Raizer enligt instruktion och har därmed möjlighet att manövrera Raizer med den ena handen, samt ev. stötta personens huvud med den andra.

Raizer från Liftup levereras separat med tillhörande väskor och kan

därför lätt transporteras. Stolen monteras enkelt ihop och är snabbt klar för användning. Raizer är batteri-driven och kan manövreras med en fjärrkontroll (tillbehör), båda dessa delar bidrar till en mobil lösning.

Design

Liftup har i utvecklingsfasen samarbetat med professionella industridesigners för att få till Raizers exklusiva uttryck. Materialen är noga utvalda med fokus på stabilitet och hållbarhet, med hänsyn till både vårdare och brukare.

Säkerheten viktigast

För den som har fallit betyder det mycket att komma upp säkert. Under lyftet från liggande till sittande har personen kontakt med golvet. Lyftmomentet är både skonsamt och jämnt och som extra säkerhet är stolen utrustad med ett säkerhetsbälte.

FÖRDELAR

- Endast en vårdare krävs för att lyfta brukaren med hjälp av Raizer.
- Både brukare och vårdare kan känna sig trygga - bekvämt och säkert lyft
- Lyfter brukare upp till 150 kg
- Transporteras enkelt i två väskor
- Monteras ihop på plats på bara ett par minuter
- Enkel att rengöra
- Patenterad teknologi
- CE-märkt




RAIZER



Tekniska detaljer

- Lyftkapacitet: max. 150 kg
- Lyfttid: 20-30 sek
- Vikt sits: 9 kg
- Vikt rygg: 4 kg
- Totalt: 13 kg
- Laddare (2 st) : Soniel 12 V, 100-240 V och 12 V biladapter
- Antal lyft vid full uppladdning: Ca 40 lyft vid max belastning (150 kg).
- Ca 100 lyft vid genomsnittlig belastning (80kg).
- Laddtid: max. 6 timmar.
- Laddning av tomt batteri: 10-15 min = 1 lyft

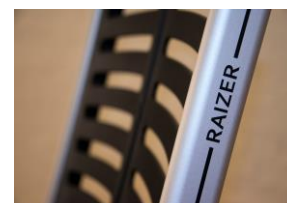

Fjärrkontroll

