

Produktblad

Resilience

Unik vårdsäng för speciella behov

Nyhet!



En unik säng utvecklad i ett samarbete mellan dansk psykiatrisk expertis och industrin, äntligen finns en säng med fokus på de speciella behov och lösningar som krävs för att ge patienter och personal den säkerhet, trygghet och komfort som situationen kräver.

DHG
Moving Health Forward

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 08-557 62 200
Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35
Sweden | SE-164 40 Kista
info.se@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com

Unik vårdssäng för speciella behov



Multifunktionell kudde

Ett hjälpmedel som lugnar patienten. Kudden kan användas efter behov. Kudden är indelad i tre olika bytbara moduler som kan monteras i ett sammankopplat överdrag

Trådlös säng

Sängens levereras med ett utbytbart, uppladdningsbart batteri. Batteriet placeras i en sluten och låst låda vid fotänden av sängen. Lådan kan endast öppnas med ett chip eller nyckelkort. Batteriet levereras som en plugin-lösning och kan enkelt bytas av personalen. Lådan innehåller batteri, personalens fjärrstyrningsenhet med batteriikon för att indikera batteriström och en fjärrkontroll för patienten. Batteriladdarpanelen är placerad i ett separat rum.



Nyhet!




Nödsituationer

Ramen på sängen rymmer möjligheter att använda fixeringsbälten av standardtyp, detta är integrerat i sängens design och är en naturlig del i formspråket.



Två olika fjärrkontroller

Med sängens två olika fjärrkontroller, en som är tillgänglig för patienten och anpassad i funktion och vikt, samt en för vårdarens behov, justeras snabbt och enkelt sängens olika inställningar. Personalens fjärrkontroll förvaras inlåst i batteri lådan.

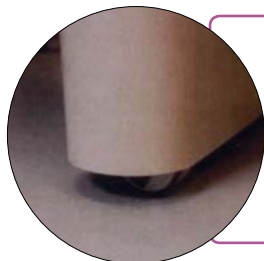

Ben och hjul

Sängens hjul är vid parkering helt dolda inuti benen, vid förflyttning manövreras dessa med sängens fjärrkontroll, men endast via vårdarens fjärrkontroll som är inlåst i batterilådan. Kan ej manövreras av patient. Säkert, och är en del i sängens inbjudande design.

Skyddsskenor och huvudskivor

Skyddsskenor och skivor kan köpas och installeras senare. Skyddsskena och huvudskiva är säkrade för att förhindra oavsiktlig demontering, t.ex. under hantering av sängen. Huvudgavel fungerar som ett förflyttningsgrepp.



Den säkra sängen

Med patientens och personalens trygghet och säkerhet i första rummet har Resilience utvecklats i ett samarbete mellan dansk psykiatrisk expertis och industri. Inga kablar; helt batteridrivna, med väl dolda mekaniska delar som hjul och motorer och en vikt på 280 kg. Med en design som inte är institutionell utan välkomnande hemtrevlig erbjuder Resilience en säker och trygg lösning även för utåtagerande patienter.

Justering av höjd

Med sängens två olika fjärrkontroller, en som är tillgänglig för patienten och anpassad i funktion och vikt, samt en för vårdarens behov, manövreras sängens olika funktioner. Med sängen i lägsta höjd är den bekväm att sitta i och får funktionen av en soffa.

