

DEFINITIVT BÄTTRE



Libra

Den låga sängen för modern vård



Libra – vårdsängen för ökad rörlighet, säkerhet och komfort

Moderna
sidoskydd att
välja mellan

Vario
Safe

Frihet och flexibilitet är Libras styrka. Den här vårdsängen kan detaljanpassas efter patientens och vårdpersonalens önskemål. Den ger skydd och komfort för alla som behöver vård samtidigt som den underlättar deras rörlighet.

Vårt innovativa system Vario Safe bidrar avgörande till detta. Med Vario Safe kan du på några sekunder ta bort och sätta dit det delade sidoskyddet, sänggavlarna och sängpanelerna. På så sätt är det lätt för vårdpersonalen att anpassa sängen till patientens förändrade säkerhetsbehov.

Med attraktiva trädekorer eller tygklädsel kombinerar Libra komforten och elegansen på ett bra hotell med säkerheten i ett hem. Tack vare Vario Safe är det enkelt att anpassa vårdsängen efter varje smak.



Libra – Standard

- Höjdinställning:
ca 25 – 80 cm
- Hög och säker arbetsbelastning
på 225 kg
- Låg säng som fallprofylax:
skydd utan frihetsberövande åtgärder
- Attraktiva former, dekorer och
klädvarianter

Sida 4



Libra – Varianten movo

- Höjdinställning:
ca 28 – 83 cm
- Hög och säker arbetsbelastning
på 225 kg
- Ännu bättre köregenskaper:
enkel att manövrera i trånga utrymmen
- Patienten kan lättare vara med i
vardagen med en mobil säng

Sida 6



Libra – Varianten golvfrigång Plus

- Höjdinställning:
ca 25 – 80 cm
- Hög och säker arbetsbelastning
på 225 kg
- Underrede utan längsgående stöd:
lättare att köra in något under sängen
- Bättre hygien tack vare enklare
rengöring av golvet

Sida 7

Innehåll

3 Modellvarianter

4 Libra – standard

6 Libra – varianten movo

7 Libra – varianten golvfrigång Plus

8 Flexibla sidoskydd

10 Libra med Vario Safe

12 Alltid på rätt höjd

14 Komfort som på ett bra hotell

15 Liggytor

16 Ekonomiskt med låg spänning

17 Enkelt hantering

18 Sängförlängning

19 Tillbehör

20 Utrustning och alternativ

22 Stieglmeyer-gruppen





Låg säng

**Vario
Safe**

Libra – standard

Skräddarsydd efter
individuella behov

Människor som behöver vård måste skyddas från fall på bästa möjliga sätt. Samtidigt är obegränsad rörlighet avgörande för välbefinnande och för att bibehålla den fysiska konstitutionen. Som **låg säng** med delade sidoskydd som tillval erbjuder Libra både stor säkerhet och full rörelsefrihet. Sängen är bara ca 25 cm från golvet, vilket minskar risken för fallskador. Det delade sidoskyddet på huvudsidan gör det finns gott om utrymme lätt att lägga sig och att kliva upp. På så sätt följer vi **Werdenfelser Weg**-filosofin och undviker frihetsberövande åtgärder.



- Stort **höjinställningsområde** på cirka 25 – 80 cm för fallprofylax och ryggvänlig vård
- **Hög och säker arbetsbelastning** på 225 kg
- Som tillval finns **delade sidoskydd** för individuellt skydd i alla situationer
- **Hemtrevligt utseende** tack vare valbara gavlar, valbar trädekor och klädsel
- Om det inte finns något sidoskydd, vare sig teleskopiskt eller delat, gör systemet **Vario Safe** det möjligt att snabbt ta bort sidoskydd, gavlar och paneler



▲ **Libra med delat sidoskydd** erbjuder individuell säkerhet.

◀ **Det flexibla systemet Vario Safe** gör det möjligt att individuellt kombinera sidoskydd, paneler och gavlar.

Yttermått/höjinställningsområde:

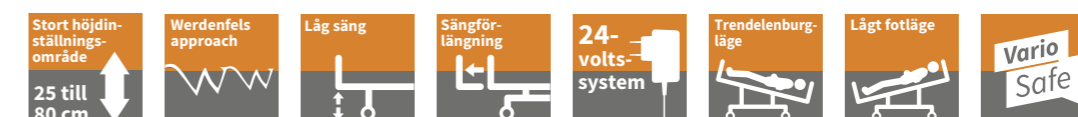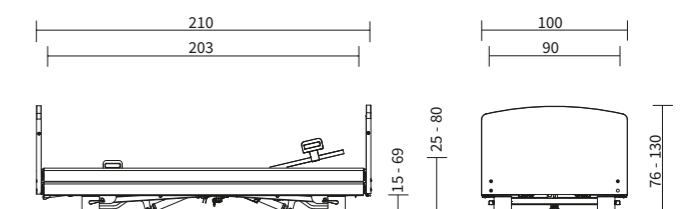



Med modellvarianten movo är man med i vardagen igen.



Med modellvarianten golvfrigång Plus är det lätt att komma åt med sopborstar och dammsugare.

Vario Safe Libra – varianten movo

Särskilt lätt att köra för en levande vardag


Varianten movo i Libra-serien imponerar med sina särskilt **goda körbarhet**. Det blir mycket lättare att manövrera sängen i trånga utrymmen och flerbäddrum och flytta den till andra platser i huset.

Vårdpersonal och tekniker **avlastas** och risken för kollisionsskador minskar. Movo-variantens rörlighet gör det också lätt för sängliggande att delta i vardagen – deras säng kan enkelt rullas in i det gemensamma rummet eller ut på terrassen.

- Dubbla hjul på 100 mm med mycket goda köregenskaper
- Centrallås på hjulen är standard
- Stort höjdställningsområde på cirka 28 - 83 cm



Yttermått/höjdställningsområde:

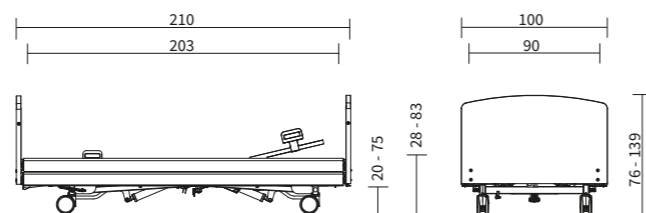

Vario Safe Libra – varianten golvfrigång Plus

Smidig golvfrigång för bättre hygien



Det är viktigt med grundlig och **noggrann hygien** i institutionsvård – för att bekämpa patogener och allergier och samtidigt skapa en hemtrevlig atmosfär. Smuts och damm har inget under sängen att göra. Modellvarianten golvfrigång Plus har en särskilt praktiskt underrede utan metallstag på långsidorna. Det underlättar **grundlig rengöring** av golvet – skurtrasor och sopborstar kommer lätt åt under sängen.

- Stort höjdställningsområde på cirka 25 - 80 cm
- Optimalt med plats under sängen för lyftanordningar
- 8 hjul gör sängen enkel att manövrera



▲ Med sina åtta hjul är det lätt att manövrera sängen.

Yttermått/höjdställningsområde:

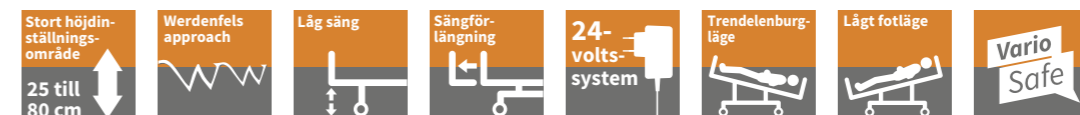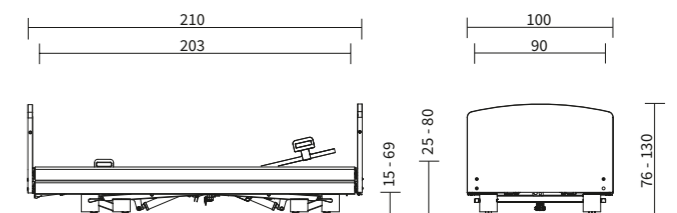



De långsgående sidoskydden (standard) förstärker det harmoniska intrycket när de är nedfällda.



Vario Safe

Det delade sidoskyddet kan kombineras med hemtrevliga paneler.



Mellanstödet i det kombinerbara sidoskyddet kan enkelt tas bort och förvaras i en speciell anordning på sängen.

Sidoskydd

Optimal avvägning mellan skydd och frihet

För Libras alla modellvarianter finns **tre sidoskyddssystem** att välja mellan som på ett flexibelt sätt kan anpassas till patientens olika behov. Som standard är sängen på båda sidorna försedd med **långsgående sidoskydd** som ger ett maximalt fallskydd.

Om vårdtagaren behöver kunna lämna sängen med uppfällt sidoskydd, rekommenderas ett system med delade element. På det **kombinerbara sidoskyddet** är brädorna på huvud- och fotsidan fästa på ett mittstöd, som också fungerar som ett ergonomiskt hjälpmedel för patienten att ta sig upp ur sängen. Som man hör på namnet kan det kombinerbara sidoskyddet kombineras med ett sidoskydd längs hela den andra sidan av sängen.

Komponenterna i det teleskoperbara, **delade sidoskyddet** kan enkelt dras ut uppåt i två steg.

Det första steget ger patienten orienteringshjälp, medan det andra ger ett omfattande skydd. Den här modellens element på huvudsidan med en längd på 110 cm uppfyller ensamma **standardkraven** för sidoskydd eftersom de täcker mer än 50 procent av liggytan.

Den **rätlinjiga utformningen** av det delade sidoskyddet är avsiktligt reducerad till enbart det väsentliga: Ytornas utformning är en elegant blandning av **trä och metall**, vilket gör att inga extra sidopaneler behövs. Det är därför lätt att **rengöra** sängen **noggrant**. Om det inte finns några sidoskydd, går det att istället använda hemtrevliga paneler med trädekor eller tygklädsel. Alla element kan fästas och tas bort på några sekunder med systemet **Vario Safe**.



▲ Sidoskyddet längs hela sidan ger maximalt skydd.



▲ En diagonal placering ger stöd och orientering.



▲ Elementet på huvudsidan och mittstödet i det kombinerbara sidoskyddet ger ett skydd i enlighet med gällande standard.



▲ Det kombinerbara sidoskyddet kan kombineras med sidoskydd som löper längs hela sidan.



Vario Safe

▲ Det delade sidoskyddet kan kombineras med hemtrevliga paneler.



Vario Safe


▲ De fyra elementen i det delade sidoskyddet kan individuellt dras upp i två steg.



Libra med Vario Safe – den bästa lösningen för säkerhet i enlighet med normerna

Oavsett om du väljer Libra med delat sideskydd eller utan sideskydd använder du dig av vårt flexibla system Vario Safe. Principen för Vario Safe är lika enkel som imponerande: Elementen i sideskyddet, huvudgavlarna och sidopanelerna kan sättas fast och tas bort utan verktyg. För det används lättanvända lås som enkelt snäpps på plats och som patienten inte kan öppna av misstag.

Gavlar och paneler kan på begäran levereras med attraktiv tygklädsel eller i konstläder. Sängar med Vario Safe kan på bara några minuter anpassas efter patientens förändrade behov. Vårdhem kan om så önskas beställa sina sängar i ett grundutförande och senare komplettera med ytterligare delar när som helst.

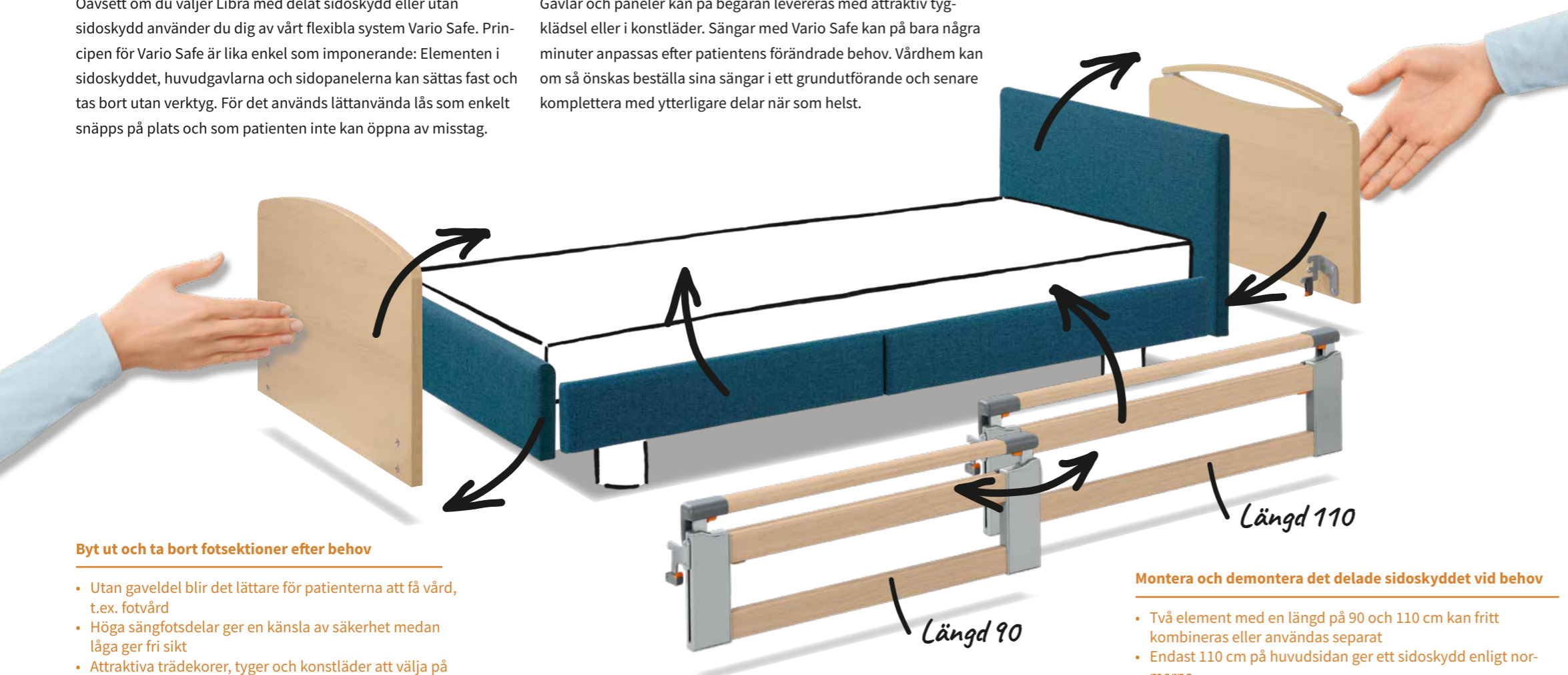

Byt ut och ta bort fotsektioner efter behov

- Utan gaveldel blir det lättare för patienterna att få vård, t.ex. fotvård
- Höga sängfotsdelar ger en känsla av säkerhet medan låga ger fri sikt
- Attraktiva trädekorer, tyger och konstläder att välja på

! Sidoskydden kan kombineras fritt: 110/90 eller 90/110

Gavlar med Vario Safe



Modulär konstruktion och anpassningsbart utan verktyg


Byt ut huvuddelar på bara sekunder – om så önskas

- Hemtrevliga designvarianter, med eller utan grepplistor
- Attraktiva trädekorer, tyger och konstläder att välja på
- Det kan vara olika färger på gavel och sidopaneler

Montera och demontera det delade sideskyddet vid behov

- Två element med en längd på 90 och 110 cm kan fritt kombineras eller användas separat
- Endast 110 cm på huvudsidan ger ett sideskydd enligt normerna
- Endast 90 cm på huvudsidan ger en känsla av säkerhet och orientering, och lämnar gott om plats för att komma in och ut

Dekorer med Vario Safe

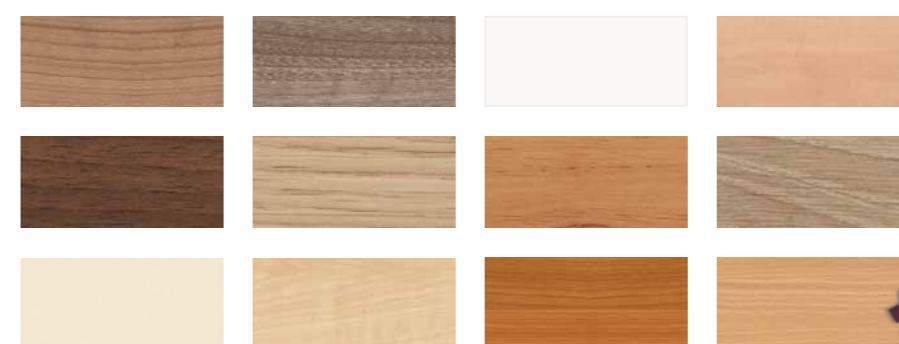

Information om andra tyger och konstläder fås på begäran.

DEFINITIVT BÄTTRE

Mer flexibilitet och ökad säkerhet med Vario Safe

Sängar med Vario Safe uppfyller förändrande skyddsbehov hos patienterna och kan anpassas utseendemässigt efter personlig smak. Det flexibla sideskyddet ger ett skydd i enlighet med föreskrivna normer utan att det begränsar patientens rörlighet.



▲ Alla Vario Safe-element sitter i sängramen och fästs med lättanvända låsanordningar.



▲ Tryck bara på låsanordningen uppåt.



▲ Låset snäpps fast på plats – elementet är fastsatt.



▲ För att lossa låsanordningen drar du den orange säkringen framåt och trycker ned låset.

Följ tillverkarens anvisningar vid rengöring av tyger och konstläder



Med sitt låga, lägsta läge på cirka 25 cm är Libra en effektiv fallprofylax utan att för den skull begränsa patientens rörlighet.

Alltid på rätt höjd

Fallprofylax och ergonomisk vård

Människor som behöver vård kan njuta av Libras skydd utan att behöva ge upp sin rörlighet. En effektiv fallprofylax utan frihetsberövande åtgärder är en **låg sänghöjd**. Därför kan Libra sänkas till cirka 25 cm. Risken är liten att skada dig så nära golvet. Vårdpersonalen behöver en helt annan höjd: De måste arbeta på höfthöjd för att avlasta ryggen. Då kan Libra höjas till cirka 80 cm, vilket ger de bästa förutsättningarna för **ergonomiskt arbete**.

Tack vare sin **trestoppsfunktion** stannar sängen automatiskt vid cirka 38 cm under höjdjusteringen. Vid det läget kan patienten på ett bekvämt sätt såväl lägga sig som kliva upp ur sängen. Naturligtvis innebär den steglösa justeringen av Libra att du kan ställa in vilken höjd som helst med centimeterprecision för att uppfylla individuella behov.

▼ **Tack vare sin trestoppsfunktion har sängen ett stoppläge på cirka 38 cm – ett idealiskt läge för många att lägga sig och kliva upp ur sängen.**



DEFINITIVT BÄTTRE

Steglöst justerbar

- Enkel styrning med hjälp av handkontrollen för inställning av den mest ergonomiska positionen för patienten att ta sig i och ur sängen
- Gör patienten mer rörlig
- Ryggskonande arbete vid sängen är bra för vårdpersonalens hälsa
- Fallprofylax utan frihetsberövande åtgärder

Om ett föremål blockerar höjdjusteringen av sängen blir sidoskydden kvar i sitt läge för att undvika skador. ▶



▲ **De lätt avtagbara gavlna gör det lättare för patienterna att få vård, t.ex. fotvård.**



▲ **Med en höjdjustering på upp till 80 cm kan vårdpersonalen arbeta vid sängen på ett ryggskonande sätt.**



▲ Det justerbara ryggstödet gör vardagen bekvämare.

◀ Fåtöljläget är perfekt vid måltider eller för att titta på TV.

Komfort och liggytor

Livsglädje som på ett bra hotell

Människor i behov av vård känner sig bekväma och säkra i Libra. Sängens precisa inställningsmöjligheter bidrar till det. Sitt avslappnad, titta på TV eller prata med andra i ögonhöjd – det är möjligt i Libra. Med ett lågt fotläge på upp till 16° och en ryggstödsjustering på upp till 70° kan sängen förvandlas till en bekväm fåtölj. Det gör det möjligt för patienterna att enklare delta i vardagen. Om situationen kräver det kan Libra ställas i Trendelenburg-läge.



▲ Den bekväma liggytan består av 50 fritt rörliga fjädrar.



▲ Stabil och flexibel: liggyta av metallameller.



Hälsosam och vilsam sömn

Libras fyrdelade liggyta av metallameller ger hög komfort. Den är såväl stabil som flexibel. Inställningsmöjligheterna hos ryggstödet och lårstödet gör det enkelt att ställa in önskad position för patienterna i alla vardagssituationer. Metallamellerna är lätta att rengöra. Det går att ytterligare öka komforten och förbättra hygienen med valfria täckanordningar på liggytan. Den bekväma liggytan består av 50 separata fjädrar. De anpassar sig exakt till kroppen och bidrar till god ventilation av madrassen. Deras rörelser garanterar en optimal fördelning av tryckkrafterna. Den bekväma liggytan förstärker trycksårsprofylaxen. Den hygieniska liggytan av polypropylen är särskilt luftig och andas tack vare djupa ventilationsspår. Ytan kan tas bort och rengöras enkelt med konventionella rengöringsmedel.


◀ Eftersom den andas säkerställer den hygieniska liggytan ett bra mikroklimat.



Sparsam med låg spänning

Alla Libras modellvarianter är som standard utrustade med **skyddsklenspänning**. En extern transformator reducerar strömmen vid uttaget till 24 volt, så att det inte finns några spänningsförande 230-voltskomponenter i närheten av patienten. Det ökar säkerheten och för också med sig märkbart minskade **elkostnader** samtidigt som mängden elektrosmog minskar och miljön skonas.

DEFINITIVT BÄTTRE Minskad strömförbrukning

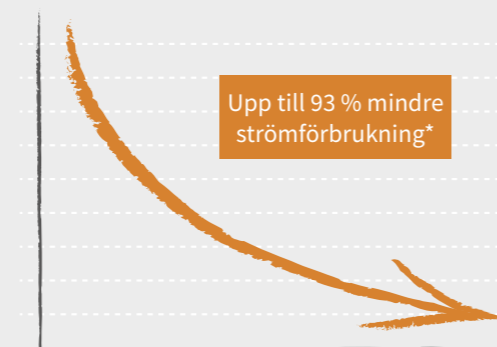

* jämfört med 230-voltssystem och cirka 5 justeringar per dag

Enkel hantering Handkontroll för individuella krav

Libras justeringsalternativ kan enkelt och intuitivt väljas med handkontrollen. Den är ergonomiskt utformad och lätt att hålla i. Dosans stora piltangenter och de tydliga piktogrammen gör det lätt för alla – även för dem med nedsatta funktioner – att använda den. Enskilda funktioner kan **spärras** om så önskas. Det finns två alternativ för att använda sängens låga huvudläge: en standardhandkontroll med en inbyggd Trendelenburg-knapp eller en separat Trendelenburg-handkontroll, vilket eliminerar risken att patienten av misstag använder funktionen.

▼ För att förhindra att patienten av misstag justerar huvudet till lågt läge finns det en separat handkontroll för Trendelenburg-läget (vänster). I standardhandkontrollen (höger) finns det inte någon Trendelenburg-funktion.


▼ Det är möjligt att som tillval förse en standardhandkontroll med inbyggd Trendelenburg-funktion (knappen längst ner till höger).

▼ Med en hållare på det delade sidoskyddet är handkontrollen alltid inom räckhåll.



Den externa transformatorn producerar skyddsklenspänningen direkt vid uttaget.

DEFINITIVT BÄTTRE Passar överallt

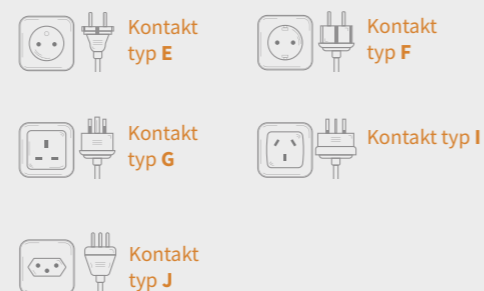

Vi har passande elkontakter för många internationella marknader. Använd vårt 24-voltssystem när som helst utan adapter.



Sängförlängning

Mer utrymme för långa patienter

Under många decennier har människan i genomsnitt blivit längre – en utveckling som vårdhem också måste ta allt större hänsyn till. Med tillvalet sängförlängning för Libra kan du när som helst skapa det utrymme du behöver för att patienten ska ligga bekvämt. Du kan direkt när du köper sängen få den cirka 20 cm längre eller beställa en sängförlängning i efterhand.


Det metallelement som behövs för att förlänga sängramen är enkelt att sätta fast i fotänden. Det finns lämpliga längre brädor

och paneler för alla typer av sidoskydd. Om sängen har det delade sidoskyddet med systemet Vario Safe går det att montera **två 110 cm långa element** per sängsida. Med Vario Safe blir användningen av sängförlängningen i hemmet ännu mer flexibel och effektiv – alla nödvändiga element kan bytas från en säng till en annan på bara några ögonblick.

Stieglmeyer erbjuder matchande bekväma **stoppningsdelar** för att förlänga madrassen.




På en Libra med sängförlängning och systemet Vario Safe kan två 110 cm långa sidoskyddselement sättas fast på varje sängsida.

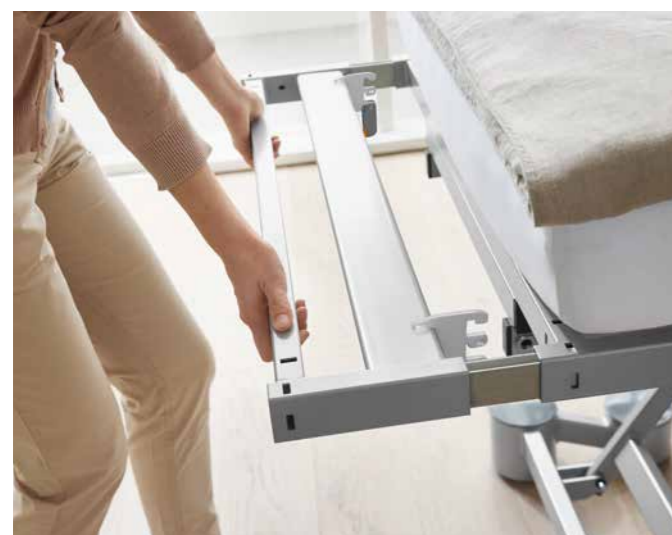

▲ Elementet för att sängförlängning sätts enkelt fast i sängramen.



▲ En skräddarsydd stoppningsdel finns för att förlänga madrassen.

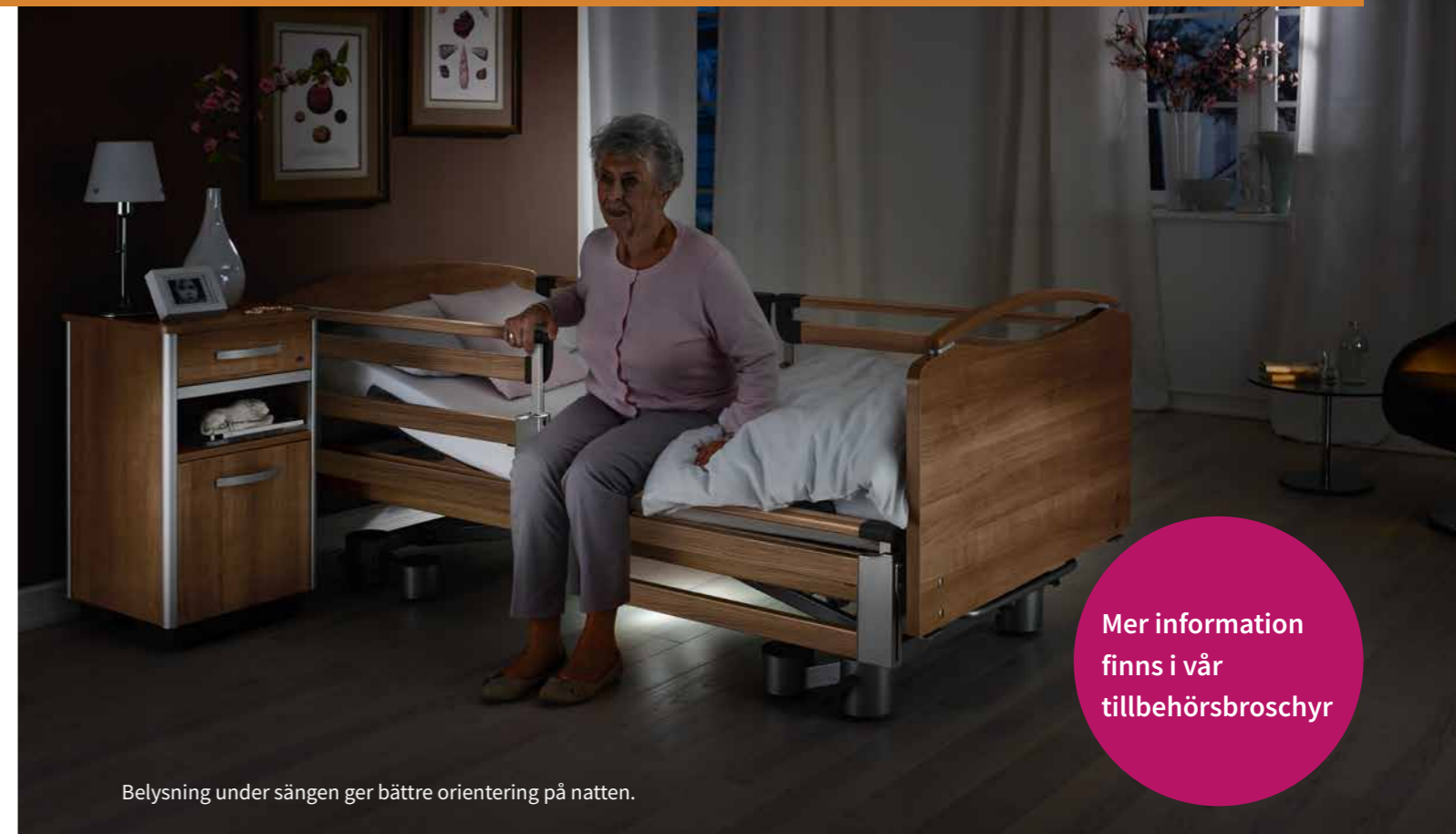

Belysning under sängen ger bättre orientering på natten.

Tillbehör

Med mer säkerhet och bekvämlighet för din drömsäng



▲ Läslampan Sola ger behagligt ljus och genererar lite värme.



▲ Lyftstången gör det lätt att placera sig rätt i sängen.




▶ Sängklädeshyllan är mycket praktisk, speciellt när man bäddar sängen.



DEFINITIVT BÄTTRE Väggavståndsanordning

- Med väggavståndsanordningen undviks kollisionsskador med möbler och eluttag när sängen flyttas

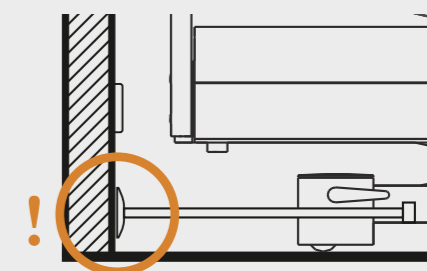

- Många olika modeller att välja mellan
- En buffert absorberar slagenergin
- Som tillval finns en platta som fördelar trycket jämnt – perfekt för gipsväggar
- Lämpliga dimensioner för sängen

Utrustning och alternativ

Modellvarianter	Libra – standard	Libra – varianten movo	Libra – varianten golvfrigång Plus
Utförande			
Konstruktion med fyra stolpar	✓	✓	✓ (fot- och huvudsida)
Mått och vikt			
Ytermått med – kombinerbart, delat sidoskydd – sidoskydd längs hela sidan (beror på träbeläggningen)	med en liggytebredd på 80 cm cirka 93 x 209,4 cm med en liggytebredd på 90 cm cirka 100,3 x 209,4 cm med en liggytebredd på 100 cm cirka 110,3 x 209,4 cm		
Ytermått med – delat sidoskydd	med en liggytebredd på 90 cm cirka 104,0 x 209,4 cm med en liggytebredd på 100 cm cirka 114,0 x 209,4 cm		
Liggyta (madrassmått)	cirka 80 x 200 cm eller 90 x 200 cm eller 100 x 200 cm		
Uppdelning av liggytan (ryggdel/sittdel/OL/UL)	cirka 72 – 25 – 33 – 54 cm		
Längdjustering av ryggstödet enligt DBfK (tysk branschorganisation för sjuksköterskor)	cirka 8 cm		
Säker arbetsbelastning	225 kg		
Tillgänglighet	cirka 15 cm		
Totalvikt	cirka 135 kg		
Drivning			
Helt motordriven	✓	✓	✓
24-volts drivning med extern transformator	✓	✓	✓
Elektroniska komponenter			
Handkontroll (selektivt spärrbar)	✓	✓	✓
Handkontroll med Trendelenburg (selektivt spärrbar)	0	0	0
Extra handkontroll för Trendelenburg	0	0	0
Belysning under sängen	0	0	0
Nödläggessänkning med 2 x 9-voltsbatterier ²⁾	✓	✓	✓
Sidoskyddssystem			
Inbyggt, sidoskydd längs hela båda sidorna, skyddshöjd 41 cm – 2 brädor	✓	✓	✓
Inbyggt, kombinerbart sidoskydd, delat på en sida – 2 brädor ¹⁾	0	0	0
Inbyggt, kombinerbart sidoskydd, delat på båda sidorna – 2 brädor ¹⁾	0	0	0
Delat sidoskydd på båda sidorna ¹⁾	0	0	0
Liggytor			
Liggyta av metallameller	✓	✓	✓
Fyrdelad liggyta, elektriskt justerbar	✓	✓	✓
Liggytan kan i fotänden svängas till ett lägre läge	✓	✓	✓
Liggytan kan i huvudänden svängas till ett lägre läge	0	0	0
Bekväma täckanordningar på liggytan	0	0	0
Hygieniska täckanordningar på liggytan	0	0	0
Enkel bortkoppling från underredet	✓	✓	✓
Liggytebredd på 100 cm	0	0	0
Liggytebredd på 80 cm	0	0	0
Hjul			
Dubbla hjul	Ø 50 mm	Ø 100 mm	Ø 50 mm 8 x
"Easy Floor Access"	–	–	✓
2x2-hjullåsning	✓	–	✓
Centrallås för fyra hjul	0	✓	–

Modellvarianter	Libra – standard	Libra – varianten movo	Libra – varianten golvfrigång Plus
Väggavståndssystem			
Väggavståndsanordning	0	0	0
Väggavståndsanordning på underredet	0	0	0
Justeringsområde			
Höjdjustering	cirka 25 – 80 cm	cirka 28 – 83 cm	cirka 25 – 80 cm
Ryggstödsjustering upp till cirka 70°	✓	✓	✓
Lårstödsjustering upp till cirka 40°	✓	✓	✓
Fotinställning upp till cirka 16°	✓	✓	✓
Trendelenburglager upp till 16°	0	0	0
Övrigt			
Ryggstödsэлемент med lättrenjorda metallameller	✓	✓	✓
Träbeläggningar att välja mellan enligt broschyren (måttan varierar beroende på sidoskyddsversion och gavelmodell)	✓	✓	✓
Trädekorer att välja mellan enligt broschyren	✓	✓	✓
Metallbeläggning Argentum	✓	✓	✓
Två fästhyllor på huvudsidan för lyftstång/IV-ställning	✓	✓	✓
Sidopanel bakom sidoskydden ¹⁾ (inte med delat sidoskydd)	✓	✓	✓
Nödupplåsning av ryggstöd	0	0	0
Sängförlängning med 20 cm	0	0	0
Sängklädeshylla ³⁾	0	0	0
Tillbehör			
Skumläderklädsel (för sidoskydd)	0	0	0
Fallskyddsmatta	0	0	0
/IV-ställning/-stativ	0	0	0
Olika klädselsystem	0	0	0
Serveringsbricka	0	0	0

✓ = ingår som standard
0 = finns som tillval
– = inte tillgänglig



DEFINITIVT BÄTTRE Libra – säkerhets- standarderna*

- EN 14971
Riskanalys för medicinsk utrustning
- EN 60601-1
Säkerhet för elektrisk utrustning
för medicinskt bruk
- EN 60601-1-1
Elektromagnetisk kompatibilitet
- DIN EN 60601-2-52
Elektrisk utrustning för
medicinskt bruk

* Säkerhetsrekommendation från Tysklands institut för
läkemedel och medicintekniska produkter (BfArM)

Värdebevarare Framtidsdesigner



STIEGELMEYERGROUP

Värdebevarare

Vårt företag grundades år 1900 i Herford och har varit familjeägt sedan dess. Respekt och ansvar gentemot våra kunder, anställda och partners är grunden för vårt dagliga arbete. Med utgångspunkt i dessa värden och många års erfarenhet erbjuder vi våra kunder världen över högkvalitativa produkter, lösningar och tjänster inom vård och hälsa.

Framtidsdesigner

För att hantera de snabba förändringarna inom vård och hälsa utvecklar vi alla våra produkter själva. Innovationer och visioner för framtidens vård är målet med vårt arbete. Vi står alltid i kontakt med våra kunder för att hjälpa dem i det vardagliga arbetet. Att förverkliga morgondagens trender redan idag är en framgångsrik tradition hos oss.

Vår expertis

- Sjukhus
- Vårdhem
- Vård i hemmet
- Bekväma sängar
- Möbelsystem
- Tjänster



Stiegmeyer-gruppen är din internationella partner för sjukhus och vårdinrättningar och med varumärket Burmeier för hemsjukvård. Vi hjälper våra kunder med praktiska produkter, lösningar och tjänster som vi utvecklar fortlöpande.

- Grundades 1900 och är fortfarande familjeägt
- Över 1 100 anställda världen över
- Tillverkning av alla kärnprodukter i egna fabriker
- Produktutveckling och produktion i Tyskland
- Tjänster, utbildning och processoptimering hos kunden
- Internationella certifieringar och export till mer än 60 länder
- Distributörer i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen och Sydafrika

Våra varumärken





STIEGELMEYERGROUP

Huvudkontor/Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
8 Allée des Chevreuils
69380 Lissieu
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
Fax +33 (0) 4 7238 - 5481
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Hitta din kontaktperson på vår webbplats:
Find your local partner on our website:
www.stieglmeyer.com/partner

stieglmeyer.com