

### VENDLET Standard

Det fuldautomatiske vendesystem, VENDLET, er et hjælpemiddel til forflytning og vending i sengen. Vendelagnet gør det muligt skånsomt at forflytte en person til rygleje, sideleje eller bugleje, samt forflytte højere op eller sideværts i sengen uden at belaste plejepersonalet.

Vendelagnet er fuldautomatisk, hvilket vil sige, at der ikke er nogle manuelle processer. Siderne, der er godkendt som integreret sengehest, køres op og ned vha. håndbetjeningen, ligesom selve vendingen også foretages ved et tryk på en knap.


Men med det elektroniske vendesystem foregår forflytningen ens hver gang og i et roligt tempo uden pludselige ryk, hiv eller træk. Denne ensartethed i forflytningen giver en tryghed for borgeren eller patienten, der forflyttes og samtidigt mindskes risikoen for vævsskader.

Kan gå i sengevask

VENDLET Standard har integreret aktuatorer i hjørnestolperne, der tillader at sengen kan sænkes uden begrænsning.

VENDLET Standard kan blive siddende på sengen når den kommer i sengevask.

VENDLET Standard er fremstillet i genanvendelige materialer

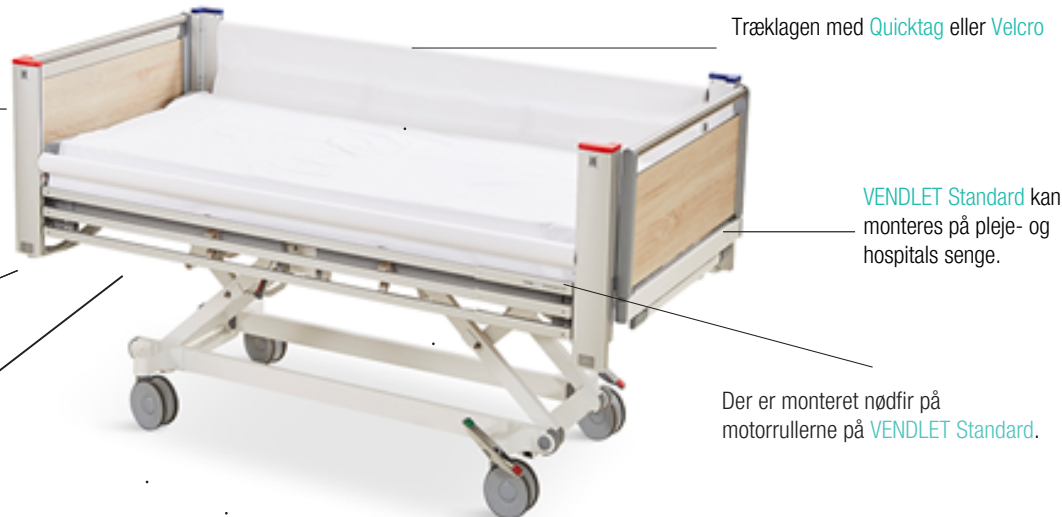

Trækklagen med Quicktag eller Velcro

VENDLET Standard kan monteres på pleje- og hospitalsenge.

Der er monteret nødfir på motorrullerne på VENDLET Standard.

#### Tekniske specifikationer

Model	VENDLET Standard HMI nr. 126639, Varenr. 6300000 / VENDLET Standard, med Velcro HMI nr. 144115, Varenr. 6300003
Maks. brugervægt	Max. 250 kg
Egenvægt	42 kg
Længde	200 - 220 cm, der er længdejusterbare sider
Bredde	7,5 cm på hver side af sengen
Antal hastigheder	3
Maskinvaskbart	Ja

VENDLET Standard-produktblad-DK-01-202502