



RiseAtlas450M™ met QuickTrolleySystem, high humidity SystemRoMedic™

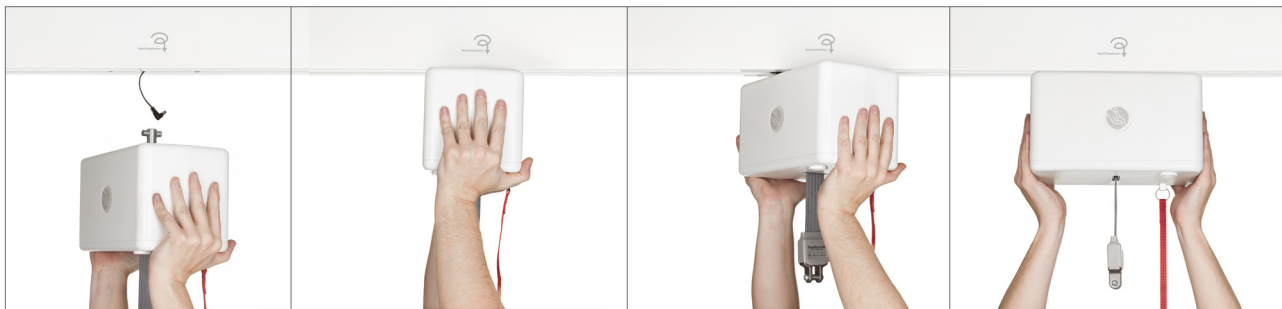

QuickTrolleySystem vereenvoudigt zowel de montage als het neerhalen van de plafondliftmotor van de rail. QuickTrolleySystem maakt het ook mogelijk om de plafondliftmotor te verplaatsen tussen verschillende railsystemen en verschillende kamers, wat zorgt voor een hoger gebruik en meer kosteneffectiviteit.

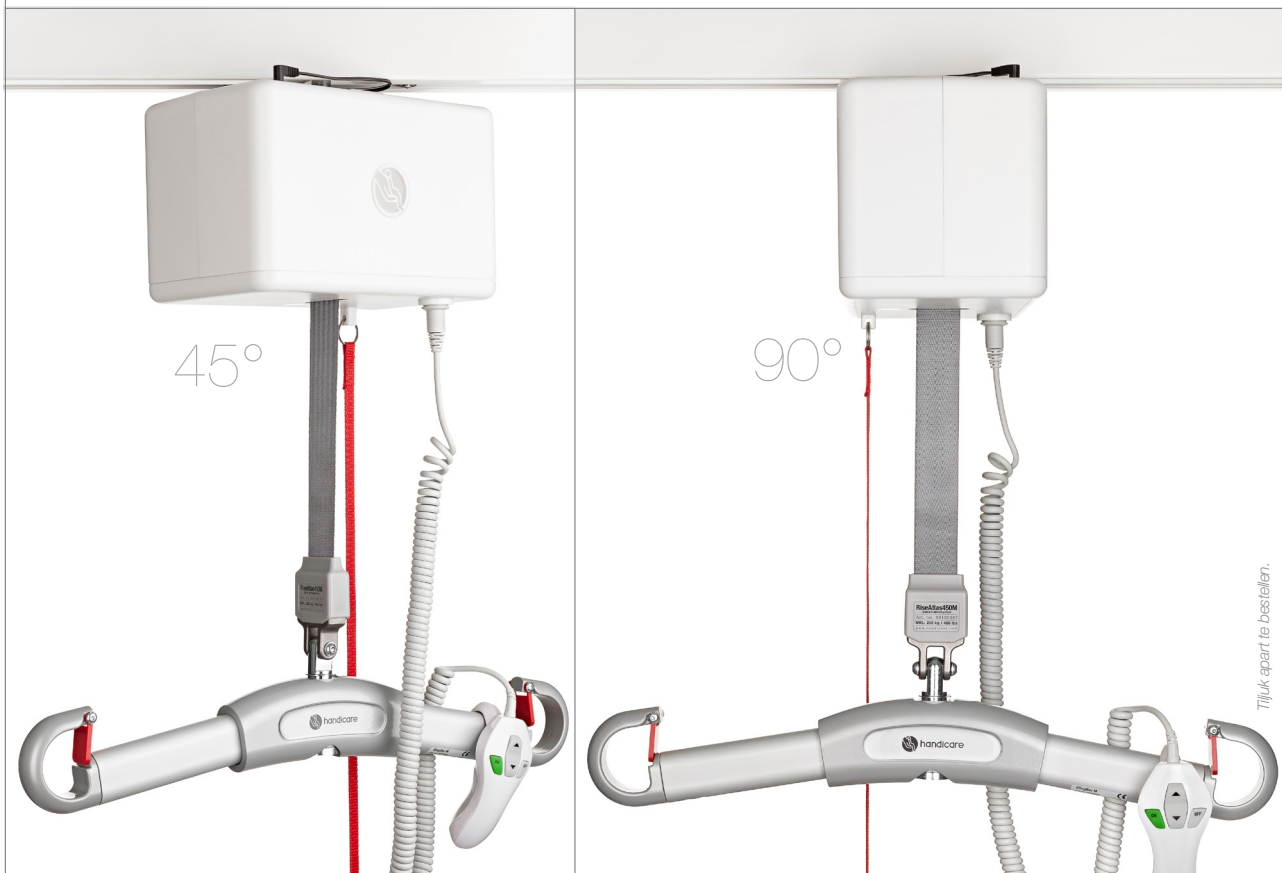

Met het QuickTrolleySystem kunnen de plafondliftmotor en de tilriem gemakkelijk ingesteld worden in een hoek van 45 of 90° ten opzichte van de rail, voor eenvoudige en soepele verplaatsingen van gebruikers van de ene kamer naar de andere.

Tilriem apart te bestellen.

Speciale versie voor vochtige omgevingen voor gebruikers met een gewicht van maximaal 205 kg

- SWL 205 kg
- Handmatige verplaatsing langs rail:
- Speciale versie voor gebruik in omgevingen waar vocht en vloeistof voorkomen
- Modern, elegant en hygiënisch design
- Ongebruikelijk kleine afmetingen en een ontzettend laag gewicht
- Voor alle railsystemen, in alle omgevingen en in alle kamertypes
- Groot tilbereik biedt de mogelijkheid voor zowel zeer laag als zeer hoog tillen
- Voor alle situaties, gebruikers en behoeften
- Het unieke SystemRoMedic™ QuickTrolleySystem van Handicare zorgt voor verhoogde flexibiliteit, veelzijdigheid en meer gemak
- Zeer eenvoudig te gebruiken, zorgt voor veilige arbeidsomstandigheden en stelt de zorgverlener in staat om tijdens het hele tilproces in de buurt van de gebruiker te blijven
- Stille, zachte bewegingen en zachte start en stop
- Ergonomische en gebruiksvriendelijke handbediening
- De Aan- en Uitknoppen op de handbediening voorkomen onbedoeld gebruik van de functies van de plafondliftmotor
- Handmatige noodstop
- Elektrische en handmatige nooddaalfunctie
- Overbelastingsbescherming
- Valbescherming
- De motor stopt automatisch als de tilriem niet belast is
- Nachtverlichting
- Effectieve geleiding van de tilriem voorkomt onbedoeld draaien van de tilriem
- Milieuvriendelijke NiMH-batterij met hoge capaciteit
- Unieke laadoplossing met loopwagen voor twee alternatieve oplaadmethode (via de rail/het uiteinde)
- Discreet informatiepaneel
- Onderhoudsvriendelijk
- Diagnostiek: speciale software is beschikbaar als extra optie waarmee u met behulp van een pc toegang kunt krijgen tot uitgebreide informatie over de plafondliftmotor
- Veel accessoires voor veilig, eenvoudig en individueel aangepast tillen van gebruikers in de meeste verplaatsingssituaties

RiseAtlas450M™ met QuickTrolleySystem, high humidity

Voor professionele en zeer functionele zorgomgevingen met een harmonische en menselijke sfeer.



Ergonomische en gebruiksvriendelijke handbediening



PRODUCTSPECIFICATIE

Art.nr. **Product**
50100051 ___ RiseAtlas450M, met QuickTrolleySystem, high humidity

RiseAtlas450M met QuickTrolleySystem, high humidity, wordt geleverd met handbediening en oplader. Tijlук apart te bestellen.

ACCESSOIRES

Art.nr.	Product	Beschrijving
70200046	QuickTrolley450	Loopwagen met snelkoppeling
70200051	QuickTrolley450 70 mm	Loopwagen met snelkoppeling, verlaagt de plafondliftmotor met 70 mm
70200075	QuickTrolleyUniversal 360	Trolley met snelle ontgrendeling, draait 360 graden
70200048	Software for diagnostics	Software voor diagnostiek
50400066	Cover to charger	Behuizing voor oplader, voor alle modellen en speciale versies van RiseAtlas
50400048	Parking Placard	Parkeerbord, voor het gemakkelijk bewaren van tijlукken, handleidingen en tilbanden
50400332	Parking Placard BariBar	Voor het gemakkelijk opslaan van BariBar en tilbanden
70200071	SlingBar XS	Tijlук, 250 mm
70200001	SlingBar S	Tijlук, 350 mm
70200002	SlingBar M	Tijlук, 450 mm
70200003	SlingBar L	Tijlук, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Zijbeugels voor SlingBar XS/S/M/L
70200072	BariBar	Vierpunts tijlук voor plafondliften, max. belasting 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Vierpunts tijlук, max. belasting 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Verlengbanden, 6 lengtes: 370-970 mm

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale belasting: _____ 205 kg
 Materiaal, chassis: _____ Aluminium
 Materiaal, behuizing: _____ Vlambestendig ABS-plastic
 Afmetingen, lengte x breedte x hoogte: _____ 266 x 151 x 156 mm
 Gewicht: _____ 7,3 kg
 Verplaatsing langs rail: _____ Handmatig
 Handbediening: _____ Elektrisch, 4 knoppen
 Tilinterval: _____ 2400 mm
 Tilnelheid, zonder belasting: _____ 50 mm per sek
 Tilnelheid, met belasting: _____ 39 mm per sek
 Geluidsniveau, met belasting: _____ 55 dB(A)
 Effectieve geleiding van tilriem: _____ Standaard
 Nooddaalfunctie: _____ Elektrisch en handmatig
 Noodstop: _____ Handmatig
 Nachtverlichting: _____ Standaard
 Batterij: _____ NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh
 Opladen via handbediening: _____ Nee
 Opladen via rail: _____ Naar keuze, standaard
 Opladen via uiteinde: _____ Naar keuze, standaard
 Beschermingsklasse, liftmotor: _____ IPX4
 Beschermingsklasse, handbediening: _____ IPX4



RiseAtlas450M met QuickTrolleySystem, hoge luchtvochtigheid, voldoet aan de vereisten voor klasse 1-producten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

Ga naar www.handicare.com voor meer informatie.

SystemRoMedic™ is een totaaloplossing voor eenvoudige transfers. Het concept bevat producten voor vier categorieën transfers die voorzien in de meeste behoeften en transfersituaties.

Transfers, tussen twee locaties verplaatsen. **Positioneren**, op dezelfde locatie herpositioneren.

Begeleiden, bij het mobiliseren. **Tillen**, manueel en mechanisch.



handicare

Handicare
 Weteringweg 5-9
 2641 KM Pijnacker
 Tel: 015 - 369 54 40
 Fax: 015 - 369 71 64
www.handicare.com
 info.LS@handicare.com