



# RiseAtlas625M™ met QuickTrolleySystem

## SystemRoMedic™

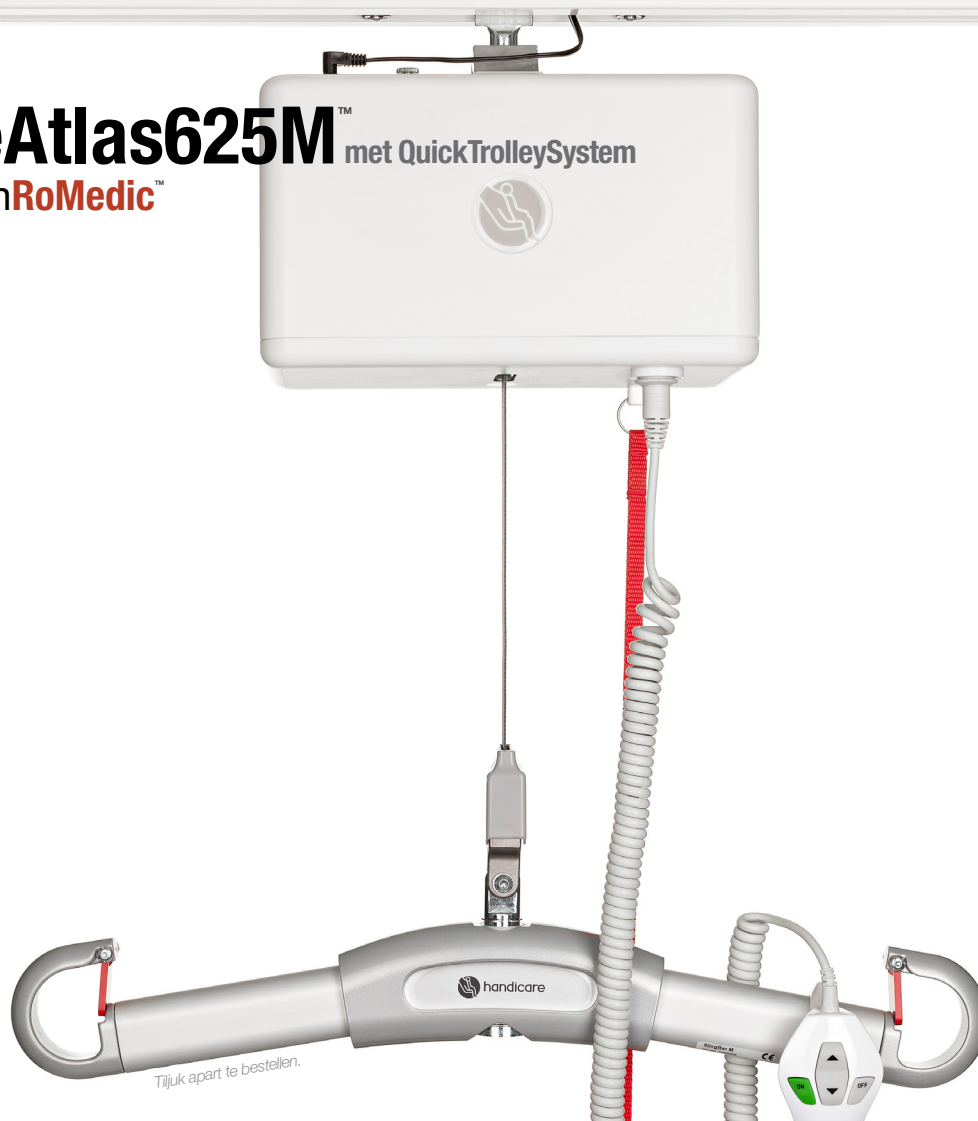

Tiljuk apart te bestellen.

QuickTrolleySystem vereenvoudigt zowel de montage als het neerhalen van de plafondliftmotor van de rail. QuickTrolleySystem maakt het ook mogelijk om de plafondliftmotor te verplaatsen tussen verschillende railsystemen en verschillende kamers, wat zorgt voor een hoger gebruik en meer kosteneffectiviteit.

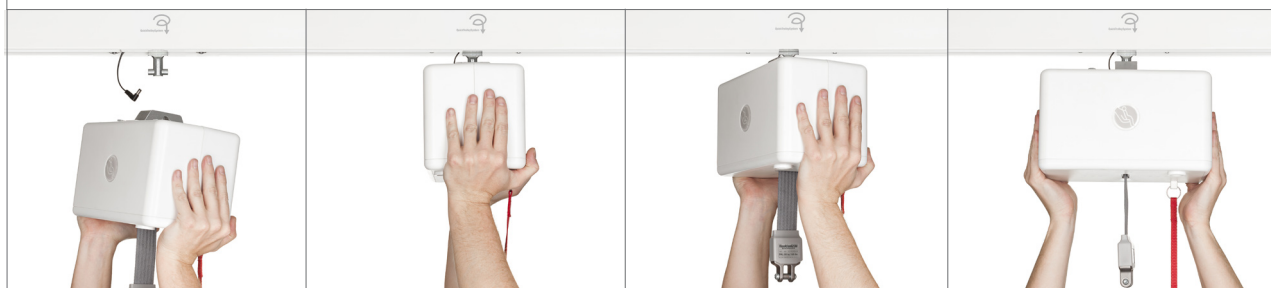

Wanneer RiseAtlas625M met QuickTrolleySystem gebruikt wordt in combinatie met QuickTrolley625-90, een loopwagen met snelkoppeling die verkrijgbaar is als accessoire, kunnen de plafondliftmotor en de tilband gemakkelijk ingesteld worden in een hoek van 90° ten opzichte van de rail, voor eenvoudige en soepele verplaatsingen van gebruikers van de ene kamer naar de andere.

## Onbeperkte tiloplossingen voor gebruikers met een gewicht van maximaal 285 kg

- SWL 285 kg
- Handmatige verplaatsing langs rail
- Modern, elegant en hygiënisch design
- Ongebruikelijk kleine afmetingen en een ontzettend laag gewicht
- Voor alle railsystemen, in alle omgevingen en in alle kamertypes
- Groot tilbereik biedt de mogelijkheid voor zowel zeer laag als zeer hoog tillen
- Voor alle situaties, gebruikers en behoeften
- Het unieke SystemRoMedic™ QuickTrolleySystem van Handicare zorgt voor verhoogde flexibiliteit, veelzijdigheid en meer gemak
- Zeer eenvoudig te gebruiken, zorgt voor veilige arbeidsomstandigheden en stelt de zorgverlener in staat om tijdens het hele tilproces in de buurt van de gebruiker te blijven
- Stille, zachte bewegingen en zachte start en stop
- Ergonomische en gebruiksvriendelijke handbediening
- De Aan- en Uitknoppen op de handbediening voorkomen onbedoeld gebruik van de functies van de plafondliftmotor
- Handmatige noodstop
- Elektrische en handmatige nooddaalfunctie
- Overbelastingsbescherming
- Valbescherming
- De motor stopt automatisch als de tilriem niet belast is

- Nachtverlichting
- Effectieve geleiding van de tilriem voorkomt onbedoeld draaien van de tilriem
- Milieuvriendelijke NiMH-batterij met hoge capaciteit
- Eenvoudig en handig opladen via handbediening
- Een unieke laadoplossing met een loopwagen voor twee alternatieve oplaadmethoden (via de rails/het uiteinde) is beschikbaar als extra optie
- Discreet informatiepaneel
- Onderhoudsvriendelijk
- Diagnostiek: speciale software is beschikbaar als extra optie waarmee u met behulp van een pc toegang kunt krijgen tot uitgebreide informatie over de plafondliftmotor
- Veel accessoires voor veilig, eenvoudig en individueel aangepast tillen van gebruikers in de meeste verplaatsingssituaties

# RiseAtlas625M™ met QuickTrolleySystem

Voor professionele en zeer functionele zorgomgevingen met een harmonische en menselijke sfeer

## Standaard eenvoudig en handig opladen via handbediening

Het laadstation voor de motor van de plafondlift is geïntegreerd in een kleine, discrete houder voor de handbediening. Het laadstation wordt aan de wand bevestigd, in de buurt van de parkeerplaats van de plafondliftmotor.



## PRODUCTSPECIFICATIE

**Art.nr.**      **Product**  
50100059 — RiseAtlas625M, met QuickTrolleySystem

RiseAtlas625M met QuickTrolleySystem wordt geleverd met handbediening en oplader. Tijk apart te bestellen.

## ACCESSOIRES

Art.nr.	Product	Beschrijving
70200075	QuickTrolleyUniversal 360	Trolley met snelle ontgrendeling, draait 360 graden
70200062	In-rail/end point charging	Opladen via rail/opladen via uiteinde
70200065	IR remote controlling	Voor draadloos manoeuvreren
70200047	9V battery and cable	Batterij en kabel, voor nooddaalfunctie
70200048	Software for diagnostics	Software voor diagnostiek
50400066	Cover to charger	Behuizing voor oplader, voor alle modellen en speciale versies van RiseAtlas
50400048	Parking Placard	Parkeerbord, voor het gemakkelijk bewaren van tijkken, handleidingen en tilbanden
50400332	Parking Placard BariBar	Voor het gemakkelijk opslaan van BariBar en tilbanden
70200071	SlingBar XS	Tijk, 250 mm
70200001	SlingBar S	Tijk, 350 mm
70200002	SlingBar M	Tijk, 450 mm
70200003	SlingBar L	Tijk, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Zijbeugels voor SlingBar XS/S/M/L
70200072	BariBar	Vierpunts tijk voor plafondliften, max. belasting 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Vierpunts tijk, max. belasting 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Verlengbanden, 6 lengtes: 370-970 mm

## TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale belasting: \_\_\_\_\_ 285 kg  
 Materiaal, chassis: \_\_\_\_\_ Aluminium  
 Materiaal, behuizing: \_\_\_\_\_ Vlambestendig ABS-plastic  
 Afmetingen, lengte x breedte x hoogte: \_\_\_\_\_ 266 x 151 x 156 mm  
 Gewicht: \_\_\_\_\_ 7,3 kg  
 Verplaatsing langs rail: \_\_\_\_\_ Handmatig  
 Handbediening: \_\_\_\_\_ Elektrisch, 4 knoppen  
 Tilinterval: \_\_\_\_\_ 2400 mm  
 Tilnelheid, zonder belasting: \_\_\_\_\_ 50 mm / sec  
 Tilnelheid, met belasting: \_\_\_\_\_ 39 mm / sec  
 Geluidsniveau, met belasting: \_\_\_\_\_ 55 dB(A)  
 Effectieve geleiding van tiliem: \_\_\_\_\_ Standaard  
 Nooddaalfunctie: \_\_\_\_\_ Elektrisch en handmatig  
 Noodstop: \_\_\_\_\_ Handmatig  
 Nachtverlichting: \_\_\_\_\_ Standaard  
 Batterij: \_\_\_\_\_ NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh  
 Opladen via handbediening: \_\_\_\_\_ Standaard  
 Opladen via rail: \_\_\_\_\_ Naar keuze, accessoire  
 Opladen via uiteinde: \_\_\_\_\_ Naar keuze, accessoire  
 Beschermingsklasse, liftmotor: \_\_\_\_\_ IP20  
 Beschermingsklasse, handbediening: \_\_\_\_\_ IPX4



**CE** RiseAtlas625M met QuickTrolleySystem voldoet aan de vereisten voor klasse 1-producten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

Ga naar [www.handicare.com](http://www.handicare.com) voor meer informatie.



**Handicare**  
 Weteringweg 5-9  
 2641 KM Pijnacker  
 Tel: 015 - 369 54 40  
 Fax: 015 - 369 71 64  
[www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
[info.LS@handicare.com](mailto:info.LS@handicare.com)

SystemRoMedic™ is een totaaloplossing voor eenvoudige transfers. Het concept bevat producten voor vier categorieën transfers die voorzien in de meeste behoeften en transfersituaties.

**Transfers**, tussen twee locaties verplaatsen. **Positioneren**, op dezelfde locatie herpositioneren.

**Begeleiden**, bij het mobiliseren. **Tillen**, manueel en mechanisch.