



# RiseAtlas625M™ med QuickTrolleySystem SystemRoMedic™

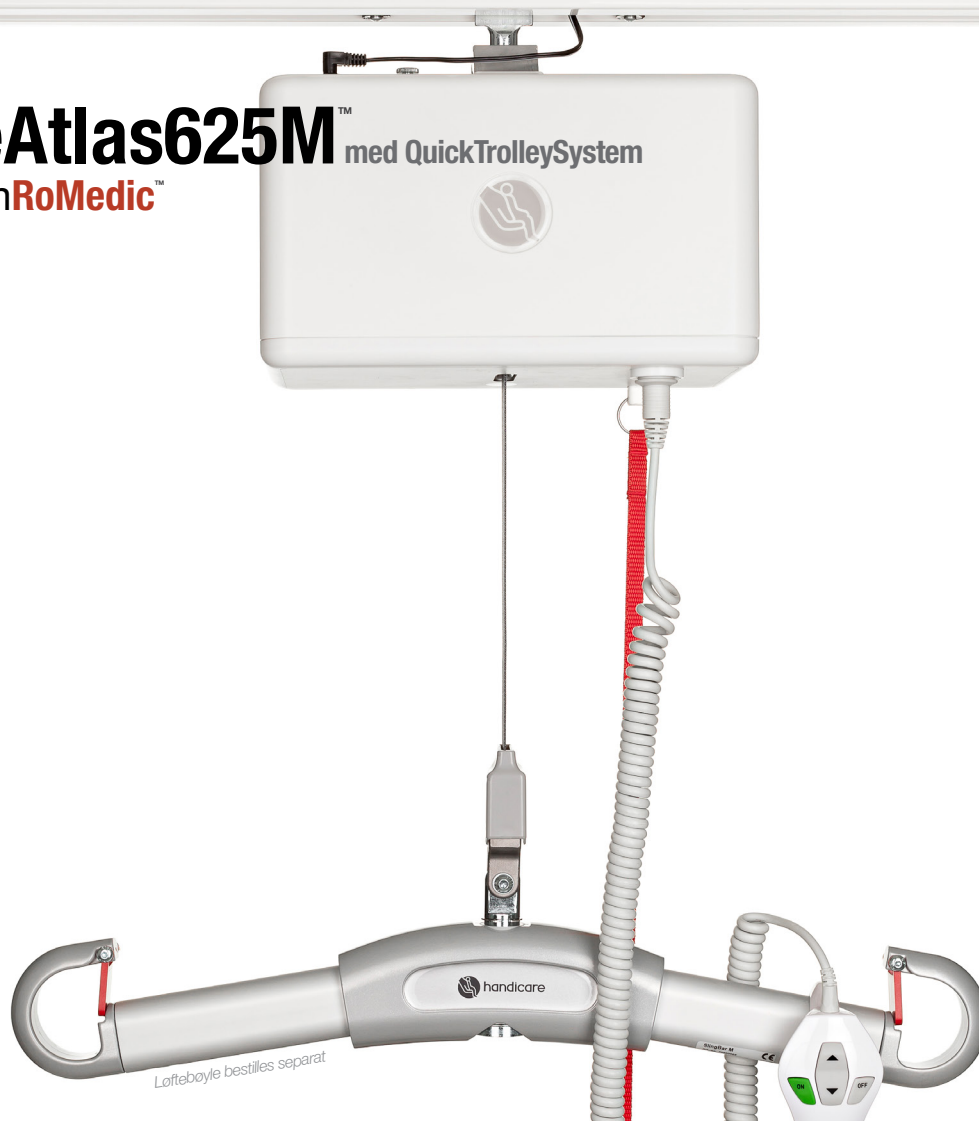

QuickTrolleySystem forenkler både montering og demontering av takheismotoren i skinnen. QuickTrolleySystem gjør det også mulig å flytte takheismotoren mellom ulike skinner i ulike rom, hvilket gir økt utnyttelse og kostnadseffektivitet.

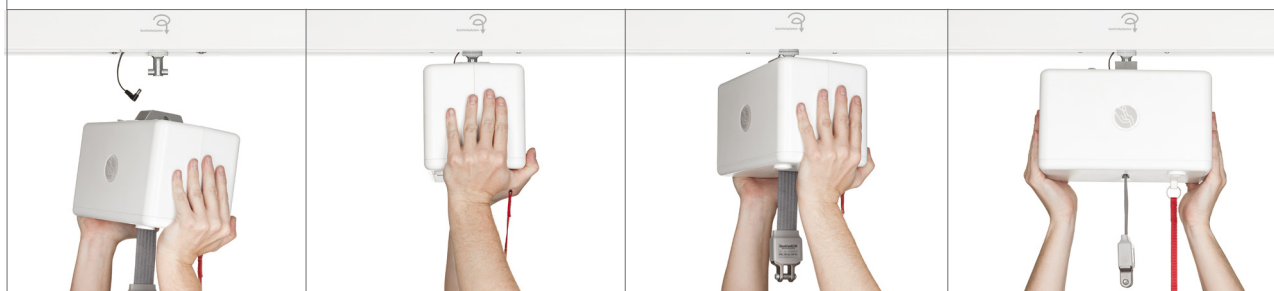

Når RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem benyttes sammen med QuickTrolley625-90, en hurtigkoble kjørevogn som finnes som tilbehør, kan takheismotoren og løftebåndet enkelt stilles inn på 90 graders vinkel på skinnen for enkle og smidige forflytninger av brukere fra et rom til et annet.

## Ubegrensede løfteløsninger - for brukere som veier opp til 285 kg

- Maks brukervekt 285 kg
- Manuell fremdrift langs skinnen
- Moderne, elegant og hygienisk design
- Oppsiktsvekkende liten og ekstremt lav vekt
- For alle skinner i alle miljøer og i alle typer rom
- Gir stort løfteområde og mulighet for meget lave og høye løft
- For alle situasjoner, brukere og behov
- Handicares unike SystemRoMedic™ QuickTrolleySystem gir økt fleksibilitet, allsidighet og bekvemmelighet
- Meget enkel å bruke, gir sikre arbeidsforhold og gjør det mulig for medhjelperen å være nær brukeren under hele løfteprosedyren
- Stillestående, myke bevegelser samt myk start og stopp
- Ergonomisk og brukervennlig håndkontroll
- På- og Av-knappene på håndkontrollen forebygger uregelmessig bruk av takheismotorens funksjoner
- Manuell nødstop
- Elektrisk og manuell nødsenk
- Overbelastningssensor med varsel
- Fallvern
- Motoren stanser automatisk hvis løftebåndet ikke belastes
- Nattlys
- Effektiv styring av løftebåndet forhindrer unødvendig tvinning av løftebåndet
- Miljøvennlig NiMH-batterier med høy kapasitet
- Enkel og bekvem lading via håndkontrollen
- En unik ladeløsning med en kjøremotor for to alternative lademetoder (skinnelading/endelading) finnes som tilbehør
- Diskret informasjonspanel
- Servicevennlig
- Diagnostikk; en spesiell software finnes som tilbehør og gjør det mulig, via en PC, å få tilgang til ytterligere informasjon om takheismotoren
- Mange tilbehør for sikre, enkle og individuelt tilpassede løft av brukere i de aller fleste forflytningssituasjoner

## RiseAtlas625M™ med QuickTrolleySystem

For profesjonelle og meget funksjonelle omsorgsmiljøer med en harmonisk og menneskelig atmosfære.

### Enkel og bekvem lading via håndkontrollen er standard

Ladestasjonen for takheismotoren er integrert i en liten, diskret holder og oppbevaringsplass for håndkontrollen. Holderen med ladestasjon monteres enkelt på veggen, i nærheten av takheisens ladestasjon.



### PRODUKTPESIFIKASJONER

**Art. nr.**      **Produkt**  
50100059 \_\_\_ RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem

RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem leveres med håndkontroll og lader. Løftebøyle bestilles separat.

### TILBEHØR

| Art. nr. | Produkt                    | Beskrivelse  |
|----------|----------------------------|--|
| 70200075 | QuickTrolleyUniversal 360  | Hjulsett med hurtigkobling, vridbar 360 grader                               |
| 70200062 | In-rail/end point charging | Skinnelading/endelading  |
| 70200065 | IR remote controlling      | For trådløs betjening  |
| 70200047 | 9V battery and cable       | Batteri og kabel for nødsenk   |
| 70200048 | Software for diagnostics   | Software for diagnostikk   |
| 50400066 | Cover to charger           | Deksel for lader, til alle modeller og spesialversjoner av RiseAtlas         |
| 50400048 | Parking Placard            | Parkeringstavle for bekvem oppbevaring av løftebøyer, manualer og løfteseler |
| 50400332 | Parking Placard BariBar    | Parkeringstavle for oppbevaring av BariBar og løftesel.                      |
| 70200071 | SlingBar XS                | Løftebøyle, 250 mm   |
| 70200001 | SlingBar S                 | Løftebøyle, 350 mm   |
| 70200002 | SlingBar M                 | Løftebøyle, 450 mm   |
| 70200003 | SlingBar L                 | Løftebøyle, 600 mm   |
| 70200042 | SlingBarSpreader M         | Sidebøyer for SlingBar XS/S/M/L  |
| 70200072 | BariBar                    | Firepunkts løftebøyle for takheismotor SWL 454 kg                            |
| 70200017 | Sling bar RFL X4           | Firepunkts løftebøyle SWL 300 kg   |
| 70200053 |                            |  |
| 70200058 | Lift strap extension       | Forlengelsesbånd, 6 lengder: 370 – 970 mm                                    |

### TEKNISK INFORMASJON

Maks brukervekt: \_\_\_\_\_ 285 kg  
Materiale, chassis: \_\_\_\_\_ Aluminium  
Materiale, deksel: \_\_\_\_\_ Brannhemmende ABS-plast  
Fysisk utvendige mål, lengde x bredde x høyde: \_\_\_\_\_ 266 x 151 x 156 mm  
Egenvekt: \_\_\_\_\_ 7,3 kg  
Fremdrift i skinnene: \_\_\_\_\_ Manuell  
Håndkontroll: \_\_\_\_\_ Elektrisk, 4 knapper  
Løftehøyde: \_\_\_\_\_ 2400 mm  
Løftehastighet, uten vekt: \_\_\_\_\_ 50 mm per sek  
Løftehastighet, med vekt: \_\_\_\_\_ 39 mm per sek  
Lydnivå, med vekt: \_\_\_\_\_ 55 dB(A)  
Effektiv styring av løftebånd: \_\_\_\_\_ Standard  
Nødsenk: \_\_\_\_\_ Elektrisk og manuell  
Nødstop: \_\_\_\_\_ Manuell  
Nattlys: \_\_\_\_\_ Standard  
Batteri: \_\_\_\_\_ NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh  
Håndkontrollslading: \_\_\_\_\_ Standard  
Konstant skinnelading: \_\_\_\_\_ Valgfritt, tilbehør  
Ladestasjon i skinne: \_\_\_\_\_ Valgfritt, tilbehør  
IP-klasse, løftemotor: \_\_\_\_\_ IP20  
IP-klasse, håndkontroll: \_\_\_\_\_ IPX4



**CE** RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem oppfyller kravene til medisinsk utstyr, klasse 1-produkter 93/42/EEC.

Besøk [www.handicare.se](http://www.handicare.se) for mer informasjon.

SystemRoMedic™ er en helhetsløsning for enkle forflytninger. I konseptet inngår det fire produktområder som dekker de aller fleste behov i ulike forflytningssituasjoner.

**Overflytting**, mellom to enheter. **Posisjonering**, innenfor samme enhet.

**Støtte**, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.



## handicare

Handicare AS  
Vålerveien 159, 1599 Moss  
Postboks 163, 1501 Moss  
Telefon: +47 03250  
Telefaks: +47 85 02 88 22  
[www.handicare.no](http://www.handicare.no)  
[post@handicare.no](mailto:post@handicare.no)