


# RiseAtlas625T™

SystemRoMedic™

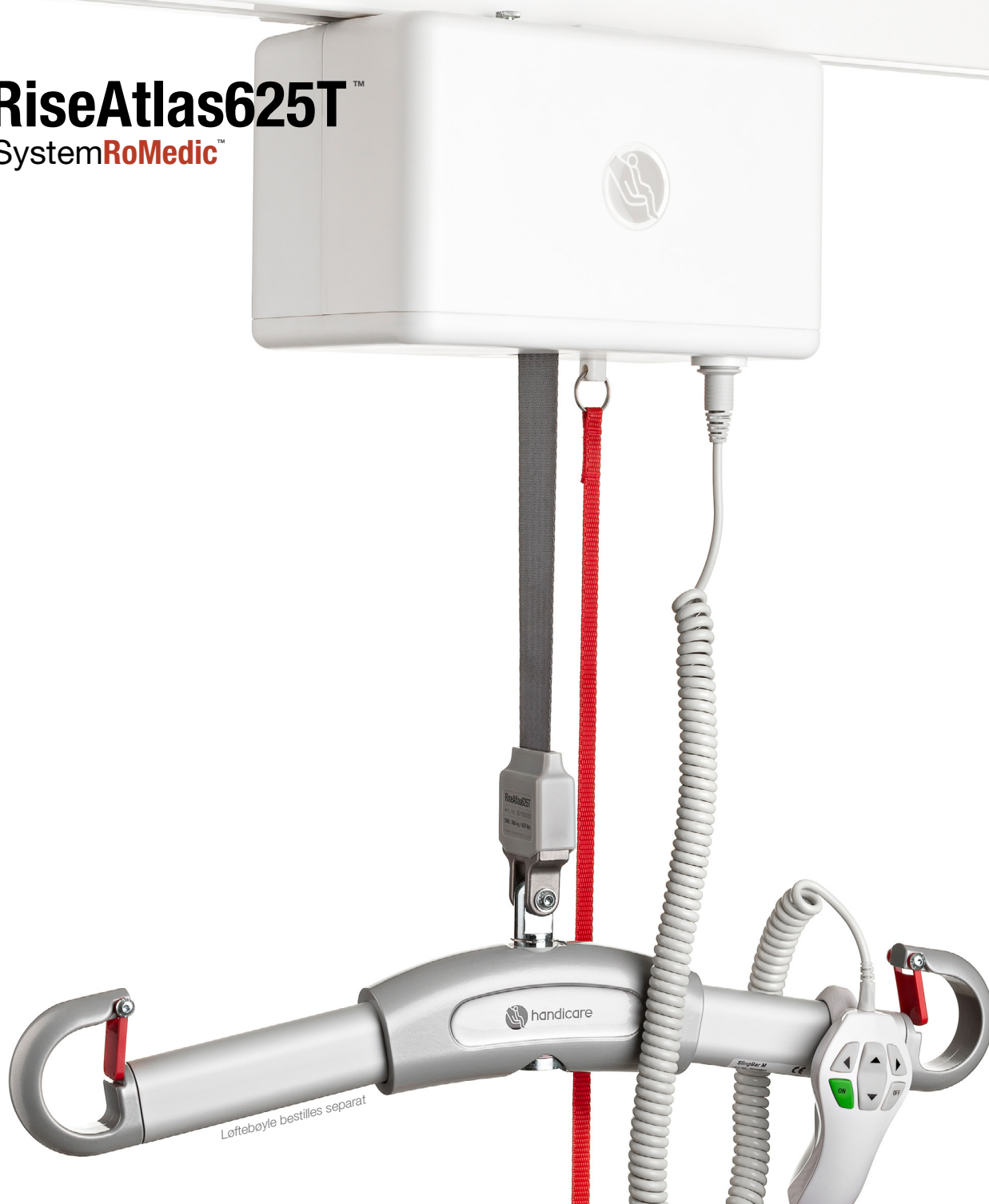

## Obegränsade lyftlösningar - för brukare som väger upp till 285 kg

- Maks brukervekt 285 kg
- Kjøremotor for fremdrift i skinnen
- Moderne, elegant og hygienisk design
- Oppsiktsvekkende liten og ekstremt lav vekt
- For alle skinner-systemer, i alle miljøer og i alle typer rom
- Gir stort løfteområde og mulighet for meget lave og høye løft
- For alle situasjoner, brukere og behov
- Meget enkel å bruke, gir sikre arbeidsforhold og gjør det mulig for medhjelpere å være nær brukeren under hele løfteprosedyren
- Stillestående, myke bevegelser samt myk start og stopp
- Ergonomisk og brukervennlig håndkontroll
- På- og Av-knappene på håndkontrollen forebygger uregelmessig bruk av takheismotorens funksjoner
- Manuell nødstop
- Elektrisk og manuell nødsenk
- Overbelastningssensor med varsel
- Fallvern
- Motoren stanser automatisk hvis løftebåndet ikke belastes
- Nattlys
- Effektiv styring av løftebåndet forhindrer unødvendig tvinning av løftebåndet
- Miljøvennlig NiMH-batterier med høy kapasitet
- Enkel og bekvem lading via håndkontrollen
- En unik ladeløsning med en kjøremotor for to alternative lademetoder (skinnelading/endelading) finnes som tilbehør
- Diskret informasjonspanel
- Servicevennlig
- Diagnostikk; en spesiell software finnes som tilbehør og gjør det mulig, via en PC, å få tilgang til ytterligere informasjon om takheismotoren
- Mange tilbehør for sikre, enkle og individuelt tilpassede løft av brukere i de aller fleste forflytningssituasjoner

# RiseAtlas625T™

For profesjonelle og meget funksjonelle omsorgsmiljøer med en harmonisk og menneskelig atmosfære.



### Enkel og bekvem lading via håndkontrollen er standard

Ladestasjonen for takheismotoren er integrert i en liten, diskret holder og oppbevaringsplass for håndkontrollen. Holderen med ladestasjon monteres enkelt på veggen, i nærheten av takheisens ladestasjon.



## PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Art. nr.      Produkt  
50100060\_\_ RiseAtlas625T

RiseAtlas625T leveres utrustet med handkontroll og laddare.  
Liftbygel bestilles separat.

## TILBEHØR

Art. nr.	Produkt	Beskrivelse
70200062	In-rail/end point charging	Skinnelading/endelading
70200047	9V battery and cable	Batteri og kabel, for nødssenk
70200048	Software for diagnostics	Software for diagnostikk
50400066	Cover to charger	Deksel for lader, for alle modeller og spesialversjoner av RiseAtlas
50400048	Parking Placard	Parkeringstavle for bekvem oppbevaring av løftebøyler, manualer og løfteseler
50400332	Parking Placard BariBar	Parkeringstavle for oppbevaring av BariBar og løfteseil.
70200071	SlingBar XS	Løftebøyle, 250 mm
70200001	SlingBar S	Løftebøyle, 350 mm
70200002	SlingBar M	Løftebøyle, 450 mm
70200003	SlingBar L	Løftebøyle, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Sidebøyler for SlingBar XS/S/M/L
70200072	BariBar	Firepunkts løftebøyle for takheismotor SWL 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Firepunkts løftebøyle SWL 300 kg
70200053		
70200058	Lift strap extension	Forlengelsesbånd, 6 lengder: 370 – 970 mm

## TEKNISK INFORMASJON

Maks brukervekt: \_\_\_\_\_ 285 kg  
Materiale, chassis: \_\_\_\_\_ Aluminium  
Materiale, deksel: \_\_\_\_\_ Brannhemmende ABS-plast  
Fysisk utvendige mål, lengde x bredde x høyde: \_\_\_\_\_ 266 x 151 x 156 mm  
Egervekt: \_\_\_\_\_ 7,5 kg  
Fremdrift i skinnene: \_\_\_\_\_ Kjøremotor  
Hastighet ved forflytning langs skinnen, uten vekt: \_\_\_\_\_ 140 mm per sek  
Hastighet ved forflytning langs skinnen, med vekt: \_\_\_\_\_ 120 mm per sek  
Håndkontroll: \_\_\_\_\_ Elektrisk, 6 knapper  
Løftehøyde: \_\_\_\_\_ 2400 mm  
Løftehastighet, uten vekt: \_\_\_\_\_ 50 mm per sek  
Løftehastighet, med vekt: \_\_\_\_\_ 39 mm per sek  
Lydnivå, med vekt: \_\_\_\_\_ 55 dB(A)  
Effektiv styring av løftebånd: \_\_\_\_\_ Standard  
Nødssenk: \_\_\_\_\_ Elektrisk og manuell  
Nødstop: \_\_\_\_\_ Manuell  
Nattlys: \_\_\_\_\_ Standard  
Batteri: \_\_\_\_\_ NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh  
Håndkontrollslading: \_\_\_\_\_ Standard  
Konstant skinnelading: \_\_\_\_\_ Valgfritt, tilbehør  
Ladestasjon i skinne: \_\_\_\_\_ Valgfritt, tilbehør  
IP-klasse, løftemotor: \_\_\_\_\_ IP20  
IP-klasse, håndkontroll: \_\_\_\_\_ IPX4



**CE** RiseAtlas625T oppfyller kravene til medisinsk utstyr, klasse 1-produkter 93/42/EEC.

Besøk [www.handicare.no](http://www.handicare.no) for mer informasjon.

SystemRoMedic™ er en helhetsløsning for enkle forflytninger. I konseptet inngår det fire produktområder som dekker de aller fleste behov i ulike forflytningssituasjoner.

**Overflytting**, mellom to enheter. **Posisjonering**, innenfor samme enhet.

**Støtte**, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.



# handicare

Handicare AS  
Vålerveien 159, 1599 Moss  
Postboks 163, 1501 Moss  
Telefon: +47 03250  
Telefaks: +47 85 02 88 22  
[www.handicare.no](http://www.handicare.no)  
[post@handicare.no](mailto:post@handicare.no)