


RiseAtlas625TTM met SmartPark-functie

SystemRoMedicTM

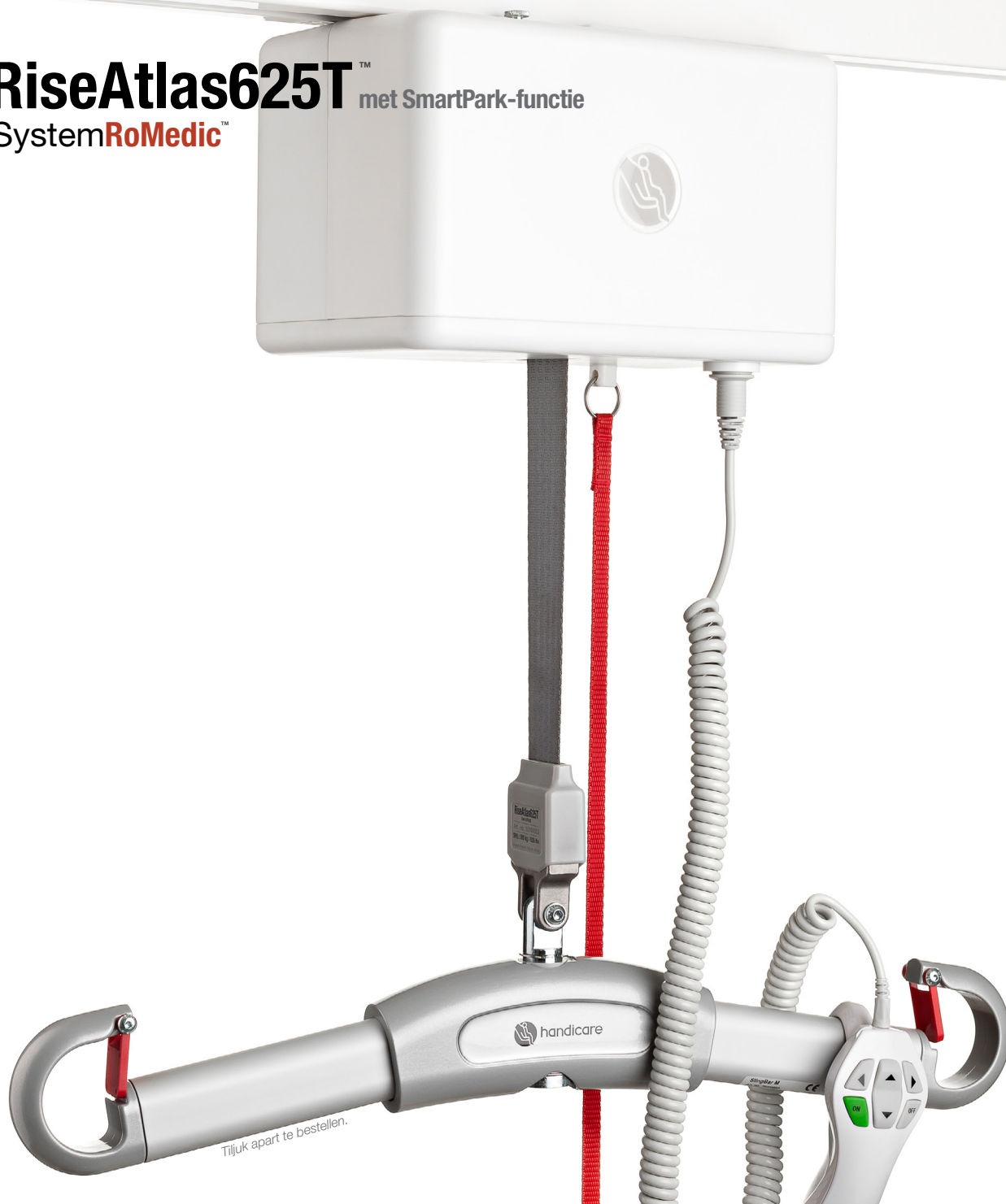

Speciale versie met SmartPark-functie voor gebruikers met een gewicht van maximaal 285 kg

- SWL 285 kg
- Verplaatsingsmotor voor gemotoriseerde verplaatsing langs de rails
- Speciale versie voor gebruik in een railsysteem met opladen via het uiteinde
- Modern, elegant en hygiënisch design
- Ongebruikelijk kleine afmetingen en een ontzettend laag gewicht
- Voor alle railsystemen, in alle omgevingen en in alle kamertypes
- Groot tilbereik biedt de mogelijkheid voor zowel zeer laag als zeer hoog tillen
- Voor alle situaties, gebruikers en behoeften
- Zeer eenvoudig te gebruiken, zorgt voor veilige arbeidsomstandigheden en stelt de zorgverlener in staat om tijdens het hele tilproces in de buurt van de gebruiker te blijven
- Stille, zachte bewegingen en zachte start en stop
- Ergonomische en gebruiksvriendelijke handbediening
- De Aan- en Uitknoppen op de handbediening voorkomen onbedoeld gebruik van de functies van de plafondliftmotor
- Handmatige noodstop
- Elektrische en handmatige nooddaalfunctie
- Overbelastingsbescherming
- Valbescherming
- De motor stopt automatisch als de tilriem niet belast is
- Nachtverlichting
- Effectieve geleiding van de tilriem voorkomt onbedoeld draaien van de tilriem
- Milieuvriendelijke NiMH-batterij met hoge capaciteit
- Unieke laadoplossing met loopwagen voor twee alternatieve oplaadmethoden (via de rail/het uiteinde)
- RiseAtlas625T, met SmartPark-functie wordt geleverd met end point charging als standaard instelling.
- Discreet informatiepaneel
- Onderhoudsvriendelijk
- Diagnostiek: speciale software is beschikbaar als extra optie waarmee u met behulp van een pc toegang kunt krijgen tot uitgebreide informatie over de plafondliftmotor.
- Veel accessoires voor veilig, eenvoudig en individueel aangepast tillen van gebruikers in de meeste verplaatsingssituaties

RiseAtlas625T™ met SmartPark-functie

Voor professionele en zeer functionele zorgomgevingen met een harmonische en menselijke sfeer.



Ergonomische en gebruiksvriendelijke handbediening.



PRODUCTSPECIFICATIE

Art.nr. Product
50100053 RiseAtlas625T, met SmartPark-functie

RiseAtlas625T met SmartPark-functie wordt geleverd met handbediening en oplader. Tijk apart te bestellen

ACCESSOIRES

| Art.nr. | Product | Beschrijving |
|-----------|--------------------------|---|
| 70200047 | 9V battery and cable | Batterij en kabel, voor nooddaalfunctie |
| 70200048 | Software for diagnostics | Software voor diagnostiek |
| 50400066 | Cover to charger | Behuizing voor oplader, voor alle modellen en speciale versies van RiseAtlas |
| 50400048 | Parking Placard | Parkeerbord, voor het gemakkelijk bewaren van tijkken, handleidingen en tilbanden |
| 50400332 | Parking Placard BariBar | Voor het gemakkelijk opslaan van BariBar en tilbanden |
| 70200071 | SlingBar XS | Tijk, 250 mm |
| 70200001 | SlingBar S | Tijk, 350 mm |
| 70200002 | SlingBar M | Tijk, 450 mm |
| 70200003 | SlingBar L | Tijk, 600 mm |
| 70200042 | SlingBarSpreader M | Zijbeugels voor SlingBar XS/S/M/L |
| 70200072 | BariBar | Vierpunts tijk voor plafondliften, max. belasting 454 kg |
| 70200017 | Sling bar RFL X4 | Vierpunts tijk, max. belasting 300 kg |
| 70200053- | | |
| 70200058 | Lift strap extension | Verlengbanden, 6 lengtes: 370-970 mm |

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale belasting: _____ 285 kg
 Materiaal, chassis: _____ Aluminium
 Materiaal, behuizing: _____ Vlambestendig ABS-plastic
 Afmetingen, lengte x breedte x hoogte: _____ 266 x 151 x 156 mm
 Gewicht: _____ 7,5 kg
 Verplaatsing langs rail: _____ Verplaatsingsmotor
 Snelheid bij verplaatsing langs de rail, zonder belasting: _____ 140 mm / sec
 Snelheid bij verplaatsing langs de rail, met belasting: _____ 120 mm / sec
 Handbediening: _____ Elektrisch, 6 knoppen
 Tilinterval: _____ 2400 mm
 Tilnelheid, zonder belasting: _____ 50 mm / sec
 Tilnelheid, met belasting: _____ 39 mm / sec
 Geluidsniveau, met belasting: _____ 55 dB(A)
 Effectieve geleiding van tilriem: _____ Standaard
 Nooddaalfunctie: _____ Elektrisch en handmatig
 Noodstop: _____ Handmatig
 Nachverlichting: _____ Standaard
 Batterij: _____ NIMH 24V 3,2 Ah/768Wh
 Opladen via handbediening: _____ Nee
 Opladen via rail: _____ Nee
 Opladen via uiteinde: _____ Standaard
 Beschermingsklasse, liftmotor: _____ IP20
 Beschermingsklasse, handbediening: _____ IPX4



CE RiseAtlas625T met SmartPark-functie voldoet aan de vereisten voor klasse 1-producten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

Ga naar www.handicare.com voor meer informatie.



handicare

Handicare
 Weteringweg 5-9
 2641 KM Pijnacker
 Tel: 015 - 369 54 40
 Fax: 015 - 369 71 64
www.handicare.com
info.LS@handicare.com

SystemRoMedic™ is een totaaloplossing voor eenvoudige transfers. Het concept bevat producten voor vier categorieën transfers die voorzien in de meeste behoeften en transfersituaties.

Transfers, tussen twee locaties verplaatsen. **Positioneren**, op dezelfde locatie herpositioneren.

Begeleiden, bij het mobiliseren. **Tillen**, manueel en mechanisch.