


# RiseBasic300M™

SystemRoMedic™

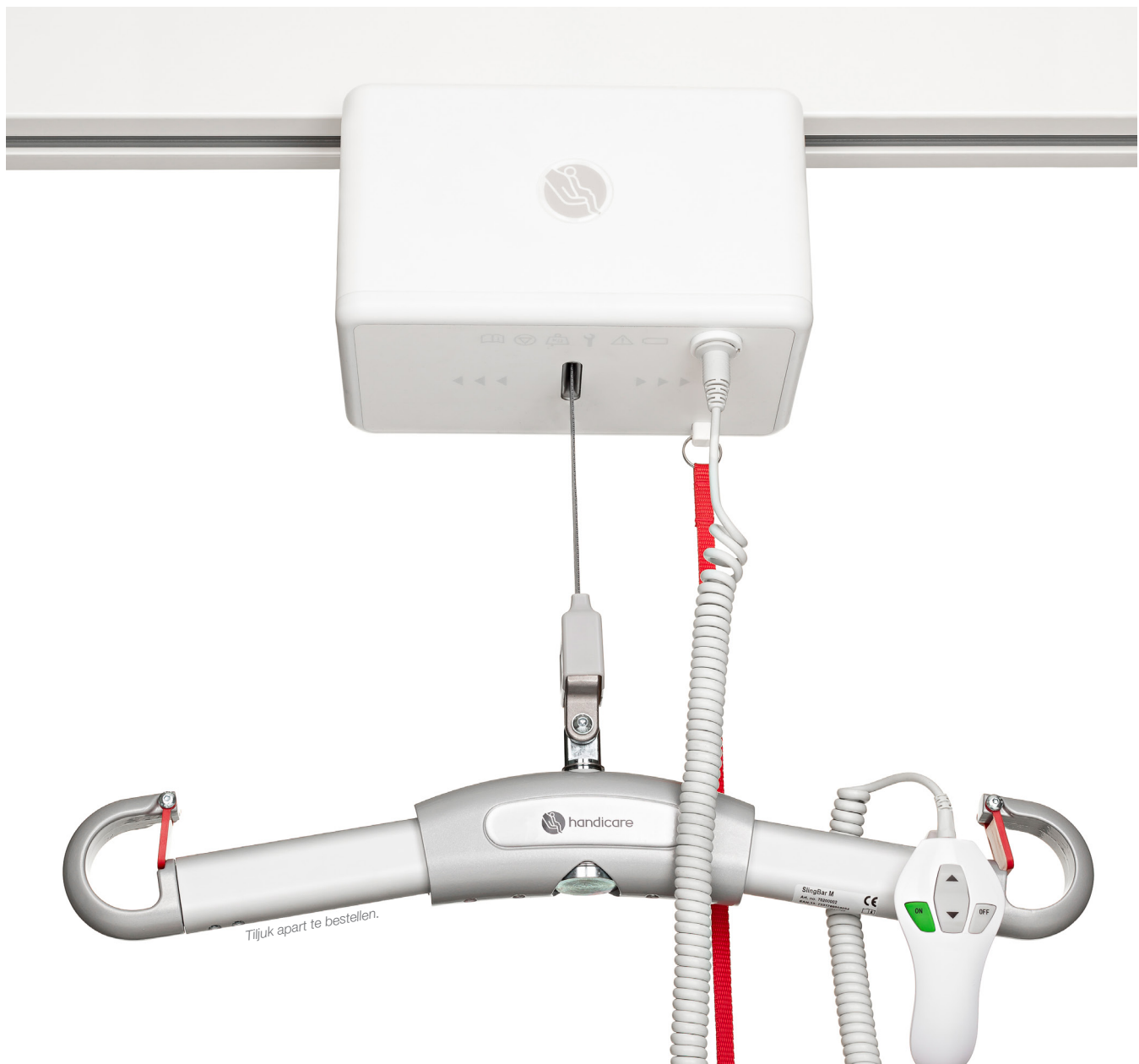

## Bij alle omstandigheden veilig en eenvoudig tillen van gebruikers met een gewicht van maximaal 138 kg

- SWL 138 kg
- Handmatige verplaatsing langs rail
- Modern, elegant en hygiënisch design
- Ongebruikelijk kleine afmetingen en een ontzettend laag gewicht
- Voor alle railsystemen, in alle omgevingen en in alle kamertypes
- Groot tilbereik biedt de mogelijkheid voor zowel zeer laag als zeer hoog tillen
- Voor alle situaties, gebruikers en behoeften
- Zeer eenvoudig te gebruiken, zorgt voor veilige arbeidsomstandigheden en stelt de zorgverlener in staat om tijdens het hele tilproces in de buurt van de gebruiker te blijven
- Stille, zachte bewegingen en zachte start en stop
- Ergonomische en gebruiksvriendelijke handbediening
- De aan- en uitknoppen op de handbediening voorkomen onbedoeld gebruik van de functies van de plafondliftmotor
- Wisselbediening, voor het bedienen van draaitafels in het railsysteem met behulp van de handbediening, leverbaar als accessoire
- Handmatige noodstop
- Elektrische en handmatige nooddaalfunctie
- Overbelastingsbescherming
- Valbescherming
- De motor stopt automatisch als de tilriem niet belast is
- Effectieve geleiding van de tilriem voorkomt onbedoeld draaien van de tilriem
- Batterijen met hoge capaciteit en lange levensduur en energiezuinige elektrische motor
- Eenvoudig en handig opladen via handbediening
- Een unieke laadoplossing met een loopwagen voor twee alternatieve oplaadmethode (via de rails/het uiteinde) is beschikbaar als extra optie
- Discreet informatiepaneel
- Onderhoudsvriendelijk
- Diagnostiek: speciale software is beschikbaar als extra optie waarmee u met behulp van een pc toegang kunt krijgen tot uitgebreide informatie over de plafondliftmotor
- Veel accessoires voor veilig, eenvoudig en individueel aangepast tillen van gebruikers in de meeste verplaatsingssituaties

# RiseBasic300M™

Voor professionele en zeer functionele zorgomgevingen met een harmonische en menselijke sfeer.



### Standaard eenvoudig en handig opladen via handbediening

Het laadstation voor de motor van de plafondlift is geïntegreerd in een kleine, discrete houder voor de handbediening. Het laadstation wordt aan de wand bevestigd, in de buurt van de parkeerplaats van de plafondliftmotor.



## PRODUCTSPECIFICATIE

Art.nr.      Produkt  
50100039    RiseBasic300M

RiseBasic300M wordt geleverd met handbediening en oplader. Tijk apart te bestellen.

## ACCESSOIRES

Art.nr.	Product	Beschrijving
70200075	QuickTrolleyUniversal 360	Trolley met snelle ontgrendeling, draait 360 graden
70200062	In-rail/end point charging	Opladen via rail/opladen via uiteinde
70200066	Switch manoeuvring	Wisselbediening, voor de bediening van draaitafels in het railsysteem met behulp van de handbediening
70200048	Software for diagnostics	Software voor diagnostiek
50400048	Parking Placard	Parkeerbord, voor het gemakkelijk bewaren van tijkken, handleidingen en tilbanden
50400332	Parking Placard BariBar	Voor het gemakkelijk opslaan van BariBar en tilbanden
70200071	SlingBar XS	Tijk, 250 mm
70200001	SlingBar S	Tijk, 350 mm
70200002	SlingBar M	Tijk, 450 mm
70200003	SlingBar L	Tijk, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Zijbeugels voor SlingBar S/M/L
70200072	BariBar	Vierpunts tijk voor plafondliften, max. belasting 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Vierpunts tijk, max. belasting 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Verlengbanden, 6 lengtes: 370-970 mm

## TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale belasting, RiseBasic300M: \_\_\_\_\_ 138 kg  
Materiaal, chassis: \_\_\_\_\_ Aluminium  
Materiaal, behuizing: \_\_\_\_\_ Vlambestendig ABS-plastic  
Afmetingen, lengte x breedte x hoogte: \_\_\_\_\_ 266 x 151 x 156 mm  
Gewicht: \_\_\_\_\_ 6,8 kg  
Verplaatsing langs rail: \_\_\_\_\_ Handmatig  
Handbediening: \_\_\_\_\_ Elektrisch, 4 knoppen  
Tilinterval: \_\_\_\_\_ 2400 mm  
Tilnelheid, zonder belasting: \_\_\_\_\_ 30 mm per seconde  
Tilnelheid, met belasting: \_\_\_\_\_ 20 mm per seconde  
Geluidsniveau, met belasting: \_\_\_\_\_ 51 dB(A)  
Effectieve geleiding van tilriem: \_\_\_\_\_ Standaard  
Nooddaalfunctie: \_\_\_\_\_ Elektrisch en handmatig  
Noodstop: \_\_\_\_\_ Handmatig  
Batterijen: \_\_\_\_\_ 2 x 12 V 2,9 Ah  
Opladen via handbediening: \_\_\_\_\_ Standaard  
Opladen via rail: \_\_\_\_\_ Naar keuze, accessoire  
Opladen via uiteinde: \_\_\_\_\_ Naar keuze, accessoire  
Beschermingsklasse, liftmotor: \_\_\_\_\_ IP20  
Beschermingsklasse, handbediening: \_\_\_\_\_ IPX4



**CE** RiseBasic300M voldoet aan de vereisten voor klasse 1-producten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

Ga naar [www.handicare.com](http://www.handicare.com) voor meer informatie.

SystemRoMedic™ is een totaaloplossing voor eenvoudige transfers. Het concept bevat producten voor vier categorieën transfers die voorzien in de meeste behoeften en transfersituaties.

**Transfers**, tussen twee locaties verplaatsen. **Positioneren**, op dezelfde locatie herpositioneren.

**Begeleiden**, bij het mobiliseren. **Tillen**, manueel en mechanisch.



# handicare

Handicare  
Weteringweg 5-9  
2641 KM Pijnacker  
Tel: 015 - 369 54 40  
Fax: 015 - 369 71 64  
[www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
[info.LS@handicare.com](mailto:info.LS@handicare.com)