

MiniLift125

SystemRoMedic™

Maximale
belasting
125 kg

Gemakkelijk verstelbare tilarm

Gemakkelijk te manoeuvreren

Zorgvragers kunnen hun handen op meerdere plekken neerzetten dankzij de greepvriendelijke handgrepen en zijsteunen

Snelle handleiding op de lift zelf

Uniek patroon bij opstaan

Batterij met hoge capaciteit en een lange levensduur

Compact formaat

Ingebouwde oplader

Zachte, verstelbare onderbeensteunen


Vergrendelbare achterwielen

Voetplaat met lage opstaphoogte en antislippoppervlak

Elektrisch verstelbaar onderframe

Een unieke oplossing voor actief opstaan met elektrisch verstelbaar onderframe

MiniLift 125 is een mobiele opstalift die gebruikt wordt in combinatie met een speciaal aangepast tilvest om zorgvragers met een functiebeperking te helpen opstaan vanuit een zittende positie. MiniLift125 is gebouwd voor een volledig unieke en zeer comfortabele ervaring bij het opstaan vanuit zitten. De lift is bovendien compact, handig en zeer eenvoudig te manoeuvreren, dat in combinatie met de mogelijkheid om de instellingen optimaal aan te passen aan iedere zorgvrager maakt de lift zeer bruikbaar in de meeste locaties en situaties.

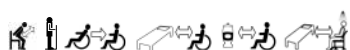

MiniLift125

Zeer comfortabel, actief opstaan met natuurlijk bewegingspatroon

MiniLift125 is ontwikkeld om zorgvragers zo voorzichtig en comfortabel mogelijk te helpen bij het omhoog komen vanuit een zittende naar een staande positie. Zorgvragers kunnen hun handen op meerdere plekken neerzetten dankzij de handgrepen en zijsteunen. De stabiele voetplaat met antislip is zeer laag en de onderbeensteunen en tilarm kunnen voor iedere zorgvrager optimaal aangepast worden. Als de MiniLift125 gebruikt wordt in combinatie met de juiste tilaccessoires worden zorgvragers ondersteund onder de voeten, aan de voorkant van de onderbenen en in de rug, voor een veilige en zekere, maar actieve procedure bij het gaan staan. De constructie brengt de zorgvrager veilig naar voren en omhoog in een natuurlijk bewegingspatroon, terwijl tegelijkertijd de beenspieren en het evenwicht worden getraind. MiniLift125 wordt gemaakt van staal voor stabiliteit en sterkte, en is geschikt voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 125 kg.

Actief opstaan met natuurlijk bewegingspatroon.



PRODUCTSPECIFICATIE

MiniLift125___ Mobiele opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe___ Artikelnr. 400641434

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale belasting	125 kg
Lengte van zorgvrager, min.-max.	1400-2000 mm
Materiaal	Staal met poedercoating
Hoogte	995 mm
Lengte	900 mm
Breedte onderframe, buitenmaat	600-890 mm
Breedte onderframe, binnenmaat	445-745 mm
Gewicht	39 kg
Aanpassing onderframe	Elektrisch
Hoogte van voetplaat, voor zorgvrager	50 mm
Grootte zwenkwielen, diameter	80 mm
TiJsnelheid, zonder belasting	35 mm per seconde
Nooddaalfunctie	Handmatig en elektrisch



MiniLift125 voldoet aan de vereisten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen voor producten van Klasse 1, 93/42/EEG.



Ergonomische en eenvoudig te gebruiken handbediening met vier knoppen.



Nieuwe bedieningsconsole met diagnosemogelijkheden zoals liftteller en overbelastingindicatie. Noodstopknop gemakkelijk toegankelijk op bedieningseenheid.

ACCESSOIRES

Artikelnr.	Productnaam	Beschrijving
45500003-009	ThoraxSling	Polyester, X-Small
45500004	ThoraxSling	Polyester, Small
45500006	ThoraxSling	Polyester, Medium
45500007	ThoraxSling	Polyester, Large
45500008	ThoraxSling	Polyester, X-Large
45500009	ThoraxSling	Polyester, XX-Large
45550004	ThoraxSling	Afveegbaar, Small
45550006	ThoraxSling	Afveegbaar, Medium
45550007	ThoraxSling	Afveegbaar, Large
45550008	ThoraxSling	Afveegbaar, X-Large
45550009	ThoraxSling	Afveegbaar, XX-Large
45590004	ThoraxSling	Wegwerp, niet-geweven, Small, 5 st.
45590006	ThoraxSling	Wegwerp, niet-geweven, Medium, 5 st.
45590007	ThoraxSling	Wegwerp, niet-geweven, Large, 5 st.
45590008	ThoraxSling	Wegwerp, niet-geweven, X-Large, 5 st.
45600004	ThoraxSling	Met zitsteun, polyester, Small
45600006	ThoraxSling	Met zitsteun, polyester, Medium
45600007	ThoraxSling	Met zitsteun, polyester, Large
45600008	ThoraxSling	Met zitsteun, polyester, X-Large
45690004	ThoraxSling	Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, Small, 5 st.
45690006	ThoraxSling	Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, Medium, 5 st.
45690007	ThoraxSling	Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, Large, 5 st.
45690008	ThoraxSling	Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, X-Large, 5 st.
70200033	CalfStrap	Voor MiniLift125 vanaf serienummer 125001653
770200089	Handbediening HB33-6	6 knoppen, met indicatie van onderhoud, batterijstatus en overbelasting
70200029	Externe oplader Linak	Externe oplader voor alle modellen en uitvoeringen van MiniLift

ThoraxSling SystemRoMedic™

ThoraxSling is een speciaal aangepast en zeer comfortabel tilvest voor bij het opstaan dat gebruikt wordt in combinatie met de SystemRoMedic™-opstaliften uit de MiniLift-serie. Het tilvest is gemakkelijk aan te brengen door de zorgverlener, terwijl de zorgvrager zich veiliger kan voelen bij het trainen van opstaan en staan. ThoraxSling maakt ook toiletbezoek gemakkelijker. ThoraxSling is verkrijgbaar in twee modellen: een met steun in de rug (ThoraxSling) en een dat ook steun onder het zitvlak biedt (ThoraxSling met zitsteun), en in verschillende materialen en maten.

Andere modellen en uitvoeringen van mobiele opstaliften MiniLift

MiniLift is verkrijgbaar in verschillende modellen en uitvoeringen met uiteenlopende tilcapaciteit, met elektrisch of handmatig verstelbaar onderframe en met poten van standaardhoogte of lage poten voor gebruik met lagere bedden.

Artikelnr.	Productnaam	Beschrijving
401100334	MiniLift200	Mobiele opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe, max. belasting 200 kg
60300010	MiniLift160EM	Mobiele opstalift met handmatig verstelbaar onderframe, max. belasting 160 kg
60300011	MiniLift160EM	Mobiele opstalift met handmatig verstelbaar onderframe, lage poten, max. belasting 160 kg
60300012	MiniLift160EE	Mobiele opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe, max. belasting 160 kg
60300013	MiniLift160EE	Mobiele opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe, lage poten, max. belasting 160 kg

Ga naar www.handicare.com voor meer informatie.



handicare

Maskinvägen 17,
972 54 Luleå, Zweden
Tel.: +46 (0)8 557 62 200
Fax: +46 (0)8 557 62 299
www.handicare.com
info@handicare.se

SystemRoMedic™ is een complete oplossing voor gemakkelijke verplaatsingen. Het concept bestaat uit vier productgebieden die voorzien in de meeste behoeften van verschillende verplaatsingssituaties.

Verplaatsing tussen twee locaties. **Positionering** op dezelfde locatie.

Ondersteuning voor mobiliteit. **Tillen**, zowel handmatig als mechanisch.