

MiniLift200


SystemRoMedic™

Maximale
belasting
200 kg



Een unieke oplossing voor actief opstaan met elektrisch verstelbaar onderframe

MiniLift200 is een mobiele opstalift die gebruikt wordt in combinatie met een speciaal aangepast tilvest om zorgvragers met een functiebeperking te helpen opstaan vanuit een zittende positie. MiniLift200 is gebouwd voor een volledig unieke en zeer comfortabele ervaring bij het opstaan vanuit zitten. De lift is bovendien compact, handig en zeer eenvoudig te manoeuvreren, dat in combinatie met de mogelijkheid om de instellingen optimaal aan te passen aan iedere zorgvrager maakt de lift zeer bruikbaar in de meeste locaties en situaties.

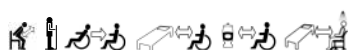

MiniLift200

Zeer comfortabel, actief opstaan met natuurlijk bewegingspatroon

MiniLift200 is ontwikkeld om zorgvragers zo voorzichtig en comfortabel mogelijk te helpen bij het omhoog komen vanuit een zittende naar een staande positie. Zorgvragers kunnen hun handen op meerdere plekken neerzetten dankzij de handgrepen en zijsteunen. De stabiele voetplaat met antislip is zeer laag en de onderbeensteunen en tilarm kunnen voor iedere zorgvrager optimaal aangepast worden. Als de MiniLift200 gebruikt wordt in combinatie met de juiste tilaccessoires worden zorgvragers ondersteund onder de voeten, aan de voorkant van de onderbenen en in de rug, voor een veilige en zekere, maar actieve procedure bij het gaan staan. De constructie brengt de zorgvrager veilig naar voren en omhoog in een natuurlijk bewegingspatroon, terwijl tegelijkertijd de beenspieren en het evenwicht worden getraind. MiniLift200 wordt gemaakt van staal voor stabiliteit en sterkte, en is ook geschikt voor lange en zware zorgvragers met een gewicht van maximaal 200 kg

Actief opstaan met natuurlijk bewegingspatroon.



PRODUCTSPECIFICATIE

MiniLift200 — Mobiele opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe — Artikelnr. 401100334

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale belasting	200 kg
Lengte van zorgvrager, min.-max.	1 400–2 000 mm
Materiaal	Staal met poedercoating
Hoogte	1 000 mm
Lengte	980 mm
Breedte onderframe, buitenmaat	590–1 030 mm
Breedte onderframe, binnenmaat	450–875 mm
Gewicht	49 kg
Aanpassing onderframe	Elektrisch
Hoogte van voetplaat, voor zorgvrager	95 mm
Grootte zwenkwielen, diameter	100 mm
Tilnelheid, zonder belasting	35 mm per seconde
Nooddaalfunctie	Handmatig en elektrisch



MiniLift200 voldoet aan de vereisten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen voor producten van Klasse 1, 93/42/EEG.






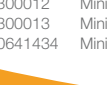


Ergonomische en eenvoudig te gebruiken handbediening met vier knoppen.



Nieuwe bedieningsconsole met diagnosemogelijkheden zoals liftteller en overbelastingsindicatie. Elektrische noodstopknop beschikbaar op de bedieningsconsole.

ACCESSOIRES

	Artikelnr.	Productnaam	Beschrijving
 45500003-009	45500003	ThoraxSling	Polyester, X-Small
	45500004	ThoraxSling	Polyester, Small
	45500006	ThoraxSling	Polyester, Medium
	45500007	ThoraxSling	Polyester, Large
	45500008	ThoraxSling	Polyester, X-Large
 45550004-009	45500009	ThoraxSling	Polyester, XX-Large
	45550004	ThoraxSling	Afveegbaar, Small
	45550006	ThoraxSling	Afveegbaar, Medium
	45550007	ThoraxSling	Afveegbaar, Large
	45550008	ThoraxSling	Afveegbaar, X-Large
 45600004-008	45550009	ThoraxSling	Afveegbaar, XX-Large
	45590004	ThoraxSling	Wegwerp, niet-geweven, Small, 5 st.
	45590006	ThoraxSling	Wegwerp, niet-geweven, Medium, 5 st.
	45590007	ThoraxSling	Wegwerp, niet-geweven, Large, 5 st.
	45590008	ThoraxSling	Wegwerp, niet-geweven, X-Large, 5 st.
 45690004-008	45600004	ThoraxSling	Met zitsteun, polyester, Small
	45600006	ThoraxSling	Met zitsteun, polyester, Medium
	45600007	ThoraxSling	Met zitsteun, polyester, Large
	45600008	ThoraxSling	Met zitsteun, polyester, X-Large
	45690004	ThoraxSling	Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, Small, 5 st.
 45690004-008	45690006	ThoraxSling	Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, Medium, 5 st.
	45690007	ThoraxSling	Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, Large, 5 st.
	45690008	ThoraxSling	Met zitsteun, wegwerp, niet-geweven, X-Large, 5 st.
	70200033	Calf Strap	Voor MiniLift200 vanaf serienummer 200001277
	70200012	SlingBarWrap MiniLift	Zachte, afveegbare bescherming voor handgreep van MiniLift200
 400641434	70200089	Handbediening HB33-6	6 knoppen, met indicatie van onderhoud, batterijstatus en overbelasting
	70200029	Externe oplader Linak	Externe oplader voor alle modellen en uitvoeringen van MiniLift

ThoraxSling SystemRoMedic™

ThoraxSling is een speciaal aangepast en zeer comfortabel tilvest voor bij het opstaan dat gebruikt wordt in combinatie met de SystemRoMedic™-opstaliften uit de MiniLift-serie. Het tilvest is gemakkelijk aan te brengen door de zorgverlener, terwijl de zorgvrager zich veiliger kan voelen bij het trainen van opstaan en staan. ThoraxSling maakt ook toiletbezoek gemakkelijker. ThoraxSling is verkrijgbaar in twee modellen: een met steun in de rug (ThoraxSling) en een dat ook steun onder het zitvlak biedt (ThoraxSling met zitsteun), en in verschillende materialen en maten.

Andere modellen en uitvoeringen van mobiele opstaliften MiniLift

MiniLift is verkrijgbaar in verschillende modellen en uitvoeringen met uiteenlopende tilcapaciteit, met elektrisch of handmatig verstelbaar onderframe en met poten van standaardhoogte of lage poten voor gebruik met lagere bedden.

Artikelnr.	Productnaam	Beschrijving
60300010	MiniLift160EM	Mobile opstalift met handmatig verstelbaar onderframe, max. belasting 160 kg
60300011	MiniLift160EM	Mobile opstalift met handmatig verstelbaar onderframe, lage poten, max. belasting 160 kg
60300012	MiniLift160EE	Mobile opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe, max. belasting 160 kg
60300013	MiniLift160EE	Mobile opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe, lage poten, max. belasting 160 kg
400641434	MiniLift125	Mobile opstalift met elektrisch verstelbaar onderframe, max. belasting 125 kg

Ga naar www.handicare.com voor meer informatie.



handicare

Maskinvägen 17,
972 54 Luleå, Zweden
Tel.: +46 (0)8 557 62 200
Fax: +46 (0)8 557 62 299
www.handicare.com
info@handicare.se

SystemRoMedic™ is een complete oplossing voor gemakkelijke verplaatsingen. Het concept bestaat uit vier productgebieden die voorzien in de meeste behoeften van verschillende verplaatsingssituaties.

Verplaatsing tussen twee locaties. **Positionering** op dezelfde locatie.

Ondersteuning voor mobiliteit. **Tillen**, zowel handmatig als mechanisch.